



Kommunikasjon



Alle mennesker har behov for å kunne uttrykke følelser og behov. Gewa tilbyr et bredt spekter av hjelpemidler innen alternativ og supplerende kommunikasjon. Disse kan bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får en bedre og enklere hverdag.

Kommunikasjon
- en forutsetning for deltakelse.

Datautstyr og tilbehør

Switch2Scan - styring av iPad

Switch2Scan - trådløs bryterstyring av iPad:

- Skanner mellom og innenfor app'ene
- Gir tilgang til App Store og App'er
- Gir tilgang til media- og fotofunksjoner
- Blar i iBooks
- Gir tilgang til internet og e-post
- Mulighet for å skanne tastaturet på iPad'en

Pretorian Switch2Scan
Bestillingsnr.:1136837



SimplyWorks® for iPad - trådløs bryterstyring

SimplyWorks® for iPad - trådløs bryterstyring:

- Media- og tastaturfunksjonalitet
- Støtter skanning med brytere eller joystick
- Tillater bruk av eksisterende SimplyWorks® utstyr
- Gir tilgang til e-post og internet

Pretorian SimplyWorks for iPad
Bestillingsnr.:1136885



Pretorian SimplyWorks®

SimplyWorks® er et fullt integrert trådløst system av datatekniske hjelpemidler spesielt for brukere med dårlige motoriske ferdigheter som skaper nye inkluderende læringsopplevelser både for enkeltpersoner og grupper. Inntil 6 enheter (i hvilken som helst kombinasjon) kan brukes samtidig på datamaskinen og opp til 6 brytere kan brukes samtidig for å kontrollere batteridrevne leker etc. Det betyr at opptil 6 brukere kan samarbeide på en gang.

Alle produkter som bærer SimplyWorks® logoen fungerer sammen. Det er et registrert varemerke og identifiserer produkter som bruker trådløs teknologi utviklet av Pretorian Technologies Ltd.



Pretorian SimplyWorks® Mottaker

SimplyWorks Mottaker er en USB-mottaker som kan betjene opptil 6 SimplyWorks sendere på en gang. Krever ingen ekstra driver og passer både PC og Mac. Rekkevidde ca. 10 meter.

Pretorian SimplyWorks® Mottaker
Bestillingsnr.:1136730 HMS art. nr.: 177900



Datautstyr og tilbehør

Pretorian SimplyWorks® Trackball

SimplyWorks Trackball kan brukes sammen med alle andre SimplyWorks mottakere fra Pretorian. Den har 2 stk bryterinnnganger for å få høyre-/venstreklikk på eksterne brytere. Den har ingen mekaniske slidedeler.

Pretorian SimplyWorks® Trackball
Bestillingsnr.:1136700 HMS art. nr.: 177905



Pretorian SimplyWorks® Joystick

SimplyWorks Joystick kan brukes sammen med alle andre SimplyWorks mottakere fra Pretorian. Den har 2 stk bryterinnnganger for å få høyre-/venstreklikk på eksterne brytere. Krever veldig liten kraft (0,5 newton) for å flytte markøren. Justerbar hastighet. T-grep og Softball-grep følger med.

Pretorian SimplyWorks® Joystick
Bestillingsnr.:1136710 HMS art. nr.: 177902



Pretorian SimplyWorks® Smoothie Bryter

SimplyWorks Smoothie Bryter er en trådløs bryter med 125 mm diameter og lav profil. Krever lite krefter for å betjene og kan betjenes over hele bryteroverflaten.

Kan brukes som en vanlig 1-funksjonsbryter, men har i likhet med SimplyWorks Send en rekke PC-funksjoner. Kommer i fargene rød, blå, grønn og gul. Skruerhull for standard innfestning.

Pretorian SimplyWorks® Smoothie Bryter
Bestillingsnr.:1136890 HMS art. nr.: 177898



Pretorian SimplyWorks® Send

En bryterboks i SimplyWorks-serien. Blir linken mellom en hvilken som helst bryter med 3,5 mm Jackplugg og hvilken som helst SimplyWorks mottaker. Har en rekke PC-funksjoner som f.eks venstre-/høyreklikk, piltaster, enter, mellomrom m.m.

Pretorian SimplyWorks® Send
Bestillingsnr.:1136740 HMS art. nr.: 177910



Datautstyr og tilbehør

Pretorian SimplyWorks® Send-6

En bryterboks i SimplyWorks-serien. Blir linken mellom en hvilken som helst bryter med 3,5 mm Jackplugg og hvilken som helst SimplyWorks mottaker. Har en rekke PC-funksjoner som f.eks venstre-/høyreklikk, piltaster, enter, mellomrom m.m.

Samme som SimplyWorks Send, men med 6 bryterinnganger.

Pretorian SimplyWorks® Send-6
Bestillingsnr.:1136745 HMS art. nr.: 177911



Pretorian SimplyWorks® Control Lite

SimplyWorks Control Lite brukes for å kontrollere leker eller annet som bruker batteri eller 3,5 mm Jackplugg. Liten og nett og kan lett festes på den leken som skal bryterstyres. Styres trådløst av f.eks. SimplyWorks Smoothie Bryter.

Control Lite
Bestillingsnr.:1136870



Pretorian SimplyWorks® Control

SimplyWorks Control brukes for å kontrollere leker eller annet som bruker batteri eller 3,5 mm Jackplugg. Liten og nett og kan lett festes på den leken som skal bryterstyres.

Styres trådløst av f.eks SimplyWorks Smoothie Bryter og har flere funksjoner som trykk og hold, trykk på/av og trykk for aktiver 12, 24, 36, 48 sekunder eller 1, 2, 5, 10 minutter.

Control
Bestillingsnr.:1136750



Pretorian SimplyWorks® Control Pro

SimplyWorks Control Pro brukes for å kontrollere leker eller annet som bruker batteri eller 3,5mm Jackplugg. Control Pro har 2 uavhengige kanaler. Styres trådløst av f.eks. SimplyWorks Smoothie Bryter, og har flere funksjoner som trykk og hold, trykk på/av, trykk for aktiver 4, 8, 16, 24, 32, 40 sekunder eller 1, 2, 5, 10, 15 minutter. Har også funksjon for samarbeid, begge brytere må trykkes for å aktivere eller bryter 1 slår "på" og bryter 2 slår "av".

Control Pro
Bestillingsnr.:1136880



Datautstyr og tilbehør

Pretorian SimplyWorks® Smooth Talker

For å spille av beskjeder eller styre leker, PC etc. Lese inn flere meldinger. Kan også brukes som en bryter med SimplyWorks Control.

SEQUAL: En melding pr. trykk i riktig rekkefølge.

RANDOM: En melding pr. trykk i tilfeldig rekkefølge.

CHOICE: Leser bare 2 meldinger. Melding nr. 1 når bryter trykkes, melding nr. 2 med ekstern bryter. Resten av meldingene ignoreres.

CONVERSE: Annenhver melding leses med hver sin bryter (int/ekst). Man kommer ikke videre før samtalepartnerneren har trykket.

PROMPT: Man velger melding via ekstern bryter med lavt volum.

Når riktig melding er valgt, leses denne med normalt lydnivå.

Smooth Talker

Bestillingsnr.:1136760



Pretorian SimplyWorks® Energise

SimplyWorks Energise kan styre 2 forskjellige elektriske apparater (230V/50HZ) trådløst ved hjelp av andre SimplyWorks brytere eller sendere. Den har i tillegg 2 stk. 3,5 mm Jack innganger.

SimplyWorks Energise har 2 uavhengige kanaler. Styres trådløst og har flere funksjoner som trykk og hold, trykk på/av, trykk for aktiver 4, 8, 16, 24, 32, 40 sekunder eller 1, 2, 5, 10, 15 minutter. Har også funksjon for samarbeid, begge brytere må trykkes på for å aktivere eller bryter 1 slår "på" og bryter 2 slår "av". Maks effekt 2300W (10A).

Pretorian SimplyWorks® Energise

Bestillingsnr.:1136860 HMS art. nr.: 177909



Pretorian Smoothie Bryter 125

Smoothie Bryter 125 er en en bryter med 125 mm diameter og lav profil. Krever lite krefter for å betjene og kan betjenes over hele bryteroverflaten.

Kommer i fargene rød, blå, grønn og gul. Skruerull for standard innfestning. 3,5 mm Jackplugg.

Smoothie Bryter 125

Bestillingsnr.:1136720



Pretorian Optima Trackball

Robust og ergonomisk Trackball uten noen mekaniske deler. Venstre-/ høyreklikk og Drag-Lock knapp. Bryterinnganger for alternative brytere til venstre-/høyreklikk. USB/PS2. «Plug and play».

Pretorian Optima Trackball

Bestillingsnr.:1136850 HMS art. nr.: 145185



Datautstyr og tilbehør

Pretorian Optima Joystick

Robust og ergonomisk Joystick. Venstre-/høyreklikk og Drag-Lock knapp. Bryterinnganger for alternative brytere til venstre-/høyreklikk. Enkel justering av hastighet ved hjelp av en knapp med auditiv tilbakemelding. T-grep og Softball-grep følger med. USB/PS2. «Plug and play».

Pretorian Optima Joystick

Bestillingsnr.:1136840 HMS art. nr.: 149163



Pretorian Optimax Trackball

Robust og ergonomisk Trackball uten noen mekaniske deler. Venstre-/høyreklikk og Drag-Lock knapp. Bryterinnganger for alternative brytere til venstre-/høyreklikk. USB/PS2. «Plug and play». Det er også 2 bryterinnganger på USB-mottakeren (venstre-/høyreklikk).

Som Optima Trackball, men trådløs.

Trackball

Bestillingsnr.:1136790 HMS art. nr.: 147279



Pretorian Optimax Joystick

Robust og ergonomisk Joystick. Venstre-/høyreklikk og Drag-Lock knapp. Bryterinnganger for alternative brytere til venstre-/høyreklikk. Enkel justering av hastighet ved hjelp av en knapp med auditiv tilbakemelding. T-grep og Softball-grep følger med. USB/PS2. «Plug and play». Det er også 2 bryterinnganger på USB-mottakeren (venstre-/høyreklikk).

Som Optima Joystick, men trådløs.

Bestillingsnr.:1136800



Pretorian n-Abler Trackball

Robust, ergonomisk og tilpasningsvennlig Trackball med venstre-/høyreklikk og dobbeltklikk, Drag-Lock og Scroll-knapp (opp/ned eller høyre/venstre). 2 bryterinnganger med valgfri funksjon (høyre-/venstre-klikk).

N-Abler Trackball kan settes i den retningen bruker ønsker og Trackball kan justeres i forhold til dette. Justerbar hastighet.

Pretorian n-Abler Trackball

Bestillingsnr.:1136770 HMS art. nr.: 134522



Datautstyr og tilbehør

Pretorian n-Abler Joystick

Som n-Abler Trackball, men Joystick. T-grep og Softball-grep følger med.

Pretorian n-Abler Joystick
Bestillingsnr.:1136780 HMS art. nr.: 134521



Pretorian Orbitrack

Mus med berøringsflate. Krever veldig liten kraft for å betjenes da den ikke har noen bevegelige deler. 2 bryterinnnganger. Hastighet og retning er justerbare.

Pretorian Orbitrack
Bestillingsnr.:1136810 HMS art. nr.: 141974



Pretorian Track-IT

Muserstatter som gjør at du kan styre datamaskinen med en eller flere brytere. Dette gjøres ved hjelp av skanning/dveling. Skanne-/dvele hastigheten er selvfølgelig justerbar, eller du kan også styre skanning ved hjelp av en bryter. Det er også inngang for bryter 3 og 4 som er programmerbare med venstre-/høyre-/dobbelklikk eller Drag-Lock.

Pretorian Track-IT
Bestillingsnr.:1136830



Pretorian Test-IT

For å teste 1-funksjonsbrytere. Det tennes et lys når bryter er koblet til. Lys nr. 2 tennes når bryteren aktiveres.


Pretorian Test-IT
Bestillingsnr.:1136820



Datautstyr og tilbehør

Pretorian Technologies

Pretorian Technologies har over 40 års erfaring med utvikling og produksjon av styringssystemer og leverer i dag et bredt spekter av styringssystemer og datatekniske hjelpemidler til både privatpersoner og industrien. Ved behov for alternative løsninger, vennligst kontakt Gewa AS.

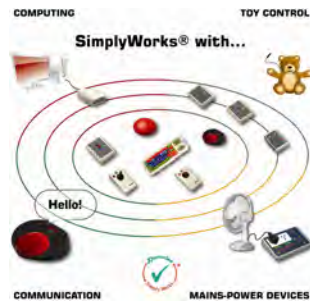

Oversikt funksjoner

En enkel oversikt som viser Pretorian Technology sine muserstatter (ekskl. SimplyWorks) og deres funksjoner og bruksområder. Du finner oversikten i et større format under "Datautstyr og tilbehør" på www.gewa.no. Der finner du også andre aktuelle produkter innenfor området data/kommunikasjon.

Product Features										
Feature	Mouse	Keyboard	Mousepad	Mouse Wheel	Mouse Button	Mouse Cable	Mouse Case	Mouse Battery	Mouse Charger	Mouse Receiver
Product Name										
Product Type										
Product Code										
Product Description										
Product Status										
Product Category										
Product Sub-Category										
Product Manufacturer										
Product Weight										
Product Dimensions										
Product Price										
Product Availability										
Product Warranty										
Product Support										
Product Reviews										

Talemaskiner

GoTalk 32 Express

Med den nye GoTalk Express 32 har du mulighet til å velge mellom Standard modus eller Express modus. I Standard modus har du samme funksjon som GoTalk 32+. Her har du 32 knapper i 5 nivåer, og i tillegg har du 2 knapper (+ og ►) som er like i alle nivåer.

I Express modus har du mulighet til å sette sammen inntil 8 meldinger (knapper), og spille av disse ved hjelp av ► (play). Meldingene spilles da av i samme rekkefølge som de ble trykket inn. Du kan også lagre en sammensatt melding pr. nivå. Du kan også benytte GoTalk Express 32 ved hjelp av mange forskjellige skanningsmetoder.

Bestillingsnr.:1111430



GoTalk 32 Express - skanningsmetoder

- Automatisk skanning – med én eller to brytere.
- Step skanning – med to brytere.
- Visuell skanning – fire LED lys omgir hver knapp.
- Auditiv skanning – ta opp inntil 1,5 sekund pr. knapp eller rad
- Auditiv skanning – en pipelyd for hver bevegelse i valgte mønster.
- Redusert antall knapper – du kan skanne 4, 8, 16 eller 32 knapper
- Mange skannemønstre – f.eks. rader, kolonner, kvadrater m.m.
- Skanningshastighet – 3 valg: Sakte, Medium, eller Fort.



Bladvendere

Readable 3 bladvender

Readable 3 er en elektronisk bladvender for bøker og tidsskrifter. Kan plasseres på bord med medfølgende bordstativ, eller på gulvstativ med hjul (ekstrautstyr), slik at bladvenderen lett kan flyttes rundt.

Bladvenderen betjenes med medfølgende IR-sender, eller med 1-funksjonsbryter (scanning). Readable 3 har bryterinngang både på bladvenderen og IR-senderen. Den blar forover og bakover og har mange innstillingsmuligheter. Den justeres lett inn etter hva som skal leses og denne justeringen gjøres uten verktøy.

Readable 3 bladvender

Bestillingsnr.:1151100 HMS art. nr.: 149663

Gulvstativ

Bestillingsnr.:1151125 HMS art. nr.: 149664



Stativ til Readable bladvender

Et høydejusterbart gulvstativ på hjul som gjør det enkelt å flytte Readable bladvender rundt på gulvet. Du kan også justere vinkelen på bladvenderen slik at du kan bruke bladvenderen både når du sitter og leser og ligger og leser.



Turny Bladvender

Elektronisk bladvender som egner seg for bøker, tidsskrifter og pocketbøker fra 100-200 mm bredde og opp til 40 mm tykkelse. Bladvendingen utføres ved hjelp av en elektronisk styrt arm med gripeelement og kleberull. Bladvenderen styres av et enkelt lett trykk på en individuell tilpasset bryter. Kan settes direkte på bord eller festes på flyttbart stativ. Bladvenderen kan bla både fremover og bakover.

Bladvenderen kan betjenes ved hjelp av luftputebryter (leveres med som standard), sug/blåse, alle typer 1-funksjonsbrytere eller IR-styring.

Turny bladvender

Bestillingsnr.:1150100 HMS art. nr.: 049154

V-fot Secustand til Turny bladvender

Bestillingsnr.:1150080 HMS art. nr.: 148286



Turny Switch bladvender

Bladvender Turny Switch sengemodell er utviklet for de som må ligge og lese. Det er samme bladvender som Turny, men den har i tillegg en elektrisk vippefunksjon som gjør det mulig å ligge og lese. I tillegg har den en meget kraftig V-fot med hjul som lett skyves under sengen. Vinkelen på vippefunksjonen er regulerbart. Turny Switch leveres alltid med V-fot.

Bladvenderen kan betjenes ved hjelp av luftputebryter (leveres som standard), sug/blåse, alle typer 1-funksjonsbrytere eller IR-styring.

Turny Switch bladvender

Bestillingsnr.:1150050 HMS art. nr.: 041459

V-fot til Turny Switch (inkl.)

Bestillingsnr.:1150104



Brytere og tilbehør

Hånd-/fingerbryter FK-1

Hånd-/fingerbryter «Buddy Button». Stor trykkflate, solid utførelse i flere farger. Leveres med 1,5 m kabel. Diameter 65 mm.

- Høyde: 15 mm, vekt: 60 g.
- Trykkraft: 2N (200 g).

Grønn: Best. nr. 1124522 - HMS art.nr.145044
Rosa: Best. nr. 1124524 - HMS art.nr. 145046
Skotskrutet: Best.nr. 1124526 - HMS art.nr. 145048
Rød: Best. nr. 1124521

Blå
Bestillingsnr.:1124525 HMS art. nr.: 145047
Lilla
Bestillingsnr.:1124523 HMS art. nr.: 145045
Gul
Bestillingsnr.:1124520 HMS art. nr.: 145042



Pikobutton 50

Pikobutton 50 er en robust 1-funksjonsbryter med liten trykkraft (65 g). Diameter 50 mm. Høyde 13 mm.

Blå: Bestillingsnr. 1451502
Orange: Bestillingsnr. 1451504
Sort: Bestillingsnr. 1451505
Hvit: Bestillingsnr. 1451506
Gull: Bestillingsnr. 1451507
Sølv: Bestillingsnr. 1451508
Transparent: Bestillingsnr. 1451509

Rød
Bestillingsnr.:1451500
Grønn
Bestillingsnr.:1451501
Gul
Bestillingsnr.:1451503



Pikobutton 30

Pikobutton 30 er en robust 1-funksjonsbryter med liten trykkraft (75 g). Diameter 30 mm. Høyde 13 mm.

Sort: Bestillingsnr. 1451005
Hvit: Bestillingsnr. 1451006
Gull: Bestillingsnr. 1451007
Sølv: Bestillingsnr. 1451008
Orange: Bestillingsnr. 1451004

Rød
Bestillingsnr.:1451000
Grønn
Bestillingsnr.:1451001
Gul
Bestillingsnr.:1451003



Joggle bryter med justerbar trykkraft, liten

Joggle-bryter fra Penny & Giles med justerbar trykkraft. Rotér den fargede toppen på bryteren og du kan øke og minske trykkflaten fra 200 g til 1,5 kg.

Bryteren har 15 forskjellige posisjoner. Diameter 63 mm. Leveres med 1 m ledning og 3,5 mm Jack plugg.

Gul
Bestillingsnr.: 1137110

Rød
Bestillingsnr.:1137111 HMS art. nr.: 142007
Blå
Bestillingsnr.:1137112 HMS art. nr.: 142009
Grønn
Bestillingsnr.:1137113



Brytere og tilbehør

Joggle bryter med justerbar trykkraft, stor

Joggle-bryter fra Penny & Giles med justerbar trykkraft. Rotér den fargede toppen på bryteren og du kan øke og minske trykkflaten fra 200 g til 1,5 kg. Bryteren har 15 forskjellige posisjoner.

Diameter 127 mm, høyde 32 mm.
Leveres med 1 m ledning og 3,5 mm Jack plugg.

Gul
Bestillingsnr.: 1137100

Rød
Bestillingsnr.:1137102 HMS art. nr.: 142007

Blå
Bestillingsnr.:1137101 HMS art. nr.: 142009

Grønn
Bestillingsnr.:1137103



Hånd-/fingerbryter CM-4-1

Hånd-/fingerbryter Zygo. 1-funksjonsbryter med en sluttende kontakt. Leveres med 1,5 m ledning og 1/8" Jack plugg.
Liten fysisk størrelse: 95x40x10 mm. Trykkraft 80 g.

Blå
Bestillingsnr.: 1124143

Hvit
Bestillingsnr.: 1124145

Grønn
Bestillingsnr.:1124141 HMS art. nr.: 145049

Rød
Bestillingsnr.:1124142 HMS art. nr.: 145050

Orange
Bestillingsnr.:1124144 HMS art. nr.: 145052



Putebryter KK-1Z

Putebryter Gewa. 1-funksjonsbryter som er lagt inn i mykt bomullstrekk (vaskbart). Kan legges på puta eller i senga og betjenes med hode eller hånd. Leveres med 1,5 m kabel uten plugg.

- Størrelse: 105x60x23 mm.
- Vekt: 50 g.
- Trykkraft: 2N (100 g.)

Putebryter KK-1Z
Bestillingsnr.:1124500 HMS art. nr.: 042084



Vippebryter CM-7-1

Vippebryter Zygo med meget fleksibel tunge som kan bevegtes til begge sider. Bryteren kan festes til fast underlag eller til 1/4" rør. Bryteren har mange anvendelsesmuligheter.

- Størrelse: 95x45x10 mm.
- Vekt: 30 g.
- Trykkraft: 1N (100 g.)

Vippebryter CM-7-1
Bestillingsnr.:1124170 HMS art. nr.: 044556



Brytere og tilbehør

Vippebryter CM-2-1

Vippebryter Zygo med fleksibel tunge som kan beveges til begge sider. Bryteren kan skrues til fast underlag eller festes til 1/4" rør. Har store anvendelsesmuligheter. Brytertungen gir etter for store bevegelser. Leveres med 1,5 m kabel og 1/8" Jack plugg.

- Størrelse: 165x45x10 mm.
- Vekt: 15 g.
- Trykkraft: 0,3N (30 g.)

Vippebryter CM-2-1
Bestillingsnr.:1124120 HMS art. nr.: 044555



Hode-/kinnbryter CM-8 og CM-9

Hode-/kinnbryter Zygo. Stor skumgummipute som trenger liten påvirkning for å gi kontakt, f.eks. for hodestyring av elektrisk rullestol. En sluttende kontakt. Leveres med 1,5 m kabel og 1/8" Jack plugg.

- Lengde CM-9: 110 mm
- Lengde CM-8: 160 mm
- Trykkraft: 110 - 220 g

For informasjon om festeanordninger se www.gewa.no.

CM-8 og CM-9
Bestillingsnr.:1124160



Fingerbryter 1-funksjon

Trykkraft 75 g.

Fingerbryter 1-funksjon
Bestillingsnr.:1451510



Fingerbryter 1-funksjon

Fingerbryter 1-funksjon
Bestillingsnr.:1451511



Brytere og tilbehør

Tommelbryter

Trykknapp, Zygo. Lett å holde i hånden. Et bra alternativ for dem som har lettere for å klare å betjene en knapp når de kan gripe rundt den. Meget lett å betjene. Leveres med 1,5 m ledning og 1/8" Jack plugg.

- Størrelse: 90x30x20 mm.
- Vekt: 30 g.
- Trykkraft: 2N (200 g).

Tommelbryter

Bestillingsnr.:1124150 HMS art. nr.: 145886



Hode-/kinnbryter Dergonik

Hodebryter/kinnbryter montert på svanehals, inkl. feste for seng/bord. Lett å regulere.

Trenger meget liten trykkraft. Betjeningsdelen består av en plastkule som ruller. Meget behagelig for bruker.

Med svanehals, lengde 40 cm.

Hode-/kinnbryter Dergonik

Bestillingsnr.:1126016 HMS art. nr.: 054696




PUH blåsekontakt

Superlett blåsekontakt for alarm og omgivelseskontroll. Denne bryteren er en ny type blåsekontakt, utviklet for personer som ikke klarer å betjene vanlige sug/blås kontakter. Med PUH trenger en ikke å ha munnstykke i munnen for å gi en puls. Et lett pust er nok til å slutte en signalkontakt som igjen kan styre f.eks. alarm, trykkteltelefon, omgivelseskontroll og talemaskin.

Avstanden mellom blåsekontakten og munnen kan være opptil 10 cm. Leveres komplett med bordstativ og holder som kan festes til bord. Maks. belastning 0,5A/50 V. Følsomhet: 2,5 mbar.

PUH blåsekontakt

Bestillingsnr.:1124750 HMS art. nr.: 113529

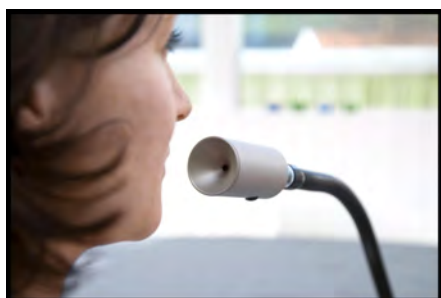

INTEGRASWITCH sug- og blåsekontakt

Både omgivelsekontroll, kommunikasjon, leker, programvare eller oppkallingssystemer kan styres ved hjelp av INTEGRASWITCH. Sug- og blåsekontakten kan brukes i både sittende og liggende stilling.

- Effektiv/enkel rengjøring av munnstykke (også i oppvaskmaskin)
- Absolutt hygienisk
- Valgfritt festesystem
- Suge- og blåsetrykket kan stilles inn uavhengig av hverandre.

Bestillingsnr.:1107455 HMS art. nr.: 142918



Brytere og tilbehør

Luftstyrte brytere, 1-funksjon

Pneumatisk bryter 1-funksjon. Kobles til CM-3, 1-funksjonsbryter.

Gummi blåse - diameter 40 mm, vekt: 30 g
Bestillingsnr.:1124130 HMS art. nr.: 072274
Gummipute, liten - diameter 65 mm, vekt: 100 g
Bestillingsnr.:1128166
Gummipute, stor - diameter 90 mm, vekt: 100 g
Bestillingsnr.:1128164



Luftstyrt bryter, 1- og 2-funksjon

Sug/blås munnstykke inkl. stativ. Kobles til CM-3, 1-funksjonsbryter eller SB-2, 2-funksjonsbryter.

Fleksibel arm 50 cm og bordtvinge 30 cm svanehals (total lengde 80 cm). Vekt 850 g. Kan også leveres med rørfeste.

1- og 2-funksjon
Bestillingsnr.:1124720 HMS art. nr.: 146225



Tillegg for luftstyrte brytere

Gummi blåse Zygo, gripevennlig - diameter 40 mm, vekt 30 g
Bestillingsnr.:1128168 HMS art. nr.: 145861
Gummipute, stor - diameter 90 mm, vekt 100 g
Bestillingsnr.:1128164
Gummipute, liten - diameter 65 mm, vekt 100 g
Bestillingsnr.:1128166



Stemmestyrte bryter LAK 821

Stemmestyrte bryter LAK 821 fra Knop er laget for å hjelpe brukere og personalet til å få gitt melding hvis brukerne ikke er i stand til å betjene et vanlig signalanlegg på annen måte. Stemmebryterens følsomhet er innstillbar. Det er også mulig å stille hvor lenge lyden skal vare før alarm gis (for å unngå alarm ved hosting, nysing o.l.)

Bryteren kan også leveres med radiosender (LAK 821 HF).

LAK 821
Bestillingsnr.:2223465
Separat mikrofon
Bestillingsnr.:2223467



Brytere og tilbehør

Hånd-/fingerbryter FK-4F-RB

4-funksjons hånd-/fingerbryter Gewa med 4 utenpåliggende trykkflater.

FK-4F-RB
Bestillingsnr.:1124630



Hånd-/fingerbryter FK-1F

Opphøyet, stor trykkflate og meget liten trykkraft.

FK-1F
Bestillingsnr.:1124550 HMS art. nr.:
060147



IR sender BigJack

For styring av Radio/CD/TV. Senderen passer til alle som trenger store og tydelige brytere.

Bestillingsnr.:2402500 HMS art. nr.:
029136



Hodepekepinne

En smidig og bekvem pekepinne for personer med god hodekontroll.

AD1, for voksne
Bestillingsnr.:1130390 HMS art. nr.:
085384

AD2, for barn
Bestillingsnr.:1130380 HMS art. nr.:
085385



Laserlampe

Laserpekelampen er både effektiv og sikker. Kan tilpasses med individuelle brytere.

Laserlampe
Bestillingsnr.:1160400 HMS art. nr.:
060137



Styring av Radio/CD/TV, 2 funksjoner

IR-3SP er en Gewa IR-sender som har mulighet til tilkopling av to 1-funksjonsbrytere.

Bestillingsnr.:2401108 HMS art. nr.:
029147



Styring av Radio/CD/TV, 5 funksjoner

For brukere med dårlig motorikk har vi laget denne for styring av inntil 5 funksjoner.

Sender IR-5SP, spesialtilpasset
Bestillingsnr.:2406901

Stjernebryter, spesialtilpasset;
Bestillingsnr.:1124530



Hånd-/fingerbryter CM-1-1

Hånd-/fingerbryter Zygo i kraftig utførelse, metall. Med stor myk trykkflate.

CM-1-1
Bestillingsnr.:1124100



Hånd-/fingerbryter FK-2F, 2 funksjoner

Store utenpåliggende trykkflater. Liten betjeningskraft. Trykkraft: 1N (100 g).

FK-2F, 2 funksjoner
Bestillingsnr.:1124580 HMS art. nr.:
054685



Brytere og tilbehør

Hånd-/fingerbryter FK-1H

FK-1H
Bestillingsnr.:1124560



Hånd-/fingerbryter FK-2H, 2 funksjoner

Store nedsenkede trykkflater for å unngå ufrivillige tastetrykk. Kunststoff.
Trykkraft: IN (100 g.)

FK-2H, 2 funksjoner
Bestillingsnr.:1124590 HMS art. nr.: 050563



Hånd-/fingerbryter FK-4H-RB, 4 funksjoner

4 nedfelte trykkflater for å unngå ufrivillige tastetrykk. Kan styre inntil 4 funksjoner. Leveres med ledning 2 m og 6 pins DIN plugg. Størrelse: 120x65x33 mm. Vekt: 230 g. Trykkraft: 0,4N (40 g.)

FK-4H-RB, 4 funksjoner
Bestillingsnr.:1124640



Selvøkende 4-funksjonsbryter

Selvøkende (skannende) 4-funksjonsbryter 5600 ASC-1. Stillbar søkehastighet. Leveres med ledning og 5 pins DIN plugg. Driftsspenning 24 AC.

Selvøkende 4-funksjonsbryter
Bestillingsnr.:1125600



Albuebrytere

Albuebrytene leveres i 3 forskjellige utførelser/kvaliteter.

Albuebryter AKA
Bestillingsnr.:2200237 HMS art. nr.: 167114
Albuebryter Prisma
Bestillingsnr.:2200236 HMS art. nr.: 143039
Albuebryter AKD
Bestillingsnr.:2200235 HMS art. nr.: 143038



Brytere og tilbehør

Hånd-/hakekontakt HK 4

Hånd-/hakekontakt med 4 funksjoner, komplett med universalstativ, 2 stillingsledd og bordtvinge. Kan også festes til rør ved hjelp av rørtvinge. Leveres med 5-polig DIN plugg.

HK 4

Bestillingsnr.:1125300 HMS art. nr.: 042415



Stativ universal TH-1G

Kan tilpasses en rekke brytere. Universalstativ består av:

- bordtvinge med 200 mm rør, Ø 10 mm
- stålrør 500 mm
- 2 stk. stålkryssledd
- 1 stk. universalfeste med 100 mm rør, Ø 10 mm

For andre spesialvarianter, vennligst kontakt oss!

TH-1G

Bestillingsnr.:2231250 HMS art. nr.: 134932



Stativer tilbehør

Rørtvinge for feste til:

- 18 mm rør: Best.nr.1128106
- 22 mm rør: Best.nr.1128109
- 26 mm rør: Best.nr.1129107
- 40 mm rør: Best.nr.1128108

Stålrør Ø 10 mm:

- Lengde 200 mm: Best.nr.1128102
- Lengde 500 mm: Best.nr.1128104

Bordtvinge

Bestillingsnr.:1128100

Stålkryssledd

Bestillingsnr.:1128120



Sug/blås munnstykke inkl. stativ

Kobles til CM-3; 1-funksjonsbryter eller SB-2; 2-funksjonsbryter.

- Lengde: 80 cm.
- Vekt: 850 g.

1-funksjonsbryter

Bestillingsnr.:1124720 HMS art. nr.: 146225

2-funksjonsbryter

HMS art. nr.: 061888



Symboler for tale

Nilbild grunnpakke

Gjennom ulike kommunikasjonsbilder har mange barn og voksne, som ellers ikke har mulighet til å kommunisere/prate, en større sjanse til å kunne nå sine nærmeste, for eksempel med følelser, ønsker og behov.

Bildene finnes som stive kort i farger eller som svart/hvite konturbilder i egne hefter. Det finnes totalt 612 ferdig tegnede bilder. Bildene er gruppert med et eget register som gjør det lett å finne frem til emner og bilder. Størrelsen på bildene er 95x95 mm.

Nilbild har også en rekke andre muligheter og produkter.

CD-ROM med 612 digitale bilder + komplett symbolsett 612 bilder

Bestillingsnr.:1112735 HMS art. nr.: 020588

Grunnoppsett med 387 bilder

Bestillingsnr.:1112701 HMS art. nr.: 020622

Grunnoppsett med 507 bilder

Bestillingsnr.:1112704 HMS art. nr.: 020623



Nilbild

CD-ROM med 612 digitale bilder

Best.nr.:1112734 - HMS art. nr. 020587

Konturbildehefte med 102 bilder

Best.nr.: 1112725

Konturbildehefte med 348 bilder

Best.nr.: 1112726

Flerbrukerlisens/skolelisens: Best.nr.: 1112736

Symbolsett 1 - 103 bilder

Bestillingsnr.:1112702 HMS art. nr.: 020582

Symbolsett 2 - 17 bilder;

Bestillingsnr.:1112703 HMS art. nr.: 020583

Symbolsett 3 - 107 bilder

Bestillingsnr.:1112705 HMS art. nr.: 020584



Nilbild uketavler

Kommunikasjonstavle og uketavle i velcro. Uketavlen har syv felt for ukens syv dager med forskjellige farger for hver dag. På baksiden er tavlen i ensfarget blå velcro.

Nilbild har også ensfarget kommunikasjonstavle. Den ene siden er dyplå og den andre siden er varmgul.

Tavlene er rammet inn med en lys treramme. 50 cm borrelås leveres med hver tavle.

Uketavle 50 x 70 cm

Bestillingsnr.:1112719 HMS art. nr.: 020612

Kommunikasjonstavle

Bestillingsnr.:1112718 HMS art. nr.: 136488



Nilbild dagbøker

Ukedagbok med 7 farger i velcro A4 stående

Bestillingsnr.:1112749 HMS art. nr.: 020601

Ukedagbok med 7 farger i velcro A5 stående

Bestillingsnr.:1112750 HMS art. nr.: 020600

Ukedagbok med 7 farger i plast A5 stående

Bestillingsnr.:1112748




Symboler for tale

Nilbild småbildeveske

Småbildeveskene kan brukes både til bokstaver og bilder. De leveres i 2 forskjellige utgaver med 2 ulike størrelser på lommene.

Småbildeveske med bildelomme 6 x 10 cm
Bestillingsnr.:1112738 HMS art. nr.: 136530
Småbildeveske med bildelomme 5 x 7 cm
Bestillingsnr.:1112711 HMS art. nr.: 020609

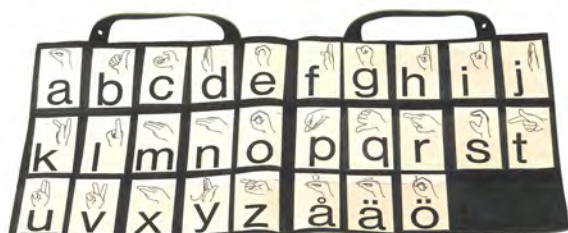

Nilbild kommunikasjonspermer

Kommunikasjonspermer, spiralinnbundet i VELCROKVALITET, kan brukes som leke-, trenings- eller aktivitetspermer. Man kan f.eks. lage forskjellige skjemaer til språktrening eller benytte permene i leke-situasjoner.

Permene er 3-delte og leveres i forskjellige størrelser og farger.

Kommunikasjonsperm i velcro A4
Bestillingsnr.:1112746 HMS art. nr.: 020599
Kommunikasjonsperm i velcro A5
Bestillingsnr.:1112745 HMS art. nr.: 020598



Nilbild kommunikasjonspermer

Kommunikasjonspermer, spiralinnbundet i PLASTKVALITET, kan brukes som leke-, trenings- eller aktivitetspermer. En kan f.eks. lage forskjellige skjemaer til språktrening eller benytte permene i lekesituasjoner.

Permene er 3-delte og leveres i forskjellige størrelser og farger.

Kommunikasjonsperm i plast A4
Bestillingsnr.:1112714 HMS art. nr.: 136637
Kommunikasjonsperm i plast A5
Bestillingsnr.:1112713 HMS art. nr.: 136644
Kommunikasjonsperm i plast A6
Bestillingsnr.:1112715 HMS art. nr.: 136654



Nilbild kommunikasjonsmappe - sammenleggbar

Denne 6-delte kommunikasjonsmappen, som enkelt kan foldes sammen, er utmerket både til store kommunikasjonskjemaer og til noen få bilder. Den er enkel å ta med seg.

Når mappen er brettet sammen, er den i A4- eller A5-format. Mappen leveres både i stående og liggende format.

Kommunikasjonsmappe A4-størrelse, liggende
Bestillingsnr.: 1112742

Kommunikasjonsmappe A5-størrelse, stående
Bestillingsnr.:1112743 HMS art. nr.: 020619
Kommunikasjonsmappe A5-størrelse, liggende
Bestillingsnr.:1112744 HMS art. nr.: 020620
Kommunikasjonsmappe A4-størrelse, stående
Bestillingsnr.:1112741



Symboler for tale

Nilbild, hvem gjør hva?

«Hvem gjør hva?»-mapper. Aktivitetsmapper for språk og kommunikasjonsstrening av sekvenser og hendelsesforløp.

Bildeperm med 10 plastlommer

Bestillingsnr.:1112717 HMS art. nr.: 136593

Bildeperm med 18 plastlommer

Bestillingsnr.:1112751



Nilbild bildelommer

Bidelommene er enkle og praktiske. De kan brukes i mange sammenhenger i ulike former for kommunikasjonsstrening og er veldig praktiske å ta med seg til ulike aktiviteter.

Bidelommene er sydd i kunstlær og finnes i fargene rød, grønn og blå. Størrelse: 10,5 x 10,5 cm.

Bidelomme med plass for 6 bilder

Bestillingsnr.:1112739

Bidelomme med plass for 8 bilder

Bestillingsnr.:1112740 HMS art. nr.: 020616



Nilbild bildelommer vegg

Bildeommer til å henge på veggen passer utmerket til å sette opp i forskjellige rom hvor en har forskjellige aktiviteter; kjøkken, badetrom, lekerom osv.

Bidelommen har en malje i hvert hjørne slik at de kan henges opp på veggen.

Bidelomme vegg for 6 bilder

Bestillingsnr.:1112697 HMS art. nr.: 020606

Bidelomme vegg for 8 bilder

Bestillingsnr.:1112698 HMS art. nr.: 020607

Bidelomme vegg for 9 bilder

Bestillingsnr.:1112699



Nilbild bildetavler

Bildetavler med luker for bilder. Bildetavlene kan benyttes både ved lek og innlæring. En velger bilde og setter det bak valgfri luke. En kan få trefot til bildetavlene som gjør at de står støtt.

Trefot for hustavle/bildetavle

Bestillingsnr.: 1112731

Trefot for dørtavle

Bestillingsnr.: 1112728

Hustavle med 3 luker, A3

Bestillingsnr.:1112730

Biltavle med 2 luker, A3

Bestillingsnr.:1112729

Dørtavle med 1 luke

Bestillingsnr.:1112727



Symboler for tale

Nilbild bildestativ

Trestativet har plass til 8 bilder/fotografier. For noen kan det være enklere å se bildene på et stativ i stedet for på bordet. For de som skal undervise kan dette ofte være en fordel.

Stativet er lakkert, så det er både slitesterkt og lett å rengjøre.

Bestillingsnr.:1112712



Nilbild arbeidstavle

Arbeidstavle A3-størrelse


Bestillingsnr.:1112753

Arbeidstavle A4-størrelse

Bestillingsnr.:1112754

Arbeidstavle A6-størrelse

Bestillingsnr.:1112755

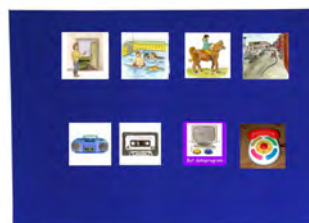


Nilbild småbildemapper

Nilbild småbildemapper 3,5 x 3,5 cm

Bestillingsnr.:1112650

Nilbild småbildemapper 5,5 x 5,5 cm

Bestillingsnr.:1112655

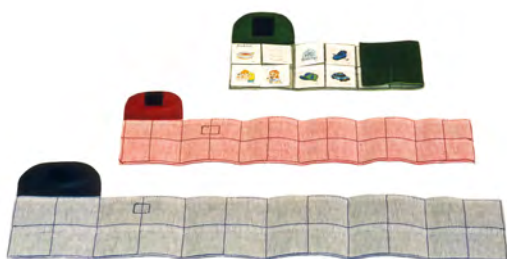

Nilbild klasseromsskjema

Klasseromsskjemaet kan brukes for å strukturere en dag for en klasse eller en annen arbeidsgruppe. Det finnes lommer til bilder som illustrerer klokken, bilde for aktivitet/ordbilde, samt en lomme til et fotografi av lærer eller andre. Størrelsen på skjemaet er 55 x 150 cm. Det leveres med et ark med klokker uten visere, som man kopierer og setter inn egne tider.

Lengst nede på skjemaet er det lommer hvor man kan plassere bilder og aktivitetskort man er ferdig med.

Bestillingsnr.:1112720 HMS art. nr.: 136502



Symboler for tale

Nilbild postkasse

Postkasse i tre for lek og trening. Brukes til å øve på og kommunisere med bilder. Man kan anvende en postkasse på forskjellige måter: " Vi sender bildepost til hverandre! Hva fikk du? Et fly!" Postkassen finnes i 4 forskjellige farger.

Postkasse GUL
Bestillingsnr.: 1112633

Postkasse RØD
Bestillingsnr.:1112630
Postkasse GRØNN
Bestillingsnr.:1112631
Postkasse BLÅ
Bestillingsnr.:1112632



Nilbild øyepeketavle


Bestillingsnr.:1112610 HMS art. nr.: 136489



Nilbild treskap

Bestillingsnr.:1112620



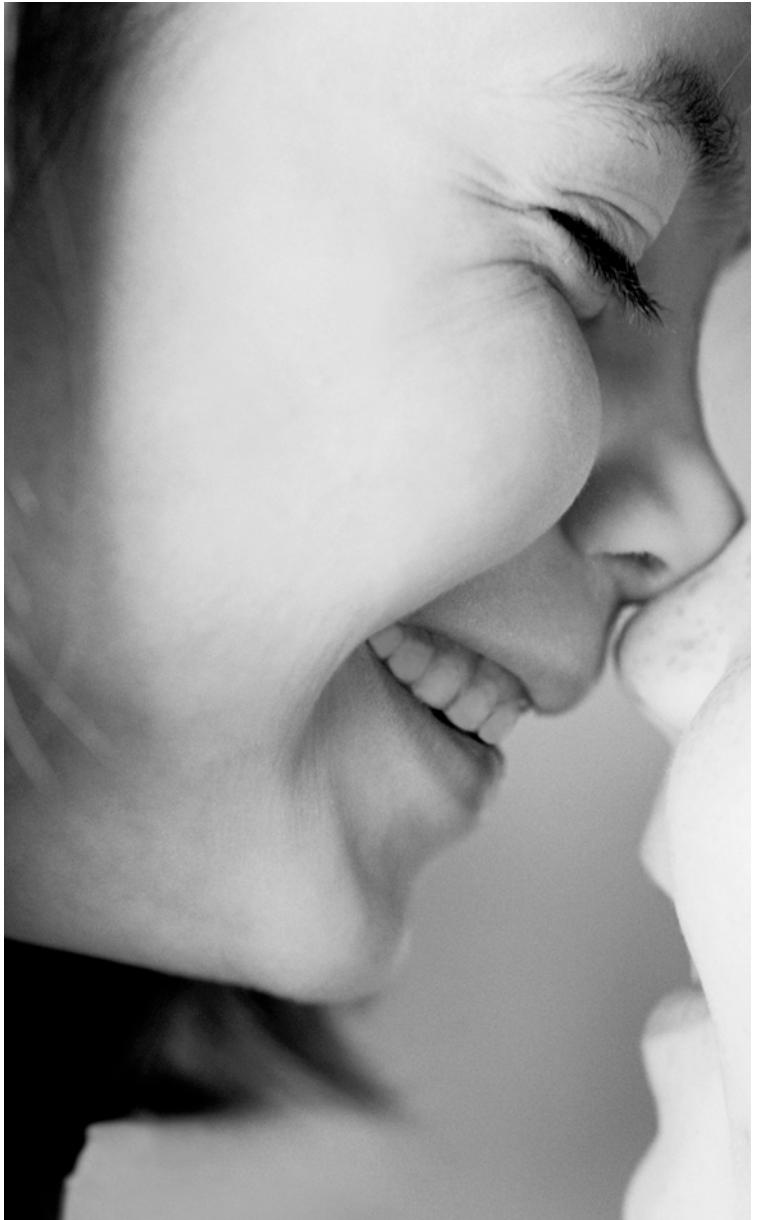



Syn



En stor andel synshemmede vil langt på vei kunne opprettholde sine daglige aktiviteter og få økt livskvalitet ved tilpasning og opplæring i bruk av riktige hjelpemidler.

Gewa representerer Reinecker, Europas største produsent av elektroniske hjelpemidler på dette området.