

Produktinformasjon

JUNA 9 | 7 POWER BTE

Power BTE er et kraftig , robust og moderne høreapparat som passer for moderate til store hørselstap. Det er tilgjengelig i kategoriene Juna 9

og Juna 7. Det leveres med hook, men kan også tilpasses med Bernafon sitt miniFit tynnslangesystem.



JU 9 | 7 P

FARGER



SABE

sand
beige



MSIL

metallic
silver



ANBR

antique
bronze



MAC

metallic
anthracite

BUNNSKALL



MAC

metallic
anthracite



SABE

sand
beige



MAC

metallic
anthracite



COBR

cocoa
brown



JEBL

jet
black



COBU

cobalt
blue

BUNNSKALL



MSIL

metallic silver

Egenskaper

- Retningsvirkning
- Kompatibel med trådløst tilbehør
- Autotelefon
- Telespole
- Vannavstøtende materialer
- Støv- og vannsikker (IP58)
- DAI / FM adapter
- Hook og tynnslangeadapter

Bruk

- Temperatur: +1°C til +40°C
- Fuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende

Lagring og transport

Temperatur og fuktighet må ikke overskride disse verdiene over lengre perioder ved transport og lagring:

- Temperatur: -25°C til +60°C
- Fuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende




POWER BTE PRODUKTOVERSIKT



- Hook uten filter
- - - Hook med filter
- Tynnslange 1,3 mm
- - - Tynnslange 0,9 mm

Inneholder FCC ID: U6XF2BTEPP
Inneholder IC: 7031A-F2BTEPP

Tilpasningsområde – P

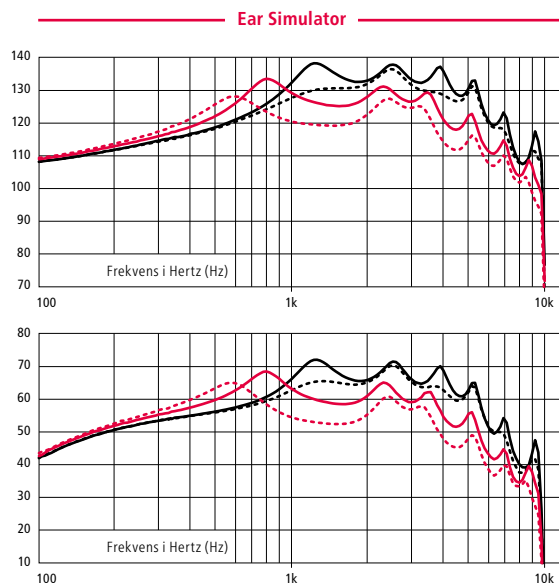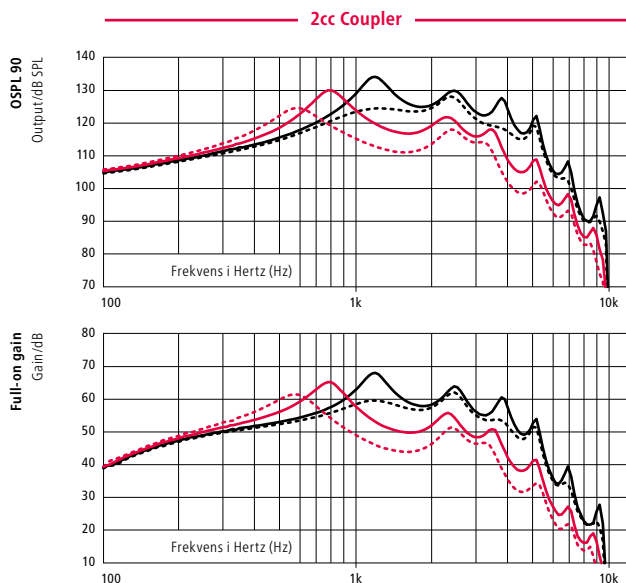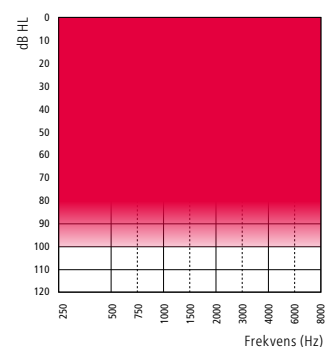

	2cc Coupler			Ear Simulator		
	HOOK	TYNNSLANGE 1.3	TYNNSLANGE 0.9	HOOK	TYNNSLANGE 1.3	TYNNSLANGE 0.9
OSPL90, Peak (dB SPL)	134*	130	125	138*	133*	128
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	126	117	111	134*	125	119
OSPL90, HFA (dB SPL)	128	120	114	—	—	—
Full-on Gain, Peak (dB)	68	65	61	72	68	65
Full-on Gain, 1600 Hz (dB)	59	50	44	67	58	52
Full-on Gain, HFA (dB)	62	54	48	—	—	—
Reference Test Gain (dB)	51	42	37	58	50	43
Strømforbruk hvile (mA)	1.3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Strømforbruk drift (mA)	1.7	1,8	1,8	1,5	1,5	1,4
Forvregning 500/800/1600 Hz (%)	<3/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<5/<3/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvensområde (Hz)	100 – 5600	100 – 5600	100 – 5800	—	—	—
Egenstøy ¹⁾ dB(A)	16	18	20	18	20	22
Telespole 1 mA /m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	88	79	73	96	87	80
Telespole HFA SPLITS (dB SPL)	108	100	94	—	—	—
Programvelger	●	●	●	●	●	●
Volumkontroll	●	●	●	●	●	●
Telespole	●	●	●	●	●	●
Autotelefon	●	●	●	●	●	●
Batteristørrelse	13	13	13	13	13	13
Mikrofonsystem	dir	dir	dir	dir	dir	dir
FM-adapter	○	○	○	○	○	○
DAI-adapter	○	○	○	○	○	○
Hook	●	—	—	●	—	—
Tynnslange 0.9/1.3	—	○	○	—	○	○

● standard ○ valgfri

¹⁾ Tekniske data målt med ekspansjon tilsvarende testboks-innstillingene.

"2cc" viser til coupler som samsvarer med IEC 60318-5:2006. "Ear simulator" viser til coupler som samsvarer med IEC 60318-4:2010.


Anvendte versjoner: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.

* Advarsel til Audiografen

Maks lydtryknivå kan overskride 132 dB SPL (IEC 60318-4). Spesielle hensyn må tas ved tilpasning da det kan være risiko for å skade den resterende hørselen til høreapparatbrukeren.

AKUSTISKE VALGMULIGHETER

Foruten standard hook kan P BTE tilpasses med miniFit tynnslinger, domer og støpte propper.

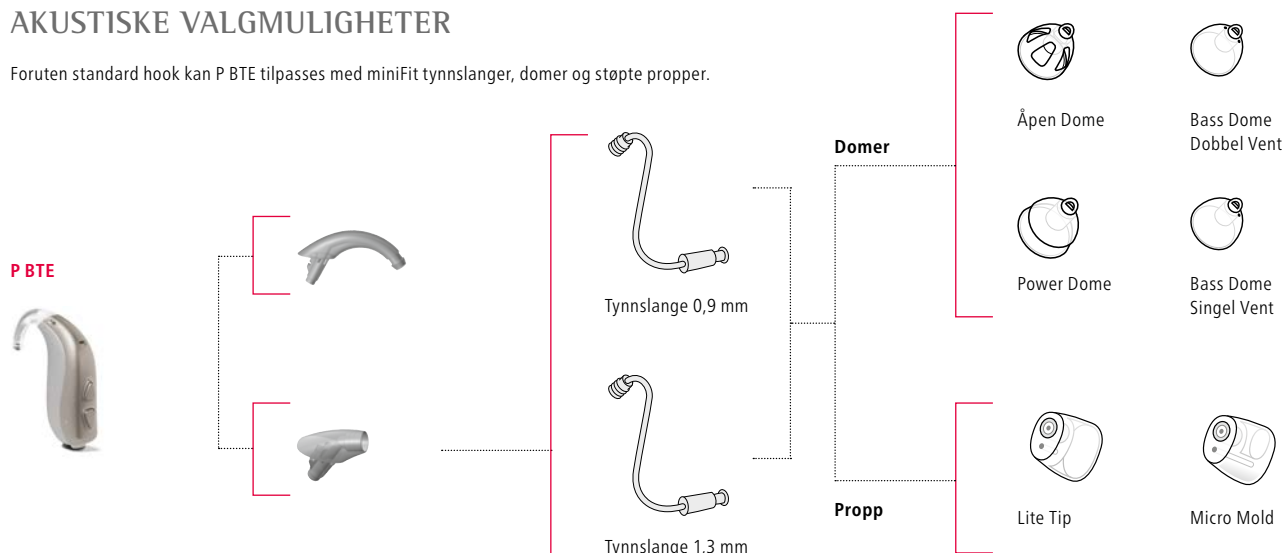

TILPASNINGSGUTSTYR

Power BTE programmeres med Bernafon Oasis, versjon 22.0 eller nyere, en NOAH-kompatibel MS-Windows®-basert PC-software. HI-PRO, HI-PRO 2, NOAHlink, EXPRESSlink³, FittingLINK eller nEARcom kreves. En stand-alone installasjon av Oasis er også mulig.

Operativsystem

Microsoft® Windows® 8.1, 32/64 bit, alle versjoner
 Microsoft® Windows® 8, 32/64 bit, alle versjoner
 Microsoft® Windows® 7, 32/64 bit, alle versjoner
 Microsoft® Windows Vista®, 32/64 bit, alle versjoner
 Microsoft® Windows® XP SP3

Noah

Noah 4 (alle versjoner)
 Noah 4.3 (minimum for Windows® 8)
 Alle versjoner av Noah 3 (ikke anbefalt)
 NB: Dersom du benytter OAS software, bruk kun versjoner med Noah driver oppdatert til minimum standard over.

TILBEHØR	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
Prog. kabel, Nr. 2 New standard (HI-PRO)	Blå, venstre	384-20-033-00
Prog. kabel, Nr. 2 New standard (HI-PRO)	Rød, høyre	384-20-032-00
Prog. kabel, Nr. 2 New standard (NOAHlink)	Blå, venstre	384-20-035-00
Prog. kabel, Nr. 2 New standard (NOAHlink)	Rød, høyre	384-20-034-00
FittingLINK	Trådløs programmeringsenhet for programmering direkte fra PC til høreapparat.	144720

TILBEHØR

PRODUKT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
DAI-adapter (AP1000)	For P BTE	142207
FM-adapter (FM10)	For P BTE	142328
Tilpasningsskrin miniFit tynnslange	Inneholder alle deler og verktøy for miniFit	163095

**Hovedkontor****Sveits**

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Telefon +41 31 998 15 15
Telefaks +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Norge

Gewa AS
Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon 66 99 60 00
Telefaks 66 80 94 90
www.gewa.no

CE 0543 0682



SWISS 
Engineering

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing • Our passion