


Produktinformasjon

JUNA 9 | 7 PICO RITE


Juna Pico RITE er et lite høreapparat som passer for brukere med milde til kraftige hørselstap. Juna Pico RITE kan tilpasses med tre ulike miniFit lydgivere, samt et utvalg domer og formstøpte propper. Juna Pico

RITE inneholder alle de unike egenskapene man finner i Bernafons Audio Efficiency™ og er i tillegg kompatibelt med alt vårt trådløse tilbehør.


PICO RITE 60-LYDGIVER

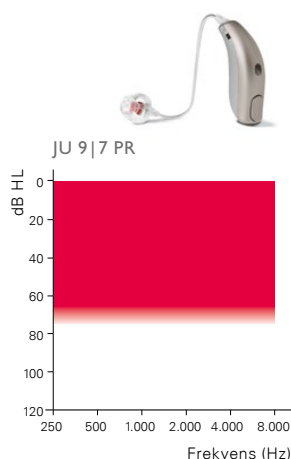

PICO RITE 85-LYDGIVER

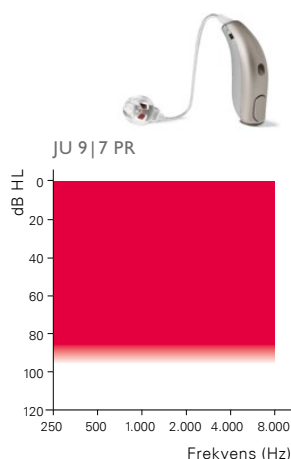

PICO RITE 100-LYDGIVER

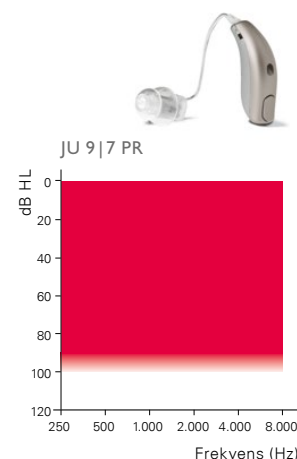

Audio Efficiency™

Tale

- ChannelFree™
- Speech Cue Priority™
- Frequency Composition™
- True Directionality™*
- i-VK

Komfort

- Adaptiv Feedback-kansellering Pluss
- Adaptiv Støyreduksjon Pluss
- Reduksjon av impulsstøy
- Reduksjon av etterklang*
- Binaural koordinering

Individuelle egenskaper

- Live musikk- og Kino-program
- Komfort på fly-program*
- Trådløs tilkobling
- Språkbasert målforsterkning
- REMfit™

Flere egenskaper

Tekniske egenskaper

- Digital signalbehandling opp til 10 kHz
- Multi-program
- Prioritert lydmiljø
- Autotelefon
- Vannavstøtende materialer
- Støv og vannsikre (IP57)

Personlige egenskaper

- Datalogging
- VK-læring
- VK-læringsbegrenser* og Smart VK*
- Velg mellom 14 lytteprogrammer
- Mulighet for 4 lytteprogrammer

* Kun Juna 9 PR



JU 9|7 PR
100-Lydgiver





JU 9|7 PR
85-Lydgiver





JU 9|7 PR
60-Lydgiver

— Målinger med 100-Lydgiver
- - - Målinger med 85-Lydgiver
— Målinger med 60-Lydgiver

2CC COUPLER

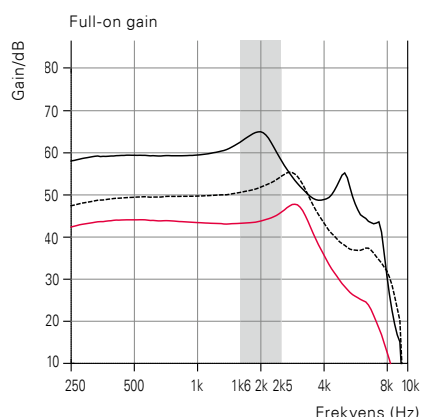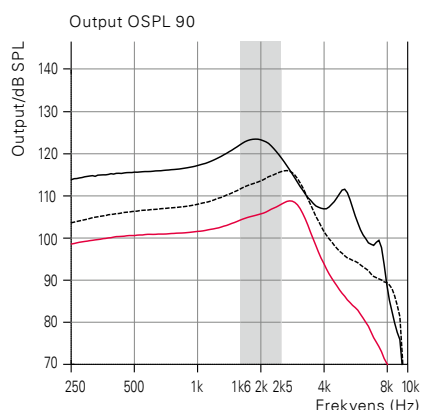

EAR SIMULATOR

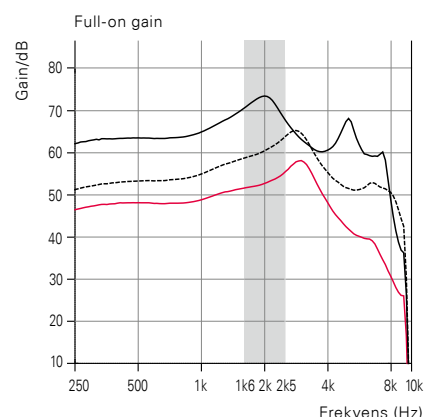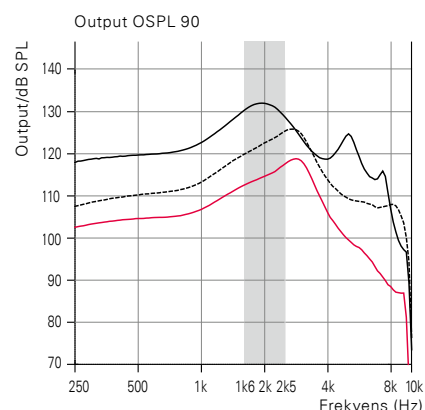

2CC COUPLER

	100-LYDGIVER	85-LYDGIVER	60-LYDGIVER
OSPL 90, Peak (dB SPL)	123	116	109
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	122	111	104
HFA-OSPL 90 (dB SPL)	119	112	105
Full-On Gain, Peak (dB)	65	55	48
Full-On Gain, 1600 Hz (dB)	62	50	43
HFA Full-On Gain (dB)	60	51	44
Reference Test Gain (dB)	44	36	28
Strømforbruk hvile (mA)	1.3	1.2	1.2
Strømforbruk drift (mA)	1.6	1.5	1.3
Batteristørrelse	312		
Forvregning 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvensområde (Hz)	100 – 7700	100 – 8200	100 – 6500
Egenstøy ¹⁾ , dB(A)	17	17	17
Programvelger	● ***		
Volumkontroll	***		
Autotelefon	●		

EAR SIMULATOR

	100-LYDGIVER	85-LYDGIVER	60-LYDGIVER
OSPL 90, Peak (dB SPL)	132**	126	119
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	130	120	112
HFA-OSPL 90 (dB SPL)	–	–	–
Full-On Gain, Peak (dB)	73	65	58
Full-On Gain, 1600 Hz (dB)	70	59	51
HFA Full-On Gain (dB)	–	–	–
Reference Test Gain (dB)	57	45	37
Strømforbruk hvile (mA)	1.3	1.2	1.2
Strømforbruk drift (mA)	1.4	1.3	1.3
Batteristørrelse	312		
Forvregning 500/800/1600 Hz (%)	<5/<3/<3	<2/<2/<2	<5/<5/<2
Frekvensområde (Hz)	–	–	–
Egenstøy ¹⁾ , dB(A)	15	20	19
Programvelger	● ***		
Volumkontroll	***		
Autotelefon	●		

¹⁾ Technical data measured with expansion, corresponding to the test box measurement settings.

“2cc” refers to a coupler according to IEC 60318-5. “Ear simulator” refers to a coupler according to IEC 60318-4. Applied versions: IEC 60118-0:1994, IEC 60118-7:2005, ANSI S3.22:2009.

** Spesielle hensyn må tas ved tilpasning av høreapparater som har et maksimum lydtryknivå som overskrider 132 dB SPL (IEC 60318-4) da det kan være fare for å skade den resterende hørselen til høreapparatbrukeren.

*** Programbryter kan programmeres til å fungere som volumkontroll

JUNA 9 | 7 PICO RITE FARGER

BUNNSKALL MAC (METALLIC ANTHRACITE)



BUNNSKALL MSIL (METALLIC SILVER)



JUNA 9 | 7 PICO RITE AKUSTISKE VALGMULIGHETER

100-LYDGIVER



Domer

Bass dome
Dobbel vent.



Bass dome
Singel vent.



Power Dome



Propp

Power Mold



85-LYDGIVER



Domer

Åpen dome



Bass dome
Dobbel vent.



Bass dome
Singel vent.



Power Dome




60-LYDGIVER




Propp

Micro Mold

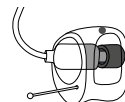

Lite Tip

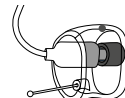

TILPASNINGSGUTSTYR

Juna 9|7 Pico RITE programmeres med Bernafon Oasis, versjon 20.0 eller nyere, en NOAH-kompatibel MS Windows-basert PC-software. NOAH med en HI-PRO USB, HI-PRO 2, NOAHlink, EXPRESSlink³ eller nEARcom kreves. En stand-alone installasjon av Oasis er også mulig.

Operativsystem

Windows® 8.1, 32/64 bit, alle versjoner
Windows® 8, 32/64 bit, alle versjoner
Windows® 7, 32/64 bit, alle versjoner
Windows® Vista, 32/64 bit, alle versjoner
Windows® XP SP3

Noah

Noah 4 (alle versjoner)
Noah 4.3 (minimum for Windows® 8)
Alle versjoner av Noah 3 (anbefales ikke)

TILLEGGSUTSTYR (VALGFRI)

PRODUKT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
Prog. kabel, Nr. 2 New standard (HiPro)	Blå, venstre	384-20-033-00
Prog. kabel, Nr. 2 New standard (HiPro)	Rød, høyre	384-20-032-00
Prog. kabel, Nr. 2 New standard (NOAHlink)	Blå, venstre	384-20-035-00
Prog. kabel, Nr. 2 New standard (NOAHlink)	Rød, høyre	384-20-034-00
FlexConnect	Programmeringsstrips for Pico RITE	390-01-180-05
Tilpasningsskrin miniFit	Tilpasningsskrin som inneholder 60- og 85-lydgivere, åpne domer, bass domer med dobbel vent., verktøy og annet utstyr	149445
RC-N fjernkontroll	Diskre fjernkontroll for volumendringer og programbytte	1101303
SoundGate 3 (Bluetooth®)	Trådløs kommunikasjonsenhet og fjernkontroll. Med telespole.	1010133
SoundGate Mikrofon	Ekstern trådløs mikrofon som festes på den du vil lytte til for bedre taleoppfattelse (krever SoundGate 3)	1105008
TV-adapter 2 (Bluetooth®)	Trådløs tilkobling for TV-lyd	1101243
Telefonadapter 2 (Bluetooth®)	Trådløs tilkobling til fasttelefon	1010131 (EU)



Hovedkontor

Sveits

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Telefon +41 31 998 15 15
Telefaks +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Norge

Gewa AS
Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon 66 99 60 00
Telefaks 66 80 94 90
www.gewa.no

SWISS 
Engineering

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing • Our passion