





PRODUKTATALOG

2014 - 2015

VELFERDSTEKNOLOGI: OMGIVELSESKONTROLL - KOMMUNIKASJON - SYN - VARSLING - HØRSEL

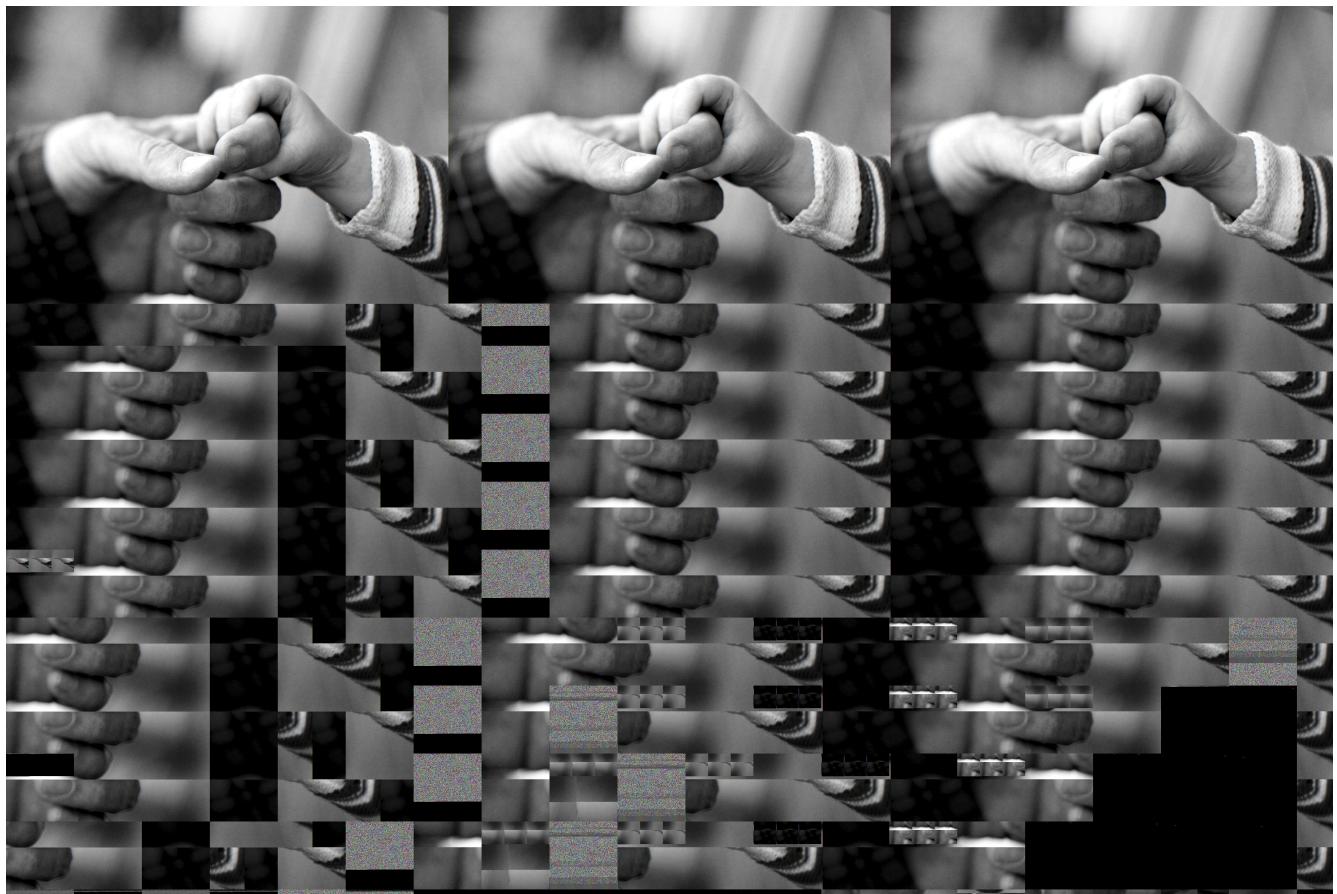



INNHOLD:



OMGIVELSESKONTROLL

4-24



Sendere IR	6-10
Tilleggsutstyr til sendere IR	11
Mottakere IR	12-13
Mottakere IR/RF	14
Detektorer IR	15-16
Lysbrytere og stikkontakter	17
Porttelefoner og telefoner	18-19
Automatikker og tilbehør	20-23
Låsutstyr	24



KOMMUNIKASJON

25-48



Datautstyr og tilbehør	27-33
Talemaskiner	34
Bladvendere	35
Brytere og tilbehør	36-43
Symboler for tale	44-48



SYN

49-52



Lese-TV	51
Elektroniske leseluper	52



VARSLING

53-63



Epilepsialarmer	55-56
Varsling	57-61
Overvåking	62-63



HØREAPPARATER

64-67



Acriva 9	66
Tilleggsutstyr	67



HØRSELSTEKNISK

68-92




Lytting IR/FM	70-71
Lytting IR/FM - tilbehør	72
Samtaleforsterkere og personlig FM-system	73
Telefoni	74-75
UniVox teleslyngeforsterkere	76-81
UniVox mikrofoner	82
Kabler og utstyr	83
Okayo trådløst FM-system	84-86
Okayo tilbehør	87
Infrarødt konferansesystem	88-90
Digitalt kommunikasjonssystem	91-92

GENERELL INFORMASJON OG BETINGELSER

96-97





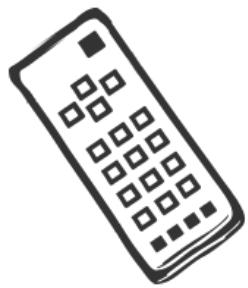

Omgivelseskонтролл

Å kunne styre sine omgivelser uten hjelp fra andre er for de fleste av oss en selvfølge. Ikke alle er så heldige at de kan utføre enkle, daglige gjøremål uten hjelpe midler.

Ved hjelp av moderne teknologi gjør vi det også mulig å bo lenger i egen bolig. Med mer enn 25 års erfaring, og et landsdekkende forhandlernett, er vi i dag ledende på omgivelseskонтролл i Norge.

- Mestring gir trygghet.

Sender IR - 1S micro - 1SP micro

IR - 1S micro er håndsender med 1 tast. Dette er den minste håndsenderen i vårt senderprogram. Kan sende 1 av 6 Gewakanaler. Den kan også sende en kodet kanal. Senderen har også feste for halsbånd, slik at den kan benyttes som smykkesender i forbindelse med alarm. Den kan benyttes sammen med EIB-bus. Størrelse: 46x36x16 mm. Vekt: 25 g (inkl. batteri). Batterier: 3 stk. 1,5 V SR44 eller batteripakke.

IR - 1SP micro er samme sender som 1S micro, men er i tillegg opplærbar; dvs. at den kan lære seg alle andre IR-sendere.

IR - 1S micro
Bestillingsnr.:2204019 HMS art. nr.: 029145

IR - 1SP micro
Bestillingsnr.:2401104 HMS art. nr.: 029146

Armbånd for IR-sender 1S / SP micro
Bestillingsnr.:2401925

**Sender IR - 1S Armbåndsender**

IR - 1S Armbåndsender er håndsender med 1 tast. Kan sende 1 av 6 Gewakanaler. Kan også sende en kodet kanal. Senderen leveres med klokkeim, men kan også brukes med halsbånd IP55, slik at den kan benyttes som smykkesender i forbindelse med alarm. Senderen har en IP grad på 55 og kan benyttes sammen med EIB-bus.

- Størrelse: 46x36x16 mm.
- Vekt (inkl. batteri): 25 g.
- Drives av 3 stk. 1,5 V SR44 batterier eller batteripakke.

IR - 1S Armbåndsender
Bestillingsnr.:2400500 HMS art. nr.: 029143

Batteripakke
Bestillingsnr.:2401930 HMS art. nr.: 028937

**Sender IR - 1S**

Sender IR - 1S håndsender med 1 tast. Innvendig innstillebart til 1 av 60 Gewakanaler. Senderen kan utstyres med halsbånd eller beltekrips. Den kan benyttes sammen med EIB-bus.

- Størrelse: 95x55x23 mm.
- Vekt: 95 g (inkl. batteri).
- Manøverkraft: 1N (100 g).
- Drives av ett 9 V 6 LR61 Alkaline batteri.

Sender IR - 1S
Bestillingsnr.:2204010 HMS art. nr.: 029142

**Sender IR - 1S Code**

Sender IR - 1S Code sender en personlig kode som er innvendig innstillebart. Det kan velges mellom 4096 koder. Benyttes for økt sikkerhet på ytterdøren, leilighetsdøren o.l. Den kan utstyres med halsbånd eller beltekrips og kan benyttes sammen med EIB-bus.

- Størrelse: 95x55x23 mm.
- Drives av ett 6 LR61 9 V Alkaline batteri.

Sender IR - 1S Code
Bestillingsnr.:2204280 HMS art. nr.: 029144



Sender IR - 4SB

IR-håndsender med 4 taster. Kan betjene 4 Gewakanaler. Innvendig innstillbar til 4 av 60 kanaler. Senderen kan utstyres med halsbånd eller beltekrips. Den kan benyttes sammen med EIB-bus.

- Størrelse: 95x55x23 mm.
- Vekt: 95 g (inkl. batteri).
- Manøverkraft: 1N (100 g.).
- Drives av ett 9 V 6 LR61 Alkaline batteri.

Sender IR - 4SB
Bestillingsnr.:2204070 HMS art. nr.: 029148



Sender IR - 5SO og 5SP

IR - 5SO håndsender med 6 taster. Utvendig innstillbar til å betjene fra 1-16 kanaler. I tillegg en kodet kanal, f.eks. for ytterdør (en av 4096 kode). Den kan utstyres med halsbånd eller beltekrips. Drives av ett 9 V 6 LR61 Alkaline batteri. Kan blende av taster som ikke er i bruk.

IR - 5SP har samme fysiske mål og funksjoner som 5SO, men er i tillegg opplærbar og kan betjene alle typer TV, radio, DVD og andre fjernstyrte apparater. Kan bryterstyre 1 funksjon.

IR - 5SO
Bestillingsnr.:2204069 HMS art. nr.: 029149
 IR - 5SP
Bestillingsnr.:2406900 HMS art. nr.: 029150



Sender IR - 12S mini

IR-håndsender med 12 taster. Dette er den minste flerkanalsenderen vi har. Den passer for brukere som klarer å betjene en sender med små taster. Kan betjene 12 kanaler. Senderen har beltekrips som standard. Den kan benyttes sammen med EIB-bus. Kan blende av taster som ikke er i bruk.

- Størrelse: 65x39x23 mm.
- Vekt: 45 g (inkl. batteri).
- Manøverkraft: 1N (100 g.).
- Drives av ett 6 V 4LR44 Alkaline batteri.

Sender IR - 12S mini
Bestillingsnr.:2204012 HMS art. nr.: 029139



Sender IR - BigJack

Denne senderen gir alle en sjanse til å styre sine omgivelser! BigJack er en stor og robust programmerbar IR-sender som kan brukes med opptil seks forskjellige brytere. (Brytere må bestilles separat.)

BigJack er veldig enkel å programmere og bruke. Den har muligheter til å "lære inn" kanaler fra andre fjernkontroller som for eksempel TV, stereo og leketøy. Selvfølgelig kan den også benyttes til å betjene lamper, telefon, alarm m.m. Senderen passer kort sagt for alt og alle som trenger store og tydelige brytere. Den kan benyttes sammen med EIB-bus.

Sender IR - BigJack
Bestillingsnr.:2402500 HMS art. nr.: 029136



Sender IR Control 10

Control 10 er en håndsender med 10 taster. Den er opplærbar, dvs. at den kan betjene alle typer TV, radio, CD og andre fjernstyrte apparater.

Den kan programmeres via PC og kan sende sekvenser. Makro og data kan kopieres fra en sender til en annen og det er enkelt å redigere overlegg. Den kan ha 36 funksjoner fordelt på 4 nivåer. I tillegg en kodet kanal, f.eks. for ytterdør (en av 4096 kode). Drives av 4 stk. 1,5 V LR03/AAA Alkaline batterier.

Sender IR Control 10
Bestillingsnr.:2425710 HMS art. nr.: 142979

**Sender IR Control Prog**

Dette er en programmerbar IR-sender med tastatur. Det er mulig å betjene den via skanning med 1-5 brytere. Senderen kan lære seg signaler fra andre fjernkontroller som for eksempel TV og video. Maksimalt 241 funksjoner fordelt på 15 nivåer. Nivå 10 er forhåndsprogrammert for å sende kommando til PC. En eller flere taster kan sende koder der hvor en trenger ekstra sikkerhet, for eksempel for ytterdør (4096 forskjellige kombinasjoner). En kan lage makroer/ sekvenser. Det er enkelt å redigere overlegg for å gjøre tastaturet enklere å forstå. Kan koples til PC for å programmere og overføre data og ta back-up. Drives av 4 stk LR03 AAA Alkaline batterier.

Sender IR Control Prog
Bestillingsnr.:2425700 HMS art. nr.: 142983

**Sender IR Control 18**

Control 18 er en programmerbar IR-sender med 18 taster som er tilpasset bevegelseshemmede. Den er opplærbar, dvs. at den kan "lære inn" og erstatte fjernkontroller til f.eks. TV, DVD, video, stereo m.m. Utendørs brukes Control 18 til å åpne leilighetsdører, garasjedører m.m. Inne brukes senderen til heiser, porttelefon, dører, lys, telefon, radio, TV, alarm m.m. Control 18 har totalt 81 forskjellige programmerings-plasser fordelt på 5 nivåer. Det finnes også en kodet kanal som er innstilbar mellom 4096 forskjellige koder for funksjoner som krever streng sikkerhet, f.eks. inngangsdør til leilighet/hus.

Sender IR Control 18
Bestillingsnr.:2425718 HMS art. nr.: 142980

**Control Omni**

Control Omni er tilpasset mennesker som har et sterkt behov for å styre sine liv og som stiller høye krav til funksjonalitet og pålitelighet. Control Omni er enkel å bruke. Ferdige malsider er allerede lagt inn og det er enkelt å legge til nye sider og bilder. Som det første produktet innenfor sitt område håndterer Control Omni både IR og radio.

INNEBYGD MOBILTELEFON: Med Control Omni får du full kontroll over telefonsamtalene dine. Du kan legge til bilder av telefonkontaktene og sende SMS, hvor du får forslag til ord underveis - ordprediksjon.

Control Omni
Bestillingsnr.:249000 HMS art. nr.: 166474



HouseMate

Housemate gir bryter-brukere muligheten til å styre sine omgivelser ved hjelp av Androide smart telefoner og/ eller tablet. Forestill deg å ha mulighet til å gjøre alt via én enhet. Skru av og på lys, lukk gardinene, skift kanal på TV og skru opp varmen. Ta telefonen, send meldinger surf på nettet eller spill av musikk. Med Housemate får man muligheten til alt dette og mye mer.

Bestillingsnr.:2200606 HMS art. nr.: 198431

**Silent Gliss sender**

Standard IR-sender som betjener gardinskinnesystemer. Betjener inntil 3 gardinsystemer i samme rom.

Silent Gliss sender
Bestillingsnr.:2201831 HMS art. nr.: 166536

**Faac TM2 sender**

Faac TM2 er en liten radiosender som enkelt betjenes med et tastetrykk. Senderen kan betjene 2 dører. Enkelt batteribytte

Faac TM2 sender
Bestillingsnr.:2101230 HMS art. nr.: 166473

**Progress star USB**

Progress star USB er en programmerbare IR-sender for tilkopling til PC via USB interface. PC-skjermen er tastaturet. Den har skjermbaserte menyer og samme mulighetene som Gewa Progress. Senderen kan lære seg signaler fra andre fjernkontroller som for eksempel TV og video. Maksimalt 256 funksjoner. En eller flere "taster" kan sende koder hvor en trenger ekstra sikkerhet, for eksempel ytterdør (4096 forskjellige kombinasjoner). En kan lage makroer/sekvenser og det er enkelt å redigere skjermbildet. Programmet er inkludert. Se www.gewa.no for mer informasjon.

Progress star USB
Bestillingsnr.:2425315 HMS art. nr.: 139281



Control Medi Multi

Control Medi Multi – En programmerbar IR-sender med 28 funksjoner, den har 8 knapper og 4 nivåer. Den kan sende og kopiere så å si alle IR signaler i verden. Den har også mulighet for skanning, så ved hjelp av en bryter kan man velge hvilken knapp som skal velges. Senderen kan også sende radiosignaler. Vibrerer ved aktivering.

Control Medi Multi
Bestillingsnr.:2429200

**Control Medi Standard**

Control medi standard – En programmerbar IR-sender med 28 funksjoner, den har 8 knapper og 4 nivåer. Den kan sende og kopiere så å si alle IR signaler i verden.

Når man sender et signal får man en bekrefteelse på at signalet er sendt i for av virasjon, lyd og lys. For og endre symbolene på knappene kan du benytte deg av et word-dokument du finner på Abilia.se under omgivelseskontroll. Print ut og klipp til.

Control Medi Standard
Bestillingsnr.:2429220

**Control Medi Easy**

Control Medi Easy, er en programerbar IR sender med 4 knapper, den har 4 knapper (kan gjøres om til 2 knapper, bytte overlegg) Den kan sende og lære seg så å si alle IR signaler i verden.
Når man sender et signal får man en bekrefteelse på at signalet er sendt i for av lyd og lys. For og endre symbolene på knappene kan du benytte deg av et word-dokument du finner på Abilia.se under omgivelseskontroll. Print ut og klipp til.

Control Medi Easy
Bestillingsnr.:2429240



IR-indikator

Når en Gewa IR-sender betjenes, vil indikatoren vise hvilken kanal som sendes. Kanalnummeret vises med siffer i vinduet. Et hjelpemiddel som raskt avgjør om en IR-sender er i orden.

IR-indikator
Bestillingsnr.:2204075 HMS art. nr.: 028639

**Holder/dockingstasjon til Control Omni**

Gjør det enkelt å montere og demontere Control Omni.

Holder/dockingstasjon til Control Omni
Bestillingsnr.:2429010 HMS art. nr.: 166807

**Tilleggsutstyr til IR-sendere**

Passer til Control Prog, Control 18, Control 10 m.fl.

Holder for IR-sendere (120 x 65 x 25 mm)
Bestillingsnr.:2238105 HMS art. nr.: 028625
 Justerbart halsbånd med hurtigkopling
Bestillingsnr.:2890410 HMS art. nr.: 143006

**Stativer til Control Omni**

Enkel å montere på seng, arbeidsbenk m.m.

Stativ - Progress/Omni
Bestillingsnr.:2828120 HMS art. nr.: 143001
 Miniarm Fisso 40
Bestillingsnr.:1451030 HMS art. nr.: 174136

**Control Omni Converter**

Control Omni Converter er beregnet for å koble til batteriet på en el. rullestol.
 Innspenning:10- 32 VDC

Control Omni Converter
Bestillingsnr.:2429065

**Kabler til IR-sendere**

Det finnes utallige varianter av kabler til våre sendere.
 For mer informasjon se www.gewa.no.

Y-connector/Y-led grenkontakt til Control Omni (avbildet)
Bestillingsnr.:2429050 HMS art. nr.: 167219
 Datakabel 8-Pol Mini DIN/D-SUB 9/25 til Control Prog
Bestillingsnr.:2425618 HMS art. nr.: 028620
 Kabel datakabel 8/8 pol MINI DIN til Control Prog
Bestillingsnr.:2425622 HMS art. nr.: 028619



Andromeda IR-REC 1

Andromeda IR-REC 1 er en programmerbar mottaker med en releutgang (en funksjon). Den brukes vanligvis til å styre dørautomatikk.. Den er programmerbar med GewaLink-kanaler og kodede kanaler (4096 kod). IR-REC 1 er kompatibel med alle eldre GewaLink-sendere. 5 stk eksterne detektorer kan tilkobles.

Andromeda IR-REC 1
Bestillingsnr.:**2419800**

**Mottaker GL-1M Prog**

Programmerbar 1 kanals mottaker. Mottakeren kan motta både kodede og vanlige Gewa-kanaler. Valgfri monostabil eller bistabil utgang. På modell GL-1M er det mulig å skru fast lokket enten i Gewaboks eller direkte i standard veggboks. Mottakeren har innebygget detektor med mulighet for tilkopling av ekstra detektorer.

- Utgang: 1 potensialfri vekslekontakt.
- Maks. belastning: 6A resistiv 24 V AC/DC.
- Driftsspenning: 12-24 V DC eller 12-24 V AC 50Hz.
- Størrelse: 96x96x36 mm, Vekt: 160 g.

Mottaker GL-1M Prog
Bestillingsnr.:**2204194** HMS art. nr.: **028505**

**Mottaker IR - 2ML Prog**

Programmerbar IR-mottaker med 2 reléstyringer. Valgfri utgang monostabil/bistabil. Innebygd detektor med mulighet for tilkopling av ekstern detektor.

- Utgang: 2 potensialfrie relékontakte.
- Max. belastning: 4A 24 V DC/AC.
- Størrelse: 96x96x36 mm.
- Vekt: 160 g.

Mottaker IR - 2ML Prog
Bestillingsnr.:**2204215** HMS art. nr.: **142961**

**Mottaker GL- 4M Prog**

Programmerbar 4-kanals mottaker. Mottakeren kan motta både kodede og vanlige Gewakanaler. Valgfri monostabil eller bistabil utgang. Mottakeren har innebygget detektor med mulighet for tilkopling av to ekstra detektorer.

- Utgang: 4 potensialfrie vekslekontakte.
- Maks. belastning 6A resistiv 24 V AC/DC.
- Driftsspenning: 12-24 V DC eller 12-24 V AC 50Hz.
- Størrelse: 96x96x36 mm.
- Vekt: 160 g.

Mottaker GL- 4M Prog
Bestillingsnr.:**2204197** HMS art. nr.: **028507**



Mottaker IR - GL-4M WM

Dette er en programmerbar IR-mottaker med fire vekslende relékontakter. Mottakeren er tilpasset for direkte å bli benyttet til vindusautomatikk fra WindowMaster, gardin-, rullegardin- og persieneautomatikk fra Silent Gliss. Mottakeren kan programmeres med alle GewaLink-kanaler (kanal 62 har ingen funksjon) og kodet kanal (4096). Mottakerens reléer kan programmeres for å kunne arbeide bistabilt eller monostabilt. IR-mottakeren har en innebygd IR-detektor som kan koples bort. Mottakeren har innebygd detektor med mulighet for tilkopling av to ekstra detektorer.

Mottaker IR - GL-4M WM
Bestillingsnr.:**2204197-09** **HMS art. nr.: 028509**



Mottaker IR - GL-1MU Prog og GL-4MU Prog

GL-1MU Prog er samme 1-kanals mottaker som GL-1M Prog, men for utendørs montasje. Kapsling med tetthetsgrad IP-65.

GL-4MU er en 4-kanals mottaker for utendørs kapsling med tetthetsgrad IP-65.

GL-1MU Prog
Bestillingsnr.:**2204194-02** **HMS art. nr.: 028506**
GL-4MU Prog
Bestillingsnr.:**2204197-02** **HMS art. nr.: 028510**



Mottakere for seng

IR-9MP LINAK er en programmerbar IR-mottaker for betjening av seng med 8 funksjoner. Passer til Linak styring CB-09, CB-10 og CB-12. Monteres hengende på rammen under sengen (f.eks. Scanbed 750).

IR-9MP COMFORT er en programmerbar IR-mottaker for betjening av Comfort-seng med 6 funksjoner. Passer til sengemodell Qvintet. Monteres på rammen under sengen. Strømforsyner fra sengens elektronikk.

IR-9MP LINAK
Bestillingsnr.:**2443010** **HMS art. nr.: 028517**
IR-9MP COMFORT
Bestillingsnr.:**2443015** **HMS art. nr.: 028516**



Mottaker IR - 8M Prog / IR - 16M Prog

Programmerbar 8- eller 16-kanals IR-mottaker med reléutganger. Mottakerne kan motta både kodede og vanlige Gewakanaler. Mottakerne leveres ikke med detektor, men har 2 separate detektorinnganger.

8 kanal, driftspenning 24V AC/DC
Bestillingsnr.: 2204112 HMS art. nr.: 028515

8-kanal, driftspenning 230 V AC
Bestillingsnr.:**2204136** **HMS art. nr.: 028514**
16-kanal, driftspenning 24V AC/DC
Bestillingsnr.:**2204113** **HMS art. nr.: 028512**
16-kanal, driftspenning 230V AC
Bestillingsnr.:**2204138** **HMS art. nr.: 028511**



Andromeda IRZ-REC 4

Andromeda IRZ-REC 4 er en programmerbar mottaker med 4 reutganger (4 funksjoner). Den er programmerbar med GewaLink-kanaler og kodede kanaler (4096 kode). Mottakeren kan også styres med Gewa Radio. IRZ-REC 4 er kompatibel med alla eldre GewaLink-sendere. 5 stk eksterne detektorer kan tilkobles.

IRZ-REC 4
Bestillingsnr.:2419830

**Andromeda IRZ-REC 4 WM**

Andromeda IRZ-REC 4 WM er en programmerbar mottaker med 4 reutganger (4 funksjoner). Den er klargjort for tilkobling til Window Master vindusåpner. Den er programmerbar med GewaLink-kanaler og kodede kanaler (4096 kod). Mottakeren kan også styres med Gewa Radio. IRZ-REC 4 WM er kompatibel med alle eldre GewaLink-sendere.

Andromeda IRZ-REC 4 WM
Bestillingsnr.:2419850

**Andromeda IRZ-REC 4 OUT**

Andromeda IRZ-REC 4 OUT er en programmerbar mottaker med 4 reutganger (4 funksjoner). Den er programmerbar med GewaLink-kanaler og kodede kanaler (4096 kode). Mottakeren kan også styres med Gewa Radio. IRZ-REC 4 er kompatibel med alla eldre GewaLink-sendere. 5 stk eksterne detektorer kan tilkobles.

IRZ-REC 4 OUT
Bestillingsnr.:2419835

**FAAC TM2 radiomottaker**

Denne radiomottakeren med 2 kanaler monteres i automatikken og betjenes med FAAC TM2 sender.

Enkel programmering ved hjelp av dipp-rekke.

FAAC TM2 radiomottaker
Bestillingsnr.:2101220 **HMS art. nr.: 166475**



Andromeda IR-DET 3

IR-detektor for separat montering og tilkobling til Andromeda IR-mottagere.
Innvendig eller utvendig montering. Leveres med 3 meter tilkoblingskabel.
OBS! Passer bare til Andromedamottagere.

Andromeda IR-DET 3
Bestillingsnr.:2419860

**Andromeda IR-DET 15**

IR-detektor for separat montering og tilkobling til Andromeda IR-mottagere.
Innvendig eller utvendig montering. Leveres med 15 meter tilkoblingskabel.
OBS! Passer bare til Andromedamottagere.

Andromeda IR-DET 15
Bestillingsnr.:2419865

**Andromeda IR-DET**

IR-detektor for separat montering og tilkobling til Andromeda IR-mottagere.
Ikke for utvendig montering!
OBS! Passer bare til Andromedamottagere.

Andromeda IR-DET
Bestillingsnr.:2419870

**Detektor GL-DP6 / GL-DP15 / GL-DP40**

IR-detektor og forsterker for separat montert og tilkopling til IR-mottakere. For innendørs og utendørs montert. Plastkapsling med 6, 15 eller 40 m skjermet kabel. Diskret montert som skjuler skruefestene. Som standard medfølger 6 m skjermet kabel.

- Kapslingsklasse: IP-65.
- Størrelse: 70 x 42 x 28 mm.
- Farge: Polarhvit.

Detektor GL-DP6, med 6 m skjermet kabel
Bestillingsnr.:2204884 HMS art. nr.: 028503

Detektor GL-DP15, med 15 m skjermet kabel
Bestillingsnr.:2204884-02 HMS art. nr.: 028501

Detektor GL-DP40, med 40 m skjermet kabel
Bestillingsnr.:2204884-04 HMS art. nr.: 028502



Detektor IR - DIGP

IR-detektor og forsterker for separat montasje og tilkopling til IR-mottakere.

- Rekkeklemme for tilkopling av kabel.
- For innendørs montasje.
- Størrelse: 96x96x30 mm.
- Vekt: 70 g.

Detektor IR - DIGP
Bestillingsnr.:2204894 HMS art. nr.: 028504

**Support**

Gewa har i over 25 år utviklet og produsert IR-utstyr for funksjons-hemmede og eldre. Med vårt unike program på IR-sendere og mottakere har vi gjennom mange års erfaring kommet fram til standardløsninger som vi vet både fagpersoner og brukere setter pris på. Gewa har gjennom mange år bygget opp et landsdekkende forhandlernett som gjennom en åtte år har arbeidet aktivt med omgivelseskontroll og har stor kompetanse på dette området.

Se www.gewa.no eller ta kontakt med oss på tlf. 66 99 60 00 for mer informasjon .

Lysdimmer med IR

AV/PÅ bryter - Markise-/persiennebryter. Lysregulator som betjenes både med IR-styring og manuelt, påveggskapsling. Kan brukes som dimmer på de fleste lyskilder.

- Sikret mot overbelastning og kortslutning.
- Belastning: 500W lysstoffrør, 400VA halogenlamper.
- Passer i vanlig veggoks for skjult anlegg

Lysdimmer med IR

Bestillingsnr.:2204084 HMS art. nr.: 142966

**Z-wave innebyggingsrelé**

Z-wave har mulighet for å dekke et stort nettverk på 100 enheter.

Ved montering/utskiftning til Z-wave kreves lite ekstrautstyr. Tvert imot blir installasjonen mindre. Brytere kan skrus rett på vegg, byttes med eksisterende veggbrytere eller limes på en glassvegg. Ved denne installasjonen kreves ingen 230V. Mange RF-produkter kommuniserer på de offentlige frekvensene. Disse frekvensene er meget trafikerte og derfor er det meget stor sjans for forstyrrelser. Z-wave minimerer dette ved å bruke en kortdistansefrekvens på 868MHz og 2-veis ID-bekrefteelse.

Z-wave innebyggingsrelé

Bestillingsnr.:2300000 HMS art. nr.: 167257

**GL-RJ reléboks IR med ledning**

Fjernstyrt, 4 kontakter med jord med innebygget IR-mottaker. Programmerbar for å motta alle Gewakanaler. 2 kontakter aktiveres av én kanal, de to andre aktiveres av en annen kanal.

- Leveres med 1,5 m ledning.
- Max.belastning: 10A resistiv, 230 V AC m. jord.
- Farge: Polarhvit.

GL-RJ reléboks IR med ledning

Bestillingsnr.:2204330 HMS art. nr.: 142964

**Z-wave dimmer**

Denne enheten byttes med eksisterende lyspunkt. Etter en enkel programmering med Control Omni får du mulighet til å dimme lyset.

Gewa har et stort spekter av lys-/strømstyringer som passer opp imot Control Omni. Se vår nettside www.gewa.no for mer informasjon. Her ligger en fullstendig oversikt over alle Z-wave produktene. Ta kontakt med oss hvis du ønsker brukerveiledning, brosjyre, bilde eller nærmere informasjon.

Z-wave dimmer

Bestillingsnr.:2300017 HMS art. nr.: 167271



Høytalende IR porttelefon, Duocom

Gewa Duocom med IR-styring er et porttelefonsystem utviklet og produsert av Gewa, spesielt for funksjonshemmede og eldre. Duocom har automatisk taleveksling, dvs. en slipper å holde på knappen mens en taler og slippe når en lytter. Den nye Gewa Duocom styrer denne vekslingen automatisk. Komplett system består av:

- Uteapparat: Best.nr.: 2202804 - HMS art.nr. 028581
- Inneapparat/svarapparat: Best.nr.: 2202806 - HMS art.nr. 028571
- Sentralenhet: Best.nr.: 2202802 - HMS art.nr. 028558
- Strømforsyning: Best.nr.: 2202844 - HMS art.nr. 028559

Inneapparat, sentralenhet og strømforsyning

Bestillingsnr.:2202800 HMS art. nr.: 166452

**Ekstra inneapparat IR, Duocom - Gewa**

Duocom inneapparat/svarapparat består av høytaler, mikrofon og IR-mottaker. Apparatet har 2 store trykkfelt som er tydelig merket med symboler for høytaler og nøkkel. Trykk på høytalersymbolet åpner for kommunikasjon. Trykk på nøkkelssymbolet åpner doren hvis denne er utstyrt med elektrisk sluttstykke. Inneapparatet kan også fjernstyres med Gewas IR-sendere. Hvis det benyttes innlest tale, høres denne i uteapparatet når symbolknappen betjenes. Størrelse: 170x130x42 mm. Leveres med kabel og veggkontakt. Duocom kan brukes som intercom med inntil 10 inneapparater.

Bestillingsnr.:2202806 HMS art. nr.: 028571

**Uteapparat IR til porttelefon**

Gewa Duocom uteapparat består av høytaler, mikrofon og IR-mottaker. Uteapparatet plasseres ute ved hoveddør eller ved leilighetsdør. Apparatet har tydelig merket ringeknapp. For å unngå evt. fuktproblemer, er all elektronikk plassert i sentralenheten som monteres på innsiden av døren. Uteapparatet leveres med 2 meter kabel.

- Størrelse: 150x80x16 mm.
- Vekt: 250 g.

Bestillingsnr.:2202804 HMS art. nr.: 028581

**Gewatel 200 med IR-styring**

Gewatel 200 er en høytalende telefon med innebygd IR-styring og display. Utmerket lydkvalitet på grunn av full dupleks "Omnisound TM" system. Lyden er så god at det høres ut som om personen du snakker med sitter i samme rom.

Med Gewatel 200 kan du trådløst:

- ta telefonen
- slå et valgfritt telefonnummer
- ringe opptil 50 forhåndsprogrammerte nummer
- enkelt programmere etter ulike behov.

Gewatel 200

Bestillingsnr.:2201638 HMS art. nr.: 144163

Ekstra mikrofon

Bestillingsnr.:2201632 HMS art. nr.: 160979

Veggfeste

Bestillingsnr.:2201633 HMS art. nr.: 160978



Porttelefon Erifox PAL-101 og PAL-102

Erifox PAL-101 er en porttelefon som benyttes sammen med en bærbar telefon. For de som kan betjene en bærbar telefon, blir dette ofte en rimeligere og mer fleksibel løsning. Erifox PAL-101 har 1 bylinje og kan betjene ett uteapparat.

Erifox porttelefon PAL-101

Bestillingsnr.:2201643 HMS art. nr.: 134861

Erifox porttelefon PAL-102

Bestillingsnr.:2201644 HMS art. nr.: 134359

Erifox dørtelefon, mørk grå og hvit

Bestillingsnr.:2201643-1/2201643-2 HMS art. nr.: 134862 (mørk grå)

**Dørtelefon Erifox, mørk grå**

Erifox dørtelefon/utestasjon passer til PAL porttelefon-serie. Den har god lyd, belyst navnerute og en stor ringeknapp.

Mørk grå dørtelefon

Bestillingsnr.:2201643-1 HMS art. nr.: 134862

**Dørtelefon Erifox, hvit**

Erifox dørtelefon/utestasjon passer til PAL porttelefon-serie. Den har god lyd, belyst navnerute og en stor ringeknapp.

Hvit dørtelefon

Bestillingsnr.:2201643-2

**Bærbar telefon Gigaset**

Telefonen er høytalende og leveres komplett med lader og batteri. Med denne telefonene tilkoplet Erifox sentralenhet kan den, i tillegg til å være vanlige telefon, også brukes til å snakke med dørtelefonen og evt. åpne ytterdør. Bærbare telefoner av forskjellige typer kan benyttes.

Gigaset SL 370

Bestillingsnr.:2201670 HMS art. nr.: 149836



Dørautomatikk slagdører - FAAC 950 BM

FAAC 950 BM tilhører den nye generasjonen dørautomatikker for ytterdører, fellesdører og to-fløyede dører. Automatikken er liten i størrelse, men er allikevel kraftfull. Designet et nytenkende passer inn i både nybygg og eldre boliger. Automatikken er også lett og kraftig og eigner seg derfor til montering både på vegg og dørblad. Den er stillegående og følger internasjonale sikkerhetsstandarder.

Glideskinne: Best.nr.: 2101066 - HMS art.nr. 028775
 Glideskinne, kort: Best.nr.: 2101067 - HMS art.nr. 028776

FAAC 950 BM dørautomatikk

Bestillingsnr.:2101020 HMS art. nr.: 028334

Skyvearm/normalarm

Bestillingsnr.:2101065 HMS art. nr.: 028777

Monteringsplate, liten

Bestillingsnr.:2201155 HMS art. nr.: 028779

**Dørautomatikk Dorma ED 100LE**

Dette er en meget driftssikker dørautomatikk som er beregnet på lette dører. ED 100LE åpner og lukker elektrisk.(For de tyngste dørene anbefales Dorma ED 250LE.)

Glideskinne
 Bestillingsnr.: 2200002 - HMS art.nr. 167095

Dørautomatikk Dorma ED 100LE

Bestillingsnr.:2200000 HMS art. nr.: 166438

Skyvearm 1

Bestillingsnr.:2200004 HMS art. nr.: 167096

Skyvearm 2

Bestillingsnr.:2200005 HMS art. nr.: 167097

**Dørautomatikk slagdører - FAAC 950 BSM**

FAAC 950 BSM tilhører den nye generasjonen dørautomatikker for innendører. Automatikken er liten i størrelse, men er allikevel kraftfull. Designet et nytenkende og passer i både nybygg og eldre boliger. Automatikken er også lett og kraftig og eigner seg derfor til montering både på vegg og dørblad. Den er stillegående og følger internasjonale sikkerhetsstandarder.

Glideskinne: Best.nr.: 2101066 - HMS art.nr. 028775
 Glideskinne, kort: Best.nr.: 2101067 - HMS art.nr. 028776

FAAC 950 BSM dørautomatikk

Bestillingsnr.:2101030 HMS art. nr.: 028352

Skyvearm/normalarm

Bestillingsnr.:2101065 HMS art. nr.: 028777

Monteringsplate, liten

Bestillingsnr.:2201155 HMS art. nr.: 028779

**Dørautomatikk Dorma ED 250LE**

Dette er en meget driftssikker dørautomatikk beregnet på ytterdører og branndører, f.eks. i garasjeanlegg. ED 250LE åpner og lukker elektrisk.

Glideskinne
 Bestillingsnr.: 2200002 - HMS art.nr. 167095

Dørautomatikk Dorma ED 250LE

Bestillingsnr.:2200001 HMS art. nr.: 166439

Skyvearm 1

Bestillingsnr.:2200004 HMS art. nr.: 167096

Skyvearm 2

Bestillingsnr.:2200005 HMS art. nr.: 167097



Olly-C skyvedørsautomatikk for innerdører

Olly-C er en enkel skyvedørsautomatikk for innerdører og pocketdører. (Pocketdører er dører som "går inn i" veggen.) Automatikken består av en elektronikkboks med en liten drivmotor. Boksen monteres i dørkarmen. En smal drivrem monteres langs skyvedøren. Drivremmen betjenes av motoren slik at døren kan åpnes og lukkes. Leveres med sikkerhetssensor. Tilkoples vanlig lysnett 230 V/50Hz.

Åpningshastighet: 0,4 m/s. Lukkehastighet: 0,2 m/s.
Trekraft: 30 Newton. Størrelse: 26x6x5 cm (LxHxD).

Olly-C skyvedørsautomatikk

Bestillingsnr.:2200711 HMS art. nr.: 160362

**Olly-E skyvedørsautomatikk for innerdører**

Olly-E er en noe enklere skyvedørsautomatikk med større kraft (for dører opp til 100 kg) og lavere hastighet. Maks. 0,1 m pr. sek. Leveres med motor, bryterpanel og transformator.

- Trekkraft: 50 Newton.
- Størrelse: 120x60x43 mm.

Olly-E skyvedørsautomatikk

Bestillingsnr.:2200720 HMS art. nr.: 028366

Olly driveim

Bestillingsnr.:2200730

**Vindusautomatikk for utadslående vindu**

Frisk luft gjennom et åpent vindu og følelsen av å være i kontakt med uteviljøt er noe vi alle setter pris på.

WindowMaster vindusautomatikk kan tilpasses de fleste vinduer. Den kan åpne og lukke vinduet trinnløst. Maks. åpning 15 cm. Automatikken kan frikoples slik at vinduet kan åpnes helt manuelt, f.eks. ved rengjøring.

Automatikk for utadslående vindu, WMU 100

Bestillingsnr.:2204456 HMS art. nr.: 028373

**Vindusautomatikk for innadslående vindu**

WindowMaster vindusautomatikk kan tilpasses de fleste vinduer. Den kan åpne og lukke vinduet trinnløst. Maks. åpning 15 cm. Automatikken kan frikoples slik at vinduet kan åpnes helt manuelt, f.eks. ved rengjøring.

For vinduer som slår inn i rommet må det benyttes en annen type feste på vindusrammen enn for utadslående vinduer.

Automatikk for innadslående vindu, WMI 100

Bestillingsnr.:2204557 HMS art. nr.: 028379



Vindusautomatikk - betjeningsutstyr

Fjernstyring WindowMaster WLR 100
Bestillingsnr.: 2204459 - HMS art.nr.: 167126

Z-brakett WAB 100
Bestillingsnr.: 2204460 - HMS art.nr.: 028781

Kontrolltastatur WindowMaster WLI 130
Bestillingsnr.:2204463 HMS art. nr.: 143045
Styreenhet for inntil 3 vinduer, WLC 100
Bestillingsnr.:2204462 HMS art. nr.: 143044
WindowMaster styreenhet for ett vindu WUC 102
Bestillingsnr.:2204470

**Vindusautomatikk Ventic D+H ut-/innadslående**

Mottaker GL-4M WM
Bestillingsnr.: 2204197-09 - HMS art. nr.: 028509

Gewa strømforsyning
Bestillingsnr.: 2202844 - HMS art. nr.: 028559

Ventic brakett FE 22
Bestillingsnr.: 2204610 - HMS art. nr.: 143050

Vindusautomatikk Ventic D+H ut-/innadslående
Bestillingsnr.:2204430 HMS art. nr.: 028375
Ventic brakett RE 22
Bestillingsnr.:2204600 HMS art. nr.: 143048
Ventic brakett RA 22
Bestillingsnr.:2204605 HMS art. nr.: 143049

**Gardinautomatikk Gewa 1150**

Gardinautomatikken kan monteres på de fleste vinduer. Den er beregnet for helt vanlige gardiner som skal trekkes til siden, enten til den ene siden eller til begge sider. Automatikken bestilles etter mål og leveres med feste for gardinbrett. Det er viktig at det brukes gardinbrett eller kappe for å skjule selve automatikken. Automatikkens lengde må være litt kortere enn kappens lengde. Gardinautomatikken kan styres med bryter eller med IR-sender.

Fjernkontroll: Best.nr.: 2201831 - HMS art. nr. 166536
Festebrakett: Best.nr.: 2201830

Gardinautomatikk inntil 1,5 m
Bestillingsnr.:2201826 HMS art. nr.: 166442

Gardinautomatikk 1,5 - 3 m
Bestillingsnr.:2201827 HMS art. nr.: 166443

Gardinautomatikk 3 - 5 m
Bestillingsnr.:2201828 HMS art. nr.: 166444

**Strømforsyning**

Trafoer leveres i flere varianter avhengig av spenning og strømforbruk.

Strømforsyning Mascot 12-24 V, 18W
Bestillingsnr.:2201653

Gewa trafo 24 V, 1,6A
Bestillingsnr.:2201656

Gewa trafo 13,2 V, 3A
Bestillingsnr.:2201657



Dorma Autoswitch

Dorma Autoswitch sensorbryter er et system som består av leserenhet og transpondernøkler. Læserenheten kan monteres enten på vegg med medfølgende ramme, eller som innfelt i standard veggaks. Det spesielle med systemet er at den kan lese på opptil 3 meters avstand uten bruk av egne antenner eller slynger og opptil 250 forskjellige nøkler. Dorma AutoSwitch er et system beregnet på å gi en barrierefri adkomst for funksjonshemmede eller andre personer som ønsker en automatisk åpning uten bruk av bevegelsesføler. Systemet kan brukes i kombinasjon med dørautomatikk eller som åpnesignal til f.eks en motorlås eller et elektrisk sluttstykke.

Dorma Autoswitch


Bestillingsnr.:2200315 HMS art. nr.: 143133

Dorma Autoswitch brukernøkkelen

Bestillingsnr.:2200320 HMS art. nr.: 143134

Dorma Autoswitch programmeringsnøkkelen

Bestillingsnr.:2200325 HMS art. nr.: 143135

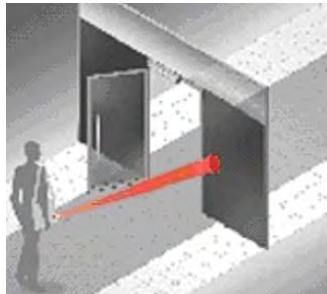

Magic Switch

Magic Switch er en liten radar som ser ut som en vanlig lysbryter. Den virker som en vanlig radar, men har kun en rekkevidde på 10-50 cm.

Dette er en ideell løsning på f.eks. et sykehus hvor de ikke ønsker berøring av brytere. Radaren har glatte overflater som er lette å rengjøre. Enheten passer inn i en vanlig veggaks.

- Driftsspenning: 12-24V AC/DC.

- Mål: 65 x 65 x 50 mm.

Bestillingsnr.:2200340 HMS art. nr.: 028824



Albuebrytere

Albuebryter AKA er en bryter i aluminium med innebygd microbryter som kan brukes både inne og ute.

Albuebryter Prisma er en bryter i aluminium uten bevegelige deler. Denne er spesielt egnet der hvor man trenger en solid bryter som tåler mye "juling". Bryteren trenger driftsspenning og har to utganger for impuls.

Albuebryter AKD er en bryter i plast med innebygd microbryter. Bryteren bryteren kan brukes både inne og ute.

Albuebryter AKA

Bestillingsnr.:2200237 HMS art. nr.: 167114

Albuebryter Prisma

Bestillingsnr.:2200236 HMS art. nr.: 143039

Albuebryter AKD

Bestillingsnr.:2200235 HMS art. nr.: 143038



Låskasser

Komplett sluttstykke og låskasse inneholder: Låskasse, elektrisk sluttstykke, sylinder, vrideknapp, rundskilt, langskilt, forkantstolpe til låskasse og underlagsplate til sluttstykket. Angi spenning på sluttstykket.;2201029

Låskasse Trioving 5122;2201000 (venstre)
Låskasse Trioving 5122;2200999 (høyre)

Låskasse Assa 560 er en smekklås som byttes med den eksisterende låskassen i døren. Ved bruk av elektrisk sluttstykke, må denne låskassen

Assa låskasse, høyre
Bestillingsnr.:2201005 HMS art. nr.: 028422

Assa låskasse, venstre
Bestillingsnr.:2201004 HMS art. nr.: 028423

**Stolper**

Dette er en type stolpe som passer til de fleste nye og gamle dører/sluttstykker. Det finnes en rekke forskjellige stolper. Komplett oversikt over stolpene finner du på www.gewa.no.

Stolpe Elo 103
Bestillingsnr.:2200801 HMS art. nr.: 143085

**Sluttstykker**

Sluttstykket Gewa Elo 301 8-30V normal funksjon passer godt til de fleste dører etter en liten tilpasning og det er også godkjent for branndører. Hvis dette sluttstykket ikke passer, finnes det mange andre alternativer. På www.gewa.no finner du en totaloversikt over våre sluttstykker.

høyre
Bestillingsnr.:2201005 HMS art. nr.: 028424
venstre
Bestillingsnr.:2201004 HMS art. nr.: 028425

**Brytere for døråpning**

Elco: Impulsbryter, påvegg.

Dorma NB3-1: Nøkkelbryter, i metallboks for utvendig montasje.

Dorma NB3-1I: Nøkkelbryter, innfelt.

Elco
Bestillingsnr.:3322000 HMS art. nr.: 028782
Dorma NB3-1
Bestillingsnr.:2201061 HMS art. nr.: 028796
Dorma NB3-1I
Bestillingsnr.:2201063







Kommunikasjon



Alle mennesker har behov for å kunne uttrykke følelser og behov. Gewa tilbyr et bredt spekter av hjelpe midler innen alternativ og supplerende kommunikasjon. Disse kan bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får en bedre og enklere hverdag.

**Kommunikasjon
- en forutsetning for
deltakelse.**

Datautstyr og tilbehør

Switch2Scan - styring av iPad

Switch2Scan - trådløs bryterstyring av iPad:

- Skanner mellom og innenfor app'ene
- Gir tilgang til App Store og App'er
- Gir tilgang til media- og fotofunksjoner
- Blar i eBooks
- Gir tilgang til internet og e-post
- Mulighet for å skanne tastaturet på iPad'en

Pretorian Switch2Scan
Bestillingsnr.:**1136837**



SimplyWorks® for iPad - trådløs bryterstyring

SimplyWorks® for iPad - trådløs bryterstyring:

- Media- og tastaturfunksjonalitet
- Støtter skanning med brytere eller joystick
- Tillater bruk av eksisterende SimplyWorks® utstyr
- Gir tilgang til e-post og internet

Pretorian SimplyWorks for iPad
Bestillingsnr.:**1136885**



Pretorian SimplyWorks®

SimplyWorks® er et fullt integrert trådløst system av datatekniske hjelpemidler spesielt for brukere med dårlige motoriske ferdigheter som skaper nye inkluderende læringsopplevelser både for enkelpersoner og grupper. Inntil 6 enheter (i hvilken som helst kombinasjon) kan brukes samtidig på datamaskinen og opp til 6 brytere kan brukes samtidig for å kontrollere batteridrevne leker etc. Det betyr at opptil 6 brukere kan samarbeide på en gang.

Alle produkter som bærer SimplyWorks® logoen fungerer sammen. Det er et registrert varemerke og identifiserer produkter som bruker trådløs teknologi utviklet av Pretorian Technologies Ltd.



Pretorian SimplyWorks® Mottaker

SimplyWorks Mottaker er en USB-mottaker som kan betjene opptil 6 SimplyWorks sendere på en gang. Krever ingen ekstra driver og passer både PC og Mac. Rekkevidde ca. 10 meter.

Pretorian SimplyWorks® Mottaker
Bestillingsnr.:**1136730** HMS art. nr.: **177900**



Datautstyr og tilbehør

Pretorian SimplyWorks® Trackball

SimplyWorks Trackball kan brukes sammen med alle andre SimplyWorks mottakere fra Pretorian. Den har 2 stk bryterinnganger for å få høyre-/venstreklikk på eksterne brytere. Den har ingen mekaniske slitedeler.

Pretorian SimplyWorks® Trackball
Bestillingsnr.:**1136700** HMS art. nr.: **177905**



Pretorian SimplyWorks® Joystick

SimplyWorks Joystick kan brukes sammen med alle andre SimplyWorks mottakere fra Pretorian. Den har 2 stk bryterinnganger for å få høyre-/venstreklikk på eksterne brytere. Krever veldig liten kraft (0,5 newton) for å flytte markøren. Justerbar hastighet. T-grep og Softball-grep følger med.

Pretorian SimplyWorks® Joystick
Bestillingsnr.:**1136710** HMS art. nr.: **177902**



Pretorian SimplyWorks® Smoothie Bryter

SimplyWorks Smoothie Bryter er en trådløs bryter med 125 mm diameter og lav profil. Krever lite krefter for å betjene og kan betjenes over hele bryteroverflaten.

Kan brukes som en vanlig 1-funksjonsbryter, men har i likhet med SimplyWorks Send en rekke PC-funksjoner. Kommer i fargene rød, blå, grønn og gul. Skruehull for standard innfestning.

Pretorian SimplyWorks® Smoothie Bryter
Bestillingsnr.:**1136890** HMS art. nr.: **177898**



Pretorian SimplyWorks® Send

En bryterboks i SimplyWorks-serien. Blir linken mellom en hvilken som helst bryter med 3,5 mm Jackplugg og hvilken som helst SimplyWorks mottaker. Har en rekke PC-funksjoner som f.eks venstre-/høyreklikk, piltaster, enter, mellomrom m.m.

Pretorian SimplyWorks® Send
Bestillingsnr.:**1136740** HMS art. nr.: **177910**



Datautstyr og tilbehør

Pretorian SimplyWorks® Send-6

En bryterboks i SimplyWorks-serien. Blir linken mellom en hvilken som helst bryter med 3,5 mm Jackplugg og hvilken som helst SimplyWorks mottaker. Har en rekke PC-funksjoner som f.eks venstre-/høyreklikk, piltaster, enter, mellomrom m.m.

Samme som SimplyWorks Send, men med 6 bryterinnganger.

Pretorian SimplyWorks® Send-6
Bestillingsnr.:**1136745** HMS art. nr.: **177911**



Pretorian SimplyWorks® Control

SimplyWorks Control brukes for å kontrollere leker eller annet som bruker batteri eller 3,5 mm Jackplugg. Liten og nett og kan lett festes på den leken som skal bryterstyres.

Styres trådløst av f.eks SimplyWorks Smoothie Bryter og har flere funksjoner som trykk og hold, trykk på/av og trykk for aktiver 4, 8, 16, 24, 32, 40 sekunder eller 1, 2, 5, 10, 15 minutter. Har også funksjon for samarbeid, begge brytere må trykkes for å aktivere eller bryter 1 siår "på" og bryter 2 siår "av".

Control
Bestillingsnr.:**1136750**



Pretorian SimplyWorks® Control Lite

SimplyWorks Control Lite brukes for å kontrollere leker eller annet som bruker batteri eller 3,5 mm Jackplugg. Liten og nett og kan lett festes på den leken som skal bryterstyres. Styres trådløst av f.eks. SimplyWorks Smoothie Bryter.

Control Lite
Bestillingsnr.:**1136870**



Pretorian SimplyWorks® Control Pro

SimplyWorks Control Pro brukes for å kontrollere leker eller annet som bruker batteri eller 3,5mm Jackplugg. Control Pro har 2 uavhengige kanaler. Styres trådløst av f.eks. SimplyWorks Smoothie Bryter, og har flere funksjoner som trykk og hold, trykk på/av, trykk for aktiver 4, 8, 16, 24, 32, 40 sekunder eller 1, 2, 5, 10, 15 minutter. Har også funksjon for samarbeid, begge brytere må trykkes for å aktivere eller bryter 1 siår "på" og bryter 2 siår "av".

Control Pro
Bestillingsnr.:**1136880**



Datautstyr og tilbehør

Pretorian SimplyWorks® Smooth Talker

For å spille av beskjeder eller styre leker, PC etc. Lese inn flere meldinger. Kan også brukes som en bryter med SimplyWorks Control.
SEQUAL: En melding pr. trykk i riktig rekkefølge.
RANDOM: En melding pr. trykk i tilfeldig rekkefølge.
CHOICE: Leser bare 2 meldinger. Melding nr. 1 når bryter trykkes, melding nr. 2 med ekstern bryter. Resten av meldingene ignoreres.
CONVERSE: Annenhver melding leses med hver sin bryter (int/ekst). Man kommer ikke videre før samtalepartneren har trykket.
PROMPT: Man velger melding via ekstern bryter med lavt volum. Når riktig melding er valgt, leses denne med normalt lydnivå.

Smooth Talker
Bestillingsnr.:1136760



Pretorian Smoothie Bryter 125

Smoothie Bryter 125 er en en bryter med 125 mm diameter og lav profil. Krever lite krefter for å betjene og kan betjenes over hele bryteroverflaten.

Kommer i fargene rød, blå, grønn og gul. Skruehull for standard innfestning. 3,5 mm Jackplugg.

Smoothie Bryter 125
Bestillingsnr.:1136720



Pretorian SimplyWorks® Energise

SimplyWorks Energise kan styre 2 forskjellige elektriske apparater (230V/50HZ) trådløst ved hjelp av andre SimplyWorks brytere eller sendere. Den har i tillegg 2 stk. 3,5 mm Jack innganger.

SimplyWorks Energise har 2 uavhengige kanaler. Styres trådløst og har flere funksjoner som trykk og hold, trykk på/av, trykk for aktiver 4, 8, 16, 24, 32, 40 sekunder eller 1, 2, 5, 10, 15 minutter. Har også funksjon for samarbeid, begge brytere må trykkes på for å aktivere eller bryter 1 slår "på" og bryter 2 slår "av". Maks effekt 2300W (10A).

Pretorian SimplyWorks® Energise
Bestillingsnr.:1136860 HMS art. nr.: 177909



Pretorian Optima Trackball

Robust og ergonomisk Trackball uten noen mekaniske deler. Venstre-/høyreklikk og Drag-Lock knapp. Bryterinnnganger for alternative brytere til venstre-/høyreklikk. USB/PS2. «Plug and play».

Pretorian Optima Trackball
Bestillingsnr.:1136850 HMS art. nr.: 145185



Datautstyr og tilbehør

Pretorian Optima Joystick

Robust og ergonomisk Joystick. Venstre-/høyreklikk og Drag-Lock knapp. Bryteringanger for alternative brytere til venstre-/høyreklikk. Enkel justering av hastighet ved hjelp av en knapp med auditiv tilbakemelding. T-grep og Softball-grep følger med. USB/PS2. «Plug and play».

Pretorian Optima Joystick
Bestillingsnr.:**1136840** **HMS art. nr.: 149163**



Pretorian Optimax Joystick

Robust og ergonomisk Joystick. Venstre-/høyreklikk og Drag-Lock knapp. Bryteringanger for alternative brytere til venstre-/høyreklikk. Enkel justering av hastighet ved hjelp av en knapp med auditiv tilbakemelding. T-grep og Softball-grep følger med. USB/PS2. «Plug and play». Det er også 2 bryteringanger på USB-mottakeren (venstre-/høyreklikk).

Som Optima Joystick, men trådløs.

Bestillingsnr.:1136800



Pretorian Optimax Trackball

Robust og ergonomisk Trackball uten noen mekaniske deler. Venstre-/høyreklikk og Drag-Lock knapp. Bryteringanger for alternative brytere til venstre-/høyreklikk. USB/PS2. «Plug and play». Det er også 2 bryteringanger på USB-mottakeren (venstre-/høyreklikk).

Som Optima Trackball, men trådløs.

Trackball
Bestillingsnr.:**1136790** **HMS art. nr.: 147279**



Pretorian n-Abler Trackball

Robust, ergonomisk og tilpasningsvennlig Trackball med venstre-/høyreklikk og dobbeltklikk, Drag-Lock og Scroll-knapp (opp/ned eller høyre/venstre). 2 bryteringanger med valgfri funksjon (høyre-/venstreklikk).

N-Abler Trackball kan settes i den retningen bruker ønsker og Trackball kan justeres i forhold til dette. Justerbar hastighet.

Pretorian n-Abler Trackball
Bestillingsnr.:**1136770** **HMS art. nr.: 134522**



Datautstyr og tilbehør

Pretorian n-Abler Joystick

Som n-Abler Trackball, men Joystick. T-grep og Softball-grep følger med.



Pretorian n-Abler Joystick

Bestillingsnr.:1136780 **HMS art. nr.: 134521**

Pretorian Orbitrack

Mus med berøringsplate. Krever veldig liten kraft for å betjenes da den ikke har noen bevegelige deler. 2 bryterinnlinger. Hastighet og retning er justerbare.



Pretorian Orbitrack

Bestillingsnr.:1136810 **HMS art. nr.: 141974**

Pretorian Track-IT

Muserstatter som gjør at du kan styre datamaskinen med en eller flere brytere. Dette gjøres ved hjelp av skanning/dveling. Skanne-/dvele hastigheten er selvfølgelig justerbar, eller du kan også styre skanning ved hjelp av en bryter. Det er også inngang for bryter 3 og 4 som er programmerbare med venstre-/høyre-/dobletklikk eller Drag-Lock.

Pretorian Track-IT

Bestillingsnr.:1136830



Pretorian Test-IT

For å teste 1-funksjonsbrytere. Det tennes et lys når bryter er koblet til. Lys nr. 2 tennes når bryteren aktiveres.

Pretorian Test-IT

Bestillingsnr.:1136820



Datautstyr og tilbehør

Pretorian Technologies

Pretorian Technologies har over 40 års erfaring med utvikling og produksjon av styringssystemer og leverer i dag et bredt spekter av styringssystemer og datatekniske hjelpemidler til både privatpersoner og industrien. Ved behov for alternative løsninger, vennligst kontakt Gewa AS.



Oversikt funksjoner

En enkel oversikt som viser Pretorian Technology sine muserstattere (ekskl. SimplyWorks) og deres funksjoner og bruksområder. Du finner oversikten i et større format under "Datautstyr og tilbehør" på www.gewa.no. Der finner du også andre aktuelle produkter innenfor området data/kommunikasjon.

Product Features							
FEATURES	ALARMS	ALARMS	BUZZER	BUZZER	OPTICA	OPTICA	TRANS
STANDARD FEATURES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALARM FEATURES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BUZZER FEATURES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPTICA FEATURES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRANS FEATURES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Talemaskiner

GoTalk 32 Express

Med den nye GoTalk Express 32 har du mulighet til å velge mellom Standard modus eller Express modus. I Standard modus har du samme funksjon som GoTalk 32+. Her har du 32 knapper i 5 nivåer, og i tillegg har du 2 knapper (+ og ►) som er like i alle nivåer.

I Express modus har du mulighet til å sette sammen inntil 8 meldinger (knapper), og spille av disse ved hjelp av ► (play). Meldingene spilles da av i samme rekkefølge som de ble trykket inn. Du kan også lagre en sammensatt melding pr. nivå. Du kan også benytte GoTalk Express 32 ved hjelp av mange forskjellige skanningsmetoder.

Bestillingsnr.:1111430



GoTalk 32 Express - skanningsmetoder

- Automatisk skanning – med én eller to brytere.
- Step skanning – med to brytere.
- Visuell skanning – fire LED lys omgir hver knapp.
- Auditiv skanning – ta opp inntil 1,5 sekund pr. knapp eller rad.
- Redusert antall knapper – du kan skanne 4, 8, 16 eller 32 knapper.
- Mange skannemønstre – f.eks. rader, kolonner, kvadrater m.m.
- Skanningshastighet – 3 valg: Sakte, Medium, eller Fort.



Bladvendere

Readable 3 bladvender

Readable 3 er en elektronisk bladvender for bøker og tidsskrifter. Kan plasseres på bord med medfølgende bordstativ, eller på gulvstativ med hjul (ekstrautstyr), slik at bladvenderen lett kan flyttes rundt.

Bladvenderen betjenes med medfølgende IR-sender, eller med 1-funksjonsbryter (scanning). Readable 3 har bryterinngang både på bladvenderen og IR-senderen. Den blir forover og bakover og har mange innstillingsmuligheter. Den justeres lett inn etter hva som skal leses og denne justeringen gjøres uten verktøy.

Readable 3 bladvender

Bestillingsnr.:1151100 **HMS art. nr.: 149663**

Gulvstativ

Bestillingsnr.:1151125 **HMS art. nr.: 149664**



Turny Bladvender

Elektronisk bladvender som egner seg for bøker, tidsskrifter og pocketbøker fra 100-200 mm bredde og opp til 40 mm tykkelse. Bladvendingen utføres ved hjelp av en elektronisk styrт arm med gripelement og kleberull. Bladvenderen styres av et enkelt lett trykk på en individuell tilpasset bryter. Kan settes direkte på bord eller festes på flyttbart stativ. Bladvenderen kan bla både fremover og bakover.

Bladvenderen kan betjenes ved hjelp av luftpudebryter (leveres med som standard), sug/blås, alle typer 1-funksjonsbrytere eller IR-styring.

Turny bladvender

Bestillingsnr.:1150100 **HMS art. nr.: 049154**

V-fot Secustand til Turny bladvender

Bestillingsnr.:1150080 **HMS art. nr.: 148286**



Stativ til Readable bladvender

Et høydejusterbart gulvstativ på hjul som gjør det enkelt å flytte Readable bladvender rundt på gulvet. Du kan også justere vinkelen på bladvenderen slik at du kan bruke bladvenderen både når du sitter og leser og ligger og leser.



Turny Switch bladvender

Bladvender Turny Switch sengemodell er utviklet for de som må ligge og lese. Det er samme bladvender som Turny, men den har i tillegg en elektrisk vippefunksjon som gjør det mulig å ligge og lese. I tillegg har den en meget kraftig V-fot med hjul som lett skyves under sengen. Vinkelen på vippefunksjonen er regulerbar. Turny Switch leveres alltid med V-fot.

Bladvenderen kan betjenes ved hjelp av luftpudebryter (leveres som standard), sug/blås, alle typer 1-funksjonsbrytere eller IR-styring.

Turny Switch bladvender

Bestillingsnr.:1150050 **HMS art. nr.: 041459**

V-fot til Turny Switch (inkl.)

Bestillingsnr.:1150104



Brytere og tilbehør

Hånd-/fingerbryter FK-1

Hånd-/fingerbryter «Buddy Button». Stor trykkflate, solid utførelse i flere farger. Leveres med 1,5 m kabel. Diameter 65 mm.

- Høyde: 15 mm, vekt: 60 g.
- Trykkraft: 2N (200 g).

Grønn: Best. nr. 1124522 - HMS art.nr.145044

Rosa: Best. nr. 1124524 - HMS art.nr. 145046

Skotskrutet: Best.nr. 1124526 - HMS art.nr. 145048

Rød: Best. nr. 1124521

Blå

Bestillingsnr.:1124525 HMS art. nr.: 145047

Lilla

Bestillingsnr.:1124523 HMS art. nr.: 145045

Gul

Bestillingsnr.:1124520 HMS art. nr.: 145042



Pikobutton 50

Pikobutton 50 er en robust 1-funksjonsbryter med liten trykkraft (65 g). Diameter 50 mm. Høyde 13 mm.

Blå: Bestillingsnr. 1451502

Orange: Bestillingsnr. 1451504

Sort: Bestillingsnr. 1451505

Hvit: Bestillingsnr. 1451506

Gull: Bestillingsnr. 1451507

Sølv: Bestillingsnr. 1451508

Transparent: Bestillingsnr. 1451509

Rød

Bestillingsnr.:1451500

Grønn

Bestillingsnr.:1451501

Gul

Bestillingsnr.:1451503



Pikobutton 30

Pikobutton 30 er en robust 1-funksjonsbryter med liten trykkraft (75 g). Diameter 30 mm. Høyde 13 mm.

Sort: Bestillingsnr. 1451005

Hvit: Bestillingsnr. 1451006

Gull: Bestillingsnr. 1451007

Sølv: Bestillingsnr. 1451008

Orange: Bestillingsnr. 1451004

Rød

Bestillingsnr.:1451000

Grønn

Bestillingsnr.:1451001

Gul

Bestillingsnr.:1451003



Joggle bryter med justerbar trykkraft, liten

Joggle-bryter fra Penny & Giles med justerbar trykkraft. Rotér den fargede toppen på bryteren og du kan øke og minske trykkflaten fra 200 g til 1,5 kg.

Bryteren har 15 forskjellige posisjoner. Diameter 63 mm. Leveres med 1 m ledning og 3,5 mm Jack plugg.

Gul

Bestillingsnr.: 1137110

Rød

Bestillingsnr.:1137111 HMS art. nr.: 142007

Blå

Bestillingsnr.:1137112 HMS art. nr.: 142009

Grønn

Bestillingsnr.:1137113



Brytere og tilbehør

Joggle bryter med justerbar trykkraft, stor

Joggle-bryter fra Penny & Giles med justerbar trykkraft. Rotér den fargede toppen på bryteren og du kan øke og minske trykkflaten fra 200 g til 1,5 kg. Bryteren har 15 forskjellige posisjoner.

Diameter 127 mm, høyde 32 mm.
Leveres med 1 m ledning og 3,5 mm Jack plugg.

Gul
Bestillingsnr.: 1137100



Putebryter KK-1Z

Putebryter Gewa. 1-funksjonsbryter som er lagt inn i mykt bomullstrek (vaskbart). Kan legges på puta eller i senga og betjenes med hode eller hånd. Leveres med 1,5 m kabel uten plugg.

- Størrelse: 105x60x23 mm.
- Vekt: 50 g.
- Trykkraft: 2N (100 g.)

Putebryter KK-1Z
Bestillingsnr.: 1124500 HMS art. nr.: 042084



Hånd-/fingerbryter CM-4-1

Hånd-/fingerbryter Zygø. 1-funksjonsbryter med en sluttende kontakt. Leveres med 1,5 m ledning og 1/8" Jack plugg. Litet fysisk størrelse: 95x40x10 mm. Trykkraft 80 g.

Blå
Bestillingsnr.: 1124143

Hvit
Bestillingsnr.: 1124145

Grønn
Bestillingsnr.: 1124141 HMS art. nr.: 145049

Rød
Bestillingsnr.: 1124142 HMS art. nr.: 145050

Orange
Bestillingsnr.: 1124144 HMS art. nr.: 145052



Vippebryter CM-7-1

Vippebryter Zygø med meget fleksibel tung som kan beveges til begge sider. Bryteren kan festes til fast underlag eller til 1/4" rør. Bryteren har mange anvendelsesmuligheter.

- Størrelse: 95x45x10 mm.
- Vekt: 30 g.
- Trykkraft: 1N (100 g.)

Vippebryter CM-7-1
Bestillingsnr.: 1124170 HMS art. nr.: 044556



Brytere og tilbehør

Vippebryter CM-2-1

Vippebryter Zygo med fleksibel tunge som kan beveges til begge sider. Bryteren kan skrus til fast underlag eller festes til 1/4" rør. Har store anvendelsesmuligheter. Brytertungen gir etter for store bevegelser. Leveres med 1,5 m kabel og 1/8" Jack plugg.

- Størrelse: 165x45x10 mm.
- Vekt: 15 g.
- Trykkraft: 0,3N (30 g.)

Vippebryter CM-2-1
Bestillingsnr.:1124120 HMS art. nr.: 044555



Hode-/kinnbryter CM-8 og CM-9

Hode-/kinnbryter Zygo. Stor skumgummipute som trenger liten påvirkning for å gi kontakt, f.eks. for hodeskjerming av elektrisk rullestol. En sluttende kontakt. Leveres med 1,5 m kabel og 1/8" Jack plugg.

- Lengde CM-9: 110 mm
- Lengde CM-8: 160 mm
- Trykkraft: 110 - 220 g

For informasjon om festeanordninger se www.gewa.no.

CM-8 og CM-9
Bestillingsnr.:1124160



Fingerbryter 1-funksjon

Trykkraft 75 g.

Fingerbryter 1-funksjon
Bestillingsnr.:1451510



Fingerbryter 1-funksjon

Fingerbryter 1-funksjon
Bestillingsnr.:1451511



Brytere og tilbehør

Tommelbryter

Trykknapp, Zygo. Lett å holde i hånden. Et bra alternativ for dem som har lettere for å klare å betjene en knapp når de kan gripe rundt den. Meget lett å betjene. Leveres med 1,5 m ledning og 1/8" Jack plugg.

- Størrelse: 90x30x20 mm.
- Vekt: 30 g.
- Trykkraft: 2N (200 g).

Tommelbryter
Bestillingsnr.:1124150 HMS art. nr.: 145886



Hode-/kinnbryter Dergonik

Hodebryter/kinnbryter montert på svanehals, inkl. feste for seng/bord. Lett å regulere.

Trenger meget liten trykkraft. Betjeningsdelen består av en plastkule som ruller. Meget behagelig for bruker.

Med svanehals, lengde 40 cm.

Hode-/kinnbryter Dergonik
Bestillingsnr.:1126016 HMS art. nr.: 054696



PUH blåsekontakt

Superlett blåsekontakt for alarm og omgivelseskontroll. Denne bryteren er en ny type blåsekontakt, utviklet for personer som ikke klarer å betjene vanlige sug/blås kontakter. Med PUH trenger en ikke å ha munnstykke i munnen for å gi en puls. Et lett pust er nok til å sluttet en signalkontakt som igjen kan styre f.eks. alarm, trygghetstelefon, omgivelseskontroll og talemaskin.

Avstanden mellom blåsekontakten og munnen kan være opptil 10 cm. Leveres komplett med bordstativ og holder som kan festes til bord. Maks. belastning 0,5A/50 V. Følsomhet: 2,5 mbar.

PUH blåsekontakt
Bestillingsnr.:1124750 HMS art. nr.: 113529



INTEGRASWITCH sug- og blåsekontakt

Både omgivelsekontroll, kommunikasjon, leker, programvare eller oppkallingssystemer kan styres ved hjelp av INTEGRASWITCH. Sug- og blåsekontakten kan brukes i både sittende og liggende stilling.

- Effektiv/enkel rengjøring av munnstykke (også i oppvaskmaskin)
- Absolutt hygienisk
- Valgfritt festesystem
- Suge- og blåsetrykket kan stilles inn uavhengig av hverandre.

Bestillingsnr.:1107455 HMS art. nr.: 142918



Brytere og tilbehør

Luftstyrte brytere, 1-funksjon

Pneumatisk bryter 1-funksjon. Kobles til CM-3, 1-funksjonsbryter.

Gummiblåse - diameter 40 mm, vekt: 30 g
Bestillingsnr.:1124130 HMS art. nr.: 072274

Gummipute, liten - diameter 65 mm, vekt: 100 g
Bestillingsnr.:1128166

Gummipute, stor - diameter 90 mm, vekt: 100 g
Bestillingsnr.:1128164



Tillegg for luftstyrte brytere

Gummiblåse Zyglo, gripevennlig - diameter 40 mm, vekt 30 g
Bestillingsnr.:1128168 HMS art. nr.: 145861

Gummipute, stor - diameter 90 mm, vekt 100 g
Bestillingsnr.:1128164

Gummipute, liten - diameter 65 mm, vekt 100 g
Bestillingsnr.:1128166



Luftstyrte bryter, 1- og 2-funksjon

Sug/blås munnstykke inkl. stativ. Koples til CM-3, 1-funksjonsbryter eller SB-2, 2-funksjonsbryter.

Fleksibel arm 50 cm og bordtvinge 30 cm svanehals (total lengde 80 cm). Vekt 850 g. Kan også leveres med rørfeste.



Stemmestyrt bryter LAK 821

Stemmestyrt bryter LAK 821 fra Knop er laget for å hjelpe brukere og personale til å få gitt melding hvis brukerne ikke er i stand til å betjene et vanlig signalanlegg på annen måte. Stemmebryterens følsomhet er innstilbar. Det er også mulig å stille hvor lenge lyden skal være før alarm gis (for å unngå alarm ved hosting, nysing o.l.)

Bryteren kan også leveres med radiosender (LAK 821 HF).

LAK 821
Bestillingsnr.:2223465

Separat mikrofon
Bestillingsnr.:2223467



Brytere og tilbehør

Hånd-/fingerbryter FK-4F-RB

4-funksjons hånd-/fingerbryter Gewa med 4 utenpåliggende trykkflater.

FK-4F-RB
Bestillingsnr.:1124630



Hånd-/fingerbryter FK-1F

Ophøyet, stor trykkflate og meget liten trykkraft.

FK-1F
Bestillingsnr.:1124550 **HMS art. nr.: 060147**



IR sender BigJack

For styring av Radio/CD/TV. Senderen passer til alle som trenger store og tydelige brytere.

Bestillingsnr.:2402500 **HMS art. nr.: 029136**



Hodepekepinne

En smidig og bekvem pekepinne for personer med god hodekontroll.

AD1, for voksne
Bestillingsnr.:1130390 **HMS art. nr.: 085384**

AD2, for barn
Bestillingsnr.:1130380 **HMS art. nr.: 085385**



Laserlampe

Laserpekelampe er både effektiv og sikker. Kan tilpasses med individuelle brytere.

Laserlampe
Bestillingsnr.:1160400 **HMS art. nr.: 060137**



Styring av Radio/CD/TV, 2 funksjoner

IR-3SP er en Gewa IR-sender som har mulighet til tilkopling av to 1-funksjonsbrytere.

Bestillingsnr.:2401108 **HMS art. nr.: 029147**



Styring av Radio/CD/TV, 5 funksjoner

For brukere med dårlig motorikk har vi laget denne for styring av inntil 5 funksjoner.

Sender IR-5SP, spesialtilpasset

Bestillingsnr.:2406901

Stjernebryter, spesialtilpasset;

Bestillingsnr.:1124530



Hånd-/fingerbryter CM-1-1

Hånd-/fingerbryter Zygomatic i kraftig utførelse, metall. Med stor myk trykkflate.

CM-1-1
Bestillingsnr.:1124100



Hånd-/fingerbryter FK-2F, 2 funksjoner

Store utenpåliggende trykkflater. Liten betjeningskraft. Trykkraft: 1N (100 g).

FK-2F, 2 funksjoner
Bestillingsnr.:1124580 **HMS art. nr.: 054685**



Brytere og tilbehør

Hånd-/fingerbryter FK-1H

FK-1H
Bestillingsnr.:1124560



Hånd-/fingerbryter FK-4H-RB, 4 funksjoner

4 nedfelte trykkflater for å unngå ufrivillige tastetrykk. Kan styre inntil 4 funksjoner. Leveres med ledning 2 m og 6 pins DIN plugg. Størrelse: 120x65x33 mm. Vekt: 230 g. Trykkraft: 0,4N (40 g.)

FK-4H-RB, 4 funksjoner
Bestillingsnr.:1124640



Albuebrytere

Albuebrytene leveres i 3 forskjellige utførelser/kvaliteter.

Albuebryter AKA
Bestillingsnr.:2200237 HMS art. nr.: 167114

Albuebryter Prisma
Bestillingsnr.:2200236 HMS art. nr.: 143039

Albuebryter AKD
Bestillingsnr.:2200235 HMS art. nr.: 143038



Hånd-/fingerbryter FK-2H, 2 funksjoner

Store nedsenkede trykkflater for å unngå ufrivillige tastetrykk. Kunststoff. Trykkraft: IN (100 g.)

FK-2H, 2 funksjoner
Bestillingsnr.:1124590 HMS art. nr.: 050563



Selvsøkende 4-funksjonsbryter

Selvsøkende (skannende) 4-funksjonsbryter 5600 ASC-1. Stillbar søkehastighet. Leveres med ledning og 5 pins DIN plugg. Driftsspenning 24 AC.

Selvsøkende 4-funksjonsbryter
Bestillingsnr.:1125600



Brytere og tilbehør

Hånd-/hakekontakt HK 4

Hånd-/hakekontakt med 4 funksjoner, komplett med universalstativ, 2 stillingsledd og bordtvinge. Kan også festes til rør ved hjelp av rørtvinge. Leveres med 5-polig DIN plugg.

HK 4

Bestillingsnr.:1125300 HMS art. nr.: 042415



Stativ universal TH-1G

Kan tilpasses en rekke brytere. Universalstativ består av:

- bordtvinge med 200 mm rør, Ø 10 mm
- stålør 500 mm
- 2 stk. stålkrysseledd
- 1 stk. universalfeste med 100 mm rør, Ø 10 mm

For andre spesialvarianter, vennligst kontakt oss!

TH-1G

Bestillingsnr.:2231250 HMS art. nr.: 134932



Stativer tilbehør

Rørtvinge for fest til:

18 mm rør: Best.nr.1128106

22 mm rør: Best.nr.1128109

26 mm rør: Best.nr.1129107

40 mm rør: Best.nr.1128108

Stålør Ø 10 mm:

Lengde 200 mm: Best.nr.1128102

Lengde 500 mm: Best.nr.1128104

Bordtvinge

Bestillingsnr.:1128100

Stålkrysseledd

Bestillingsnr.:1128120



Sug/blås munnstykke inkl. stativ

Kobles til CM-3; 1-funksjonsbryter eller SB-2; 2-funksjonsbryter.

- Lengde: 80 cm.

- Vekt: 850 g.

1-funksjonsbryter

Bestillingsnr.:1124720 HMS art. nr.: 146225

2-funksjonsbryter

HMS art. nr.: 061888



Symboler for tale

Nilbild grunnpakke

Gjennom ulike kommunikasjonsbilder har mange barn og voksne, som ellers ikke har mulighet til å kommunisere/prate, en større sjanse til å kunne nå sine nærmeste, for eksempel med følelser, ønsker og behov.

Bildene finnes som stive kort i farger eller som svart/hvite konturbilder i egne hefter. Det finnes totalt 612 ferdig tegnede bilder. Bildene er gruppert med et eget register som gjør det lett å finne frem til emner og bilder. Størrelsen på bildene er 95x95 mm.

Nilbild har også en rekke andre muligheter og produkter.

CD-ROM med 612 digitale bilder + komplett symbolsett 612 bilder
Bestillingsnr.:1112735 HMS art. nr.: 020588

Grunnoppsett med 387 bilder
Bestillingsnr.:1112701 HMS art. nr.: 020622

Grunnoppsett med 507 bilder
Bestillingsnr.:1112704 HMS art. nr.: 020623



Nilbild uketavler

Kommunikasjonstavle og uketavle i velcro. Uketavlen har syv felt for ukens syv dager med forskjellige farger for hver dag. På baksiden er tavlen i ensfarget blå velcro.

Nilbild har også ensfarget kommunikasjonstavle. Den ene siden er dypblå og den andre siden er varmgul.

Tavlene er rammet inn med en lys treramme. 50 cm borrelås leveres med hver tavle.

Uketavle 50 x 70 cm
Bestillingsnr.:1112719 HMS art. nr.: 020612

Kommunikasjonstavle
Bestillingsnr.:1112718 HMS art. nr.: 136488



Nilbild

CD-ROM med 612 digitale bilder
Best.nr.:1112734 - HMS art. nr. 020587

Konturbildehefte med 102 bilder
Best.nr: 1112725

Konturbildehefte med 348 bilder
Best.nr.: 1112726

Flerbrukerlisens/skolelisens: Best.nr.: 1112736

Symbolsett 1 - 103 bilder
Bestillingsnr.:1112702 HMS art. nr.: 020582

Symbolsett 2 - 17 bilder;
Bestillingsnr.:1112703 HMS art. nr.: 020583

Symbolsett 3 - 107 bilder
Bestillingsnr.:1112705 HMS art. nr.: 020584



Nilbild dagbøker

Ukedagbok med 7 farger i velcro A4 stående
Bestillingsnr.:1112749 HMS art. nr.: 020601

Ukedagbok med 7 farger i velcro A5 stående
Bestillingsnr.:1112750 HMS art. nr.: 020600

Ukedagbok med 7 farger i plast A5 stående
Bestillingsnr.:1112748



Symboler for tale

Nilbild småbildeveske

Småbildeveskene kan brukes både til bokstaver og bilder. De leveres i 2 forskjellige utgaver med 2 ulike størrelser på lommene.

Småbildeveske med bildelomme 6 x 10 cm
Bestillingsnr.:1112738 HMS art. nr.: 1366530

Småbildeveske med bildelomme 5 x 7 cm
Bestillingsnr.:1112711 HMS art. nr.: 020609



Nilbild kommunikasjonspermer

Kommunikasjonspermer, spiralinnbundet i VELCROKVALITET, kan brukes som leke-, trenings- eller aktivitetspermer. Man kan f.eks. lage forskjellige skjemaer til språktrening eller benytte permene i lekesituasjoner.

Permene er 3-delte og leveres i forskjellige størrelser og farger.

Kommunikasjonsperm i velcro A4
Bestillingsnr.:1112746 HMS art. nr.: 020599

Kommunikasjonsperm i velcro A5
Bestillingsnr.:1112745 HMS art. nr.: 020598



Nilbild kommunikasjonspermer

Kommunikasjonspermer, spiralinnbundet i PLASTKVALITET, kan brukes som leke-, trenings- eller aktivitetspermer. En kan f.eks. lage forskjellige skjemaer til språktrening eller benytte permene i lekesituasjoner.

Permene er 3-delte og leveres i forskjellige størrelser og farger.

Kommunikasjonsperm i plast A4
Bestillingsnr.:1112714 HMS art. nr.: 1366637

Kommunikasjonsperm i plast A5
Bestillingsnr.:1112713 HMS art. nr.: 1366644

Kommunikasjonsperm i plast A6
Bestillingsnr.:1112715 HMS art. nr.: 1366654



Nilbild kommunikasjonsmappe - sammenleggbar

Denne 6-delte kommunikasjonsmappen, som enkelt kan foldes sammen, er utmerket både til store kommunikasjonsskjemaer og til noen få bilder. Den er enkel å ta med seg.

Når mappen er brettet sammen, er den i A4- eller A5-format. Mappen leveres både i stående og liggende format.

Kommunikasjonsmappe A4-størrelse, liggende
Bestillingsnr.: 1112742

Kommunikasjonsmappe A5-størrelse, stående
Bestillingsnr.:1112743 HMS art. nr.: 020619

Kommunikasjonsmappe A5-størrelse, liggende
Bestillingsnr.:1112744 HMS art. nr.: 020620

Kommunikasjonsmappe A4-størrelse, stående
Bestillingsnr.:1112741



Symboler for tale

Nilbild, hvem gjør hva?

«Hjem gjør hva?»-mapper. Aktivitetsmapper for språk og kommunikasjonstrening av sekvenser og hendelsesforløp.

Bildeperm med 10 plastlommer

Bestillingsnr.:1112717 HMS art. nr.: 136593

Bildeperm med 18 plastlommer

Bestillingsnr.:1112751



Nilbild bildelommer vegg

Bildeommer til å henge på veggen passer utmerket til å sette opp i forskjellige rom hvor en har forskjellige aktiviteter; kjøkken, baderom, lekerom osv.

Bildeommen har en malje i hvert hjørne slik at de kan henges opp på veggen.

Bildeomme vegg for 6 bilder

Bestillingsnr.:1112697 HMS art. nr.: 020606

Bildeomme vegg for 8 bilder

Bestillingsnr.:1112698 HMS art. nr.: 020607

Bildeomme vegg for 9 bilder

Bestillingsnr.:1112699



Nilbild bildelommer

Bildeommene er enkle og praktiske. De kan brukes i mange sammenhenger i ulike former for kommunikasjonstrening og er veldig praktiske å ta med seg til ulike aktiviteter.

Bildeommene er sydd i kunstlær og finnes i fargene rød, grønn og blå. Størrelse: 10,5 x 10,5 cm.

Bildeomme med plass for 6 bilder

Bestillingsnr.:1112739

Bildeomme med plass for 8 bilder

Bestillingsnr.:1112740 HMS art. nr.: 020616



Nilbild bildetavler

Bildetavler med luker for bilder. Bildetavlene kan benyttes både ved lek og innlæring. En velger bilde og setter det bak valgfri luke. En kan få trefot til bildetavlene som gjør at de står støtt.

Trefot for hustavle/bildetavle

Bestillingsnr.: 1112731

Trefot for dørtavle

Bestillingsnr.: 1112728

Hustavle med 3 loker, A3

Bestillingsnr.:1112730

Biltavle med 2 loker, A3

Bestillingsnr.:1112729

Dørtavle med 1 luke

Bestillingsnr.:1112727



Symboler for tale

Nilbild bildestativ

Trestativet har plass til 8 bilder/fotografier. For noen kan det være enklere å se bildene på et stativ i stedet for på bordet. For de som skal undervise kan dette ofte være en fordel.

Stativet er lakkert, så det er både slitesterkt og lett å rengjøre.

Bestillingsnr.:1112712



Nilbild arbeidstavle

Arbeidstavle A3-størrelse

Bestillingsnr.:1112753

Arbeidstavle A4-størrelse

Bestillingsnr.:1112754

Arbeidstavle A6-størrelse


Bestillingsnr.:1112755



Nilbild småbildemapper

Nilbild småbildemapper 3,5 x 3,5 cm
Bestillingsnr.:1112650

Nilbild småbildemapper 5,5 x 5,5 cm
Bestillingsnr.:1112655

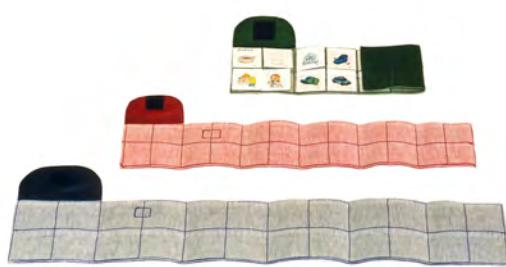

Nilbild klasseromsskjema

Klasseromsskjemaet kan brukes for å strukturere en dag for en klasse eller en annen arbeidsgruppe. Det finnes lommer til bilder som illustrerer klokken, bilde for aktivitet/ordbilde, samt en lomme til et fotografi av lærer eller andre. Størrelsen på skjemaet er 55 x 150 cm. Det leveres med et ark med klokker uten visere, som man kopiere og sette inn egne tider.

Lengst nede på skjemaet er det lommer hvor man kan plassere bilder og aktivitetskort man er ferdig med.

Bestillingsnr.:1112720 HMS art. nr.: 136502



Symboler for tale

Nilbild postkasse

Postkasse i tre for lek og trenings. Brukes til å øve på og kommunisere med bilder. Man kan anvende en postkasse på forskjellige måter: "Vi sender bildepost til hverandre! Hva fikk du? Et fly!" Postkassen finnes i 4 forskjellige farger.

Postkasse GUL
Bestillingsnr.: 1112633

Postkasse RØD
Bestillingsnr.:1112630

Postkasse GRØNN
Bestillingsnr.:1112631

Postkasse BLÅ
Bestillingsnr.:1112632



Nilbild øyeppeketaavle


Bestillingsnr.:1112610 HMS art. nr.: 136489



Nilbild treskap

Bestillingsnr.:1112620



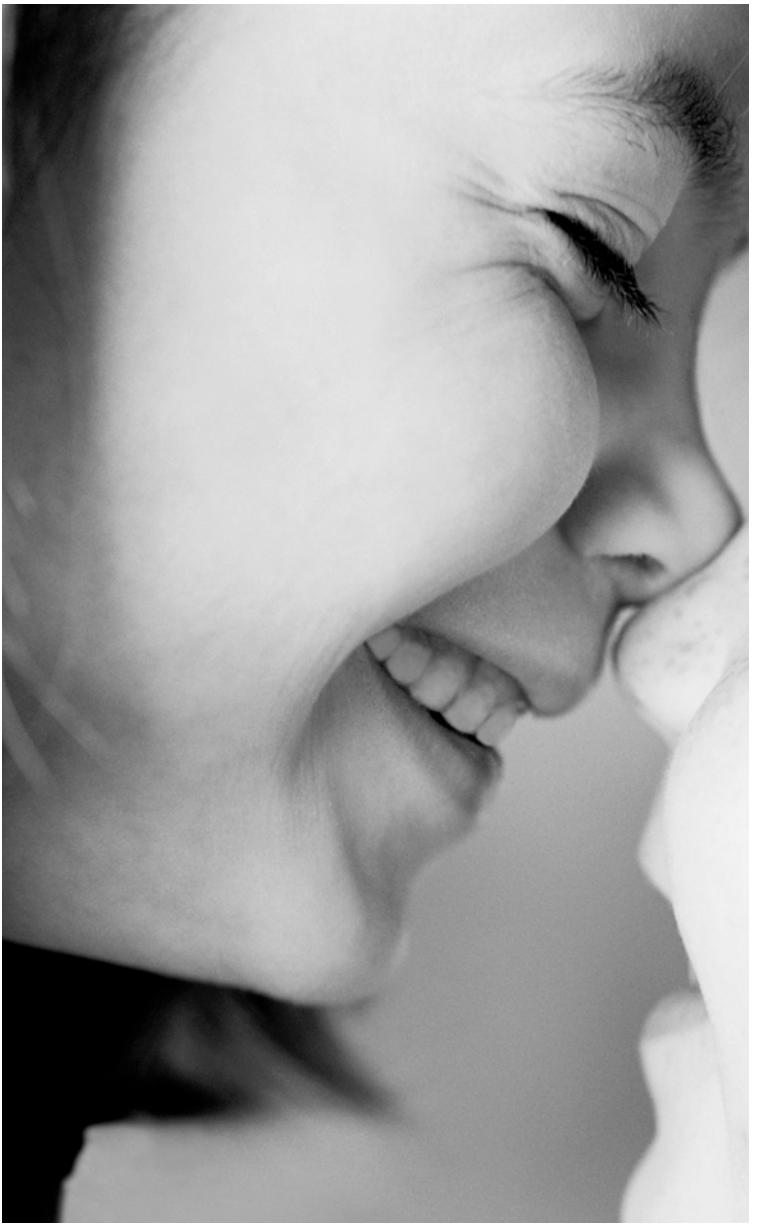



Syn



En stor andel synshemmede vil langt på vei kunne opprettholde sine daglige aktiviteter og få økt livskvalitet ved tilpasning og opplæring i bruk av riktige hjelpemidler.

Gewa representerer Reinecker, Europas største produsent av elektroniske hjelpemidler på dette området.

Lese-TV

Mezzo HD lese-TV

- et kompakt lesesystem med HD-kvalitet for mennesker med nedsatt syn
- enkelt for alle - både unge og gamle; å bære, installere og bruke
- moderne og tidsriktig design
- ergonomisk overlegent med justerbare skjermminnstillinger og et kompakt design som krever mindre plass
- flimmerfritt bilde i HD-kvalitet reduserer tretthet og belastning på øynene. Det betyr at man kan bruke det lenger tid av gangen uten å bli sliten.

Mezzo HD lese-TV
Bestillingsnr.:**1168000** HMS art. nr.: **194399**



Mezzo HD

- Kamera:
- 60 Hz-Kamera, progressiv scan
 - 1360 x 768 pixel oppløsning
- Autofokus:
- Komfort-Autofokus
- Monitor:
- 15,6" W TFT-Monitor,
 - Regulerbar i høyde, vinkel samt dreibar
 - Forstørrelse:
 - ca. 2,2 – 90 ganger



VEO HD+ Lese-TV

VEO er et kompakt elektronisk forstørrelsessystem med en spesiell flatskjermteknologi. Det integrerte HIGH-Definition (HD) kameraet gjør at bilder og skrift vises i høy oppløsning uten hverken reflekser eller flimring. Kan bestilles i 2 forskjellige størrelser:

VEO HD+ Lese-TV 22
HMS art. nr.: 198240
VEO HD+ Lese-TV 24
HMS art. nr.: 198241



VEO HD+

- Monitor:
- LED-Flatskjerm i 3 størrelser:
 - 19"- (48 cm), 22"- (56 cm) og 24"- (61 cm)
 - Alle monitorene er spesielt utviklet for VEO-Systemet
 - Ergonomisk lesestilling takket være fire-dimensjonal bevegelighet til monitoren
 - Monitoren er svært tynn, lett, energibesparende og flimmerfri
 - 1080 p oppløsning = Full HD = 1920 x 1080 Pixel (22" og 24")
- Betjening:
- VEO-betjening - Brukerfordeler



Elektroniske leseluper

miniMAX

MiniMAX gjør det enklere å lese menyer i dårlig belysning, matemballasje i butikken, rutetabeller og annen viktig informasjon. Du kan velge å fryse bildet, velge høy kontrast og opp til 7x forstørrelse. For optimal forstørrelse trykker du på knappen gjentatte ganger helt til du får ønsket innstilling. Trenger du mer kontrast mellom bakgrunn og bokstaver, velger du en annen fargekombinasjon. Med frys-/snapshot-funksjonen kan du ta bilde av ønsket informasjon, slik at du i fred og ro kan betrakte et gatenavn, et telefonnummer e.l. Du vil bli positivt overrasket over hvor enkel og praktisk denne kraftige lupen er i bruk.

Bestillingsnr.:1166075 HMS art. nr.: 166093




MANO - bærbar lupe

Har du bruk for en praktisk lupe, hjemme eller når du er på farten? Ønsker du et produkt med et bra design som er praktisk i bruk? MANO gir deg nye muligheter:

Med MANO får du et skarpt bilde og en trinnløs forstørrelse. Snapshot-funksjonen gjør det mulig å lagre 3 bilder eller informasjon som der og da kan hjelpe deg til å ta vare på viktige detaljer, f.eks. telefonnummer, avgangstider for tog/buss eller priser. Ved å trykke på en knapp kan du "fange tekst" som du ellers ikke kan lese, f.eks. rutetabeller, beskjeder eller etiketter. MANO hjelper deg til å lese og skrive.

Bestillingsnr.:1166070 HMS art. nr.: 159851

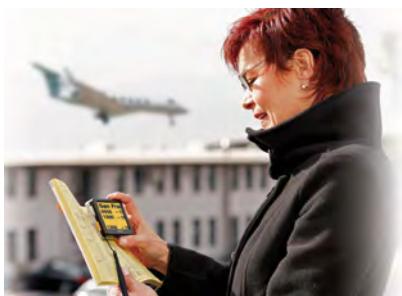

MAXLUPE 5

Å lese og skrive ved hjelp av dette nye hjelpebiddelet er en sann fornøyelse. At skjermen på MAXLUPEN kan vinkles, er virkelig et stort fremskritt.

Den nye MAXLUPEN forstørrer tekster og bilder trinnløst fra ca. 3x til 25x forstørrelse og er til stor glede og nytte når synet blir så dårlig at vanlige luper og forstørrelsesglass ikke lenger strekker til. I skrivestilling på stativ er forstørrelsen fra ca. 3x til 7x. Med skrivestativ kan den nye MAXLUPEN brukes til å løse kryssord, undertegne brev, skrive notater m.m.

Maxlupe 5

Bestillingsnr.:1166030 HMS art. nr.: 018043

Bæreveske med ekstra batteripakke

Bestillingsnr.:1166060 HMS art. nr.: 018067



© Reinecker

Mano - fleksibel og praktisk


Mano er en fleksibel og portabel elektronisk luke for folk som er på farten.

Fordelene med Mano portabelt system er:

- et opplyst display og et foldbart skrivestativ
- betjeningsknapper som er taktile og enkle å betjene
- kan benyttes både med nettadapter og batteri.

Bestillingsnr.:1166070 HMS art. nr.: 159851



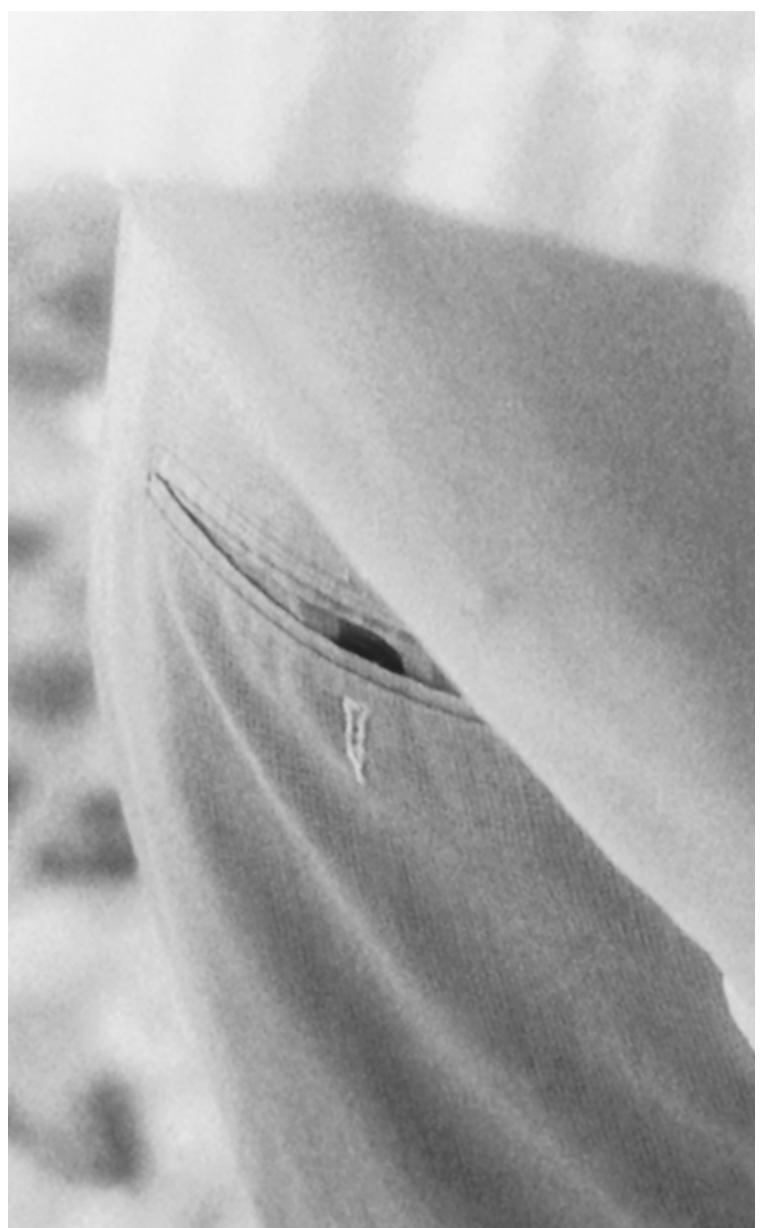



Varsling



Trygghet er viktig for oss alle,
enten som pasienter, pårørende
eller omsorgspersoner i
helsevesenet.

Vi har i dag et bredt spekter av
radiobaserte alarmer som gir økt
trygghet for den enkelte og krever
liten eller ingen installasjon.

Epilepsialarmer

Epilepsialarm trådløs sender EPI-900

Vibrasjonsdetektoren henges enkelt opp under sengen og har trådløs (radio) overføring til mottakeren. Toveiskommunikasjon. Epilepsialarmen er spesielt utviklet for å registrere rystelser som oppstår ved epileptiske anfall (torisk-klonisk-anfall).

Epilepsialarm EPI-900
Bestillingsnr.:2223283 HMS art. nr.: 189344
Ekstra føler EPI-900
Bestillingsnr.:2223274 HMS art. nr.: 195075



Epilepsialarm trådløs sender EPI-2000

Epilepsialarm Knop type EPI-2000 er en portabel vibrasjonsdetektor som enkelt henges opp under sengen og har trådløs (radio)overføring til mottakeren. Epilepsialarmen er spesielt utviklet for å registrere rystelser som oppstår ved epileptiske anfall (torisk-klonisk-anfall).

EPI-2000 har en mikroprosessor og et akssellerometer som med stor nøyaktighet regner ut og analyserer rystelsens karakter. Ved utløst alarm overføres signalet trådløst til mottakeren. EPI-2000 har innebygget klokke slik at en kan velge når på døgnet alarmen skal være aktiv. Alarmen har også reléutgang.

Epilepsialarm- 2000
Bestillingsnr.:2223224 HMS art. nr.: 020724
Ekstra føler- 2000
Bestillingsnr.:2223233 HMS art. nr.: 020720



Epilepsialarm mottaker RX-2004, bærbar

Epilepsimottaker RX-2004 er en trådløs mottaker med batteridrift.

Med RX-2004 blir pårørende mer fleksible da mottakeren kan tas med rundt i huset/hagen. Rekkevidden er ca. 70 meter, men avhenger av bygningsmessige konstruksjoner.

Bestillingsnr.:2223232 HMS art. nr.: 020742



Komplett alarm- sender og mottaker (900)

Komplett alarm består alltid av sender og mottaker

Epilepsialarm EPI-900
Bestillingsnr.:2223283 HMS art. nr.: 189344
Ekstra føler EPI-900
Bestillingsnr.:2223274 HMS art. nr.: 195075
Knop RX 900-2 mottaker
Bestillingsnr.:2223273 HMS art. nr.: 189343



Epilepsialarmer

Komplett alarm - sender og mottaker (2000)

Komplett alarm består alltid av en sender og en mottaker.

Trådløs sender EPI-2000
Bestillingsnr.:2223234 HMS art. nr.: 020724
Bærbar mottaker RX-2004
Bestillingsnr.:2223232 HMS art. nr.: 020742
Ekstra føler - 2000
Bestillingsnr.:2223233 HMS art. nr.: 020720



Knop EPI 900 vibrasjonsdetektor

Epilepsialarm Knop type EPI-900 er en portabel vibrasjonsdetektor som enkelt henges opp under sengen og har trådløs (radio)overføring til mottakeren.

Knop EPI 900
Bestillingsnr.:2223283 HMS art. nr.: 189344
Knop EPI 900 Føler
Bestillingsnr.:2223274 HMS art. nr.: 195075

Knop RX 900-2 Mottaker

RX 900-2 er en 2-kanals mottaker som er egnet til å motta alarmer fra Knops 900-serie 869 MHz sendere. RX 900-2 RE er en 2 kanals mottaker med reletutganger.

Knop RX 900-2 Mottaker
Bestillingsnr.:2223273 HMS art. nr.: 189343
Knop RX 900-2 RE
Bestillingsnr.:2223282 HMS art. nr.: 195076



Varsling

Fallalarm Knop MTC 900 Sender

Denne mini fallalarmen er godt egnet for varsling på institusjon eller i bolig. Den varsler ved at bruker selv trykker eller at fallalarmen er over

Fallalarm Knop MTC 900 Sender
Bestillingsnr.:2223271 HMS art. nr.: 189342



Knop LAK 900 - stemmestyrt sender/bryter

Stemmestyrt sender/bryter LAK 900, fabrikat Knop er laget for å hjelpe bruker til å få gitt melding i de tilfellene brukeren ikke er i stand til å betjene et vanlig signalanlegg på annen måte.

Knop LAK 900 - stemmestyrt sender/bryter
Bestillingsnr.:2223284 HMS art. nr.: 189345



Knop BW 900

Dette er en brukervennlig fuktalarm hvor man skifter fuktaken og stiller inn følsomheten ved enkle grep. Den sender signal til mottakeren, men kan også gi beskjed til brukere via lydalarm. Fuktakenet er enkelt å kople i

Knop BW 900
Bestillingsnr.:2223293 HMS art. nr.: 189349



Knop RP 900 Repeater

Har du behov for å sende signalet lenger, kan det monteres en RP 900. Denne vil øke rekkevidden med 50 m. Det kan være 2 repeatere i et system.

Knop RP 900 Repeater
Bestillingsnr.:2223286 HMS art. nr.: 189347



Knop RX 900-LED

Denne bærbare radiommottakeren kan motta inntil 400 forskjellige alarmer. Knop-serien inneholder en rekke forskjellige radiosendere. Når noen har utløst alarm, angis hvilken alarm som er mottatt.

Knop RX 900-LED
Bestillingsnr.:2223288 HMS art. nr.: 189348



Knop PIR 900

Sengealarm/sengevaktt PIR 900 fabrikat Knop er en PIR-detektor som plasseres på gulvet ved sengen. Alermen er en radiobasert sender som sender signal dersom noen forlater sengen om natten.

Knop PIR 900
Bestillingsnr.:2223285 HMS art. nr.: 189346



Varsling

Smykkesender, armbåndsender og magnetkontakt

1. Alarmknapp/smykkesender
Bestillingsnr.:2223535 HMS art. nr.: 020730
2. Armbåndsender/klokkesender
Bestillingsnr.:2223520 HMS art. nr.: 020733
3. Magnetkontakt for varsling hvis noen åpner døren
Bestillingsnr.:2223530 HMS art. nr.: 135564



Knop PC 900

PC 900 er en trådløs trekkkontakt som sender koder til mottaker. PC 900 skal være kodet inn i mottakeren og både sender og mottaker skal være på for at systemet skal fungere. Overføring av signaler skjer ved å trekke i

- PC 900
Bestillingsnr.:2223291



Knop TX 900- A

TX 900- A er en liten vanntett armebåndssender som sender koder til en trådløs mottaker.

- Knop TX 900- A
Bestillingsnr.:2223290 HMS art. nr.: 197611



Knop TX- 900 1

1 kanals sender med bryterinngang, 3,5 jack for tilkobling av 1 funksjonsbryter. Den har også mulighet til å brukes som magnetkontaktdør-/ vindusalarm.

- Knop TX- 900 1
Bestillingsnr.:2223272



Håndsender TX-2004

TX-2004 fabrikat Knop er en 1-kanal sender med stor rekkevidde (ca. 50m). For de som ikke klarer å betjene en så liten bryter, kan TX-2004 også tilkoples andre 1-funksjonsbrytere.

- Bestillingsnr.:2223231 HMS art. nr.: 020732**



Døralarm DV-2000

Knop døralarm DV-2000 er en radiobasert alarmsender som festes på selve døren med for eksempel borrelås. Alermen er utviklet for å overvåke at døren ikke skal åpnes på visse tider av døgnet.

- Bestillingsnr.:2223226 HMS art. nr.: 020743**



Varsling

Stemmestyrt sender/bryter

Stemmestyrt bryter LAK 821, fabrikat Knop er laget for å hjelpe bruker til å få gitt melding i de tilfellene brukeren ikke er i stand til å betjene et vanlig signalanlegg på annen måte.

Med radiosender og reléutgang - LAK 821 HF

Bestillingsnr.:2223466 HMS art. nr.: 135562

Separat mikrofon inkl. 1,5 m ledning

Bestillingsnr.:2223467 HMS art. nr.: 136042



Alarmsmottaker - RX-2004

RX-2004 fabrikat Knop er en bærbar 1-kanals mottaker som tar imot radiosignaler fra forskjellige sendere. Mottakeren har Av/På-funksjon. Rekkevidden er ca. 50 m.

Alarmsmottaker

Bestillingsnr.:2223232 HMS art. nr.: 020742

Knop vibrator til å ha under hodeputten

Bestillingsnr.:2220411 HMS art. nr.: 136018

Knop trafo nettadapter ST 825 5V DC

Bestillingsnr.:2223476



Alarmsmottaker RX-300 m/vibrator

Denne bærbare radiomottakeren kan motta inntil 99 forskjellige alarmer. Knop-serien inneholder en rekke forskjellige radiosendere. Når noen har utløst alarm, angis hvilken alarm som er mottatt.

Bestillingsnr.:2223486 HMS art. nr.: 135563



Sengealarm PIR-2003

Sengealarm/sengevakt PIR-2003 fabrikat Knop er en PIR-detektor som plasseres på gulvet ved sengen. Alarmen er en radiobasert sender som sender signal dersom noen forlater sengen om natten.

Bestillingsnr.:2223227 HMS art. nr.: 020753



Alarmsmottaker - RX-2004-R

Knop RX-2004-R er en bærbar 1-kanals mottaker med reléutgang som tar imot radiosignaler fra ulike sendere og har Av/På-funksjon. Ved mottatt signal "slutter" kontakten. Rekkevidden er ca. 50 m.

Alarmsmottaker RX-2004-R

Bestillingsnr.:2223235

Knop trafo nettadapter ST 825 5V DC

Bestillingsnr.:2223476



Alarmmatte TR 401

Knop alarmmatte legges foran seng, dør e.l. Når bruker tråkker på matten, gir dette en elektrisk kontakt. Impulsen videreføres til en radio-alarmsender eller til annen trådbundet elektronikk.

Bestillingsnr.:2223230 HMS art. nr.: 136047



Varsling

Gewa sengevakt SV-4080

Gewa sengevakt er en ny generasjon sengevakt som er svært enkel i bruk. Plasseres under madrassen som en stor bryter som føler når det

Gewa sengevakt SV-4080
Bestillingsnr.:2226241 HMS art. nr.: 020751
Timer m/puls, utenpåliggende
Bestillingsnr.:2226240 HMS art. nr.: 136027



Bussystem master

System fra Knop. Ved å kople flere repeater med en master gir det mulighet til å dekke store områder. Masteren er hjernen i systemet og er avhengig av repeaterne for å distribuere signaler videre.

Bestillingsnr.:2223245 HMS art. nr.: 195072



Maxialarm med lang rekkevidde, radio

Knop PRC-2000RP er en mottaker og sender med lang rekkevidde. Mottakeren tar imot radiosignaler fra ulike typer sendere og videresender disse til personsøker med rekkevidde opptil 500 m.

Sentralenhet PRC-2000RP inkl. personsøker PRC-2020V
Bestillingsnr.:2223236 HMS art. nr.: 025762

Personsøker PRC-2020V
Bestillingsnr.:2223237 HMS art. nr.: 135560



Knop repeater

Dersom avstanden mellom en radioalarmsender og mottaker er for stor, slik at signalene ikke når frem, kan problemet løses ved å sette inn en repeater mellom sender og mottaker.

Bestillingsnr.:2223473 HMS art. nr.: 020744



Bussystem repeater

Repeater sender og mottar signaler fra Knop-sendere og videre-formidler signalene til alle repeaterne i systemet. Det kan være inntil 32 repeater i systemet, hver med en rekkevidde på 100 m.

Bestillingsnr.:2223250 HMS art. nr.: 195073



CareIP trygghetsalarm

CareIP er en ny generasjon trygghetsalarm der kommunikasjonen skjer digitalt via IP og/eller GSM/GPRS. Den er enkelt å installere, med ekte Plug&Play og det finnes et stort utvalg tilbehør.

CareIP trygghetsalarm

Bestillingsnr.:2227050 HMS art. nr.: 175756

M-boks, trådløs sendermodul med kablet inngang for CareIP

Bestillingsnr.:2227060 HMS art. nr.: 175757



Varsling

Lommy Personal - GPS/GSM

Lommy GPS/GSM er en sporingseinhet som gir stor personlig sikkerhet. Den er utviklet til å gi høy personlig sikkerhet innenfor offentlige

Lommy Personal - GPS/GSM
Bestillingsnr.:2223260 HMS art. nr.: 189341



Safewake reisevekkerklokke

SafeWake er et vekkersystem tilpasset hørselhemmede og andre som har vanskelig for å våkne av en vanlig vekkerklokke, hotellets vekkeralarm (TV/telefon) eller rømningsalarmer.

Bestillingsnr.:1104111-1 HMS art. nr.: 135485



Overvåking

Samsung overvåkingssystem

Med Samsungs digitale trådløse teknologi blir det et meget bra bilde uten forstyrrelser. Dette systemet kan gi deg 250 m rekkevidde ved fri sikt. Toveis kommunikasjon.

Dekterer lyd. Systemet krever ingen installasjon.



Pretorian SimplyWorks Smooth

For å spille av beskjeder ved vandring, slik at bruker blir påminnet om at han / hun ikke skal f.eks. gå ut. Aktiveres vha f.eks. en tråkkematte.

Pretorian SimplyWorks Smooth

Bestillingsnr.:1136760 **HMS art. nr.: 177899**



Overvåkingssystem Knop LAK-900M sett

Dette er en enkel "babycall" lydovervåker. Mikrofonen monteres ved bruker og høyttaler monteres hos "hjelper".

Kvaliteten lydmessig er god fordi det brukes kabel mellom enhetene.

Knop LAK-900M sett

Bestillingsnr.:2223258 **HMS art. nr.: 189340**



Kamera kabelt med server

Dette er et overvåkingssystem med krystallklare bilder natt og dag. Kamera er av merket Sony med HD oppløsning. Det er mulig å zoome på det en skal overvåke. Automatisk fokus. Den kraftige IR-lampen gjør at det er mulig å filme i mørket. Da blir det sort/hvitt bilder.

Monitoren er på 21»

Kamera kabelt med server

Bestillingsnr.:2227450 **HMS art. nr.: 189355**

Bestillingsnr.:2227451 **HMS art. nr.: 189356**

Bestillingsnr.:2227459 **HMS art. nr.: 189358**



Overvåking

Kamera kablet Coax

Video-overvåking via kabel. God lyd og bilde i HD. Nattfunksjon og mulighet for opptak. Dette er et avansert system som krever installasjon.

Kamera kablet Coax

Bestillingsnr.:2227450 **HMS art. nr.: 189355**

Bestillingsnr.:2227459 **HMS art. nr.: 189358**



Trådløs kamerapakke med server

Video-overvåking med lyd og bilde via lukket trådløst nett. Nattfunksjon og mulighet for opptak. Et avansert system som krever installasjon.

1: Kamerapakke Best.nr.2227450 Nav nr. 189355

2: Serverpakke Best.nr. 2227451 HMS nr. 189356

3: Trådløspakke Best.nr. 2227470 HMS nr. 189359

4: Skjermpakke Best.nr 2227457 HMS nr. 189357



TRÅDLØS komfyrvakt

Dette er en komfyrvakt som er utviklet slik at man kan montere den selv. Med denne kreves ingen el.-kunnskap; plug'n play.

Komfyrvakt

Bestillingsnr.:2223635 **HMS art. nr.: 189351**



Elvakt komfyr SE sensor

Denne komfyrvakten er egnet til å monteres ved utskifting av gammel kontakt. Autorisert elektriker!

Elvakt komfyr SE sensor

Bestillingsnr.:2223640 **HMS art. nr.: 189352**







Høreapparater



La ikke et hørselstap gi deg redusert livskvalitet. Vår teknologi fokuserer på dine behov og preferanser, slik at du skal kunne glede deg over lytteopplevelser og kunne oppfatte tale i alle situasjoner og omgivelser.

Vår produsent, Bernafon, har utviklet høreapparater av høy kvalitet i over 60 år. Ved utviklingssenteret i Sveits, skaper internasjonale team førsteklasses høreapparater og en rekke tilbehør for mobil, TV og telefon.

Acriva 9

Acriva 9 Nano RITE

Acriva 9 med RITE-teknologi er en mini-ørehenger som passer til milde, moderate og store hørselstap. I tillegg til den unike ChannelFree™ signalbehandling, har den også markedets beste feedback-behandler

Acriva 9 NR m/M-lydgiver
Bestillingsnr.:1010103

Acriva 9 NR m/P-lydgiver
Bestillingsnr.:1010103



Acriva 9 Compact Power BTE

Acriva 9 Compact Power BTE er en ørehenger som passer til milde, moderate og store hørselstap. I tillegg til den unike ChannelFree™

Acriva 9 CP
Bestillingsnr.:1102001



Acriva 9 Compact Power Plus

Acriva 9 Compact Power Plus BTE er en ørehenger som passer til moderate og store hørselstap. I tillegg til den unike ChannelFree™ signalbehandling, har den også markedets beste feedback-beandler

Acriva 9 CP x
Bestillingsnr.:1102001



Acriva 9 ITCD

Acriva 9 ITCD er et i-øret-apparat som passer til milde og moderate hørselstap. I tillegg til den unike ChannelFree™ signalbehandling, har den også markedets beste feedback-beandler som fjerner feedback

Acriva 9 ITCD
Bestillingsnr.:1102202



Acriva 9 ITC

Acriva 9 ITC er et i-øret-apparat som passer til milde og moderate hørselstap. I tillegg til den unike ChannelFree™ signalbehandling, har den også markedets beste feedback-beandler som fjerner feedback

Acriva 9 ITC
Bestillingsnr.:1102202



Acriva 9 CIC

Acriva 9 CIC er et i-øret-apparat som passer til milde og moderate hørselstap. I tillegg til den unike ChannelFree™ signalbehandling, har den også markedets beste feedback-beandler som fjerner feedback

Acriva 9 CIC
Bestillingsnr.:1102005



Tilleggsutstyr

SoundGate 2

SoundGate 2 er en kommunikasjonsenhet som gjør det mulig for høreapparatene å koble seg trådløst til eksterne enheter som mobiltelefon, mp3-spillere, GPS, PC osv via Bluetooth. SoundGate 2 er

Soundgate 2
Bestillingsnr.:11010130 HMS art. nr.: 196084



TV-adapter 2

TV-adapter 2 benytter Bluetooth® teknologi for å overføre TV-lyden trådløst til SoundGate 2 og høreapparatene dine.

TV-Adapter 2
Bestillingsnr.:1101241 HMS art. nr.: 198516



Audiosko til Acriva CP og CPx

FM5 adapter: Kun FM-systemer

DAI5 adapter: For tilkoping til mp3, TV, PC etc. via audiokabel.

FM5 adapter
Bestillingsnr.:1101243
DAI5 adapter
Bestillingsnr.:1101244



Fjernkontroll RC-P

Alle Acriva-modellene unntatt CIC og ITC kan betjenes med Bernafons elegante fjernkontroll. Via denne kan brukeren bytte program, justere lydstyrken og mute høreapparatene.

Fjernkontroll RC-P
Bestillingsnr.:1101302



Telefonadapter 2

Telefonadapter 2 benytter Bluetooth® teknologi for å overføre lyden trådløst fra din fasttelefon til SoundGate 2 og høreapparatene dine.

Telefonadapter 2
Bestillingsnr.:11010131 HMS art. nr.: 196085



Telefonkonverter

Muliggjør bruk av Telefonadapter 2 til digitale telefoner. Ønsker du å benytte Telefonadapter 2 til en digital telefon må du benytte Telefonkonverter i tillegg.

Telefonkonverter
Bestillingsnr.:1101244 HMS art. nr.: 198517







Hørselsteknisk



Ringte telefonen? Har du problemer med å høre TV-lyden?

For mange med hørselstap/høreapparat kan våre hjelpe midler være til stor hjelp for å mestre hverdagen.

Vi har et meget bredt utvalg av hjelpe midler både til bruk i hjemmet og i de offentlige rom, for eksempel på skoler, arbeidsplasser, i teatre, kirker, møterom, konferanselokaler m.m.

Vi representerer noen av Europas største leverandører på dette området.

Lytting IR/FM

Swing IR Toslink:

Tekniske data SPDIF:

- IEC60958 (tidligere IEC958) Digital Audio Interface standards
- JEITA CPR – 1205 (tidligere ElJA CP – 1201, CP – 340)
- AES3
- EBU tech 3250
- Max sampling rate 96kHz

Swing IR Toslink

- Man kan alltid koble til Swing til SPDIF -optisk utgang (trenger ikke optisk/analog adapter)
- Optisk utgang er lys (ikke spenning som analog utgang) og sender vil ikke gå i «dvalemodus» slik den kan gjøre ved lavt nivå på analog utgang
- Følsomheten på analog tilkobling er endret fra 30 mV til 7 mV slik at Swing ikke vil gå i «dvalemodus» selv ved lave nivåer på analogt signal når analog inngang benyttes
- Den optiske kabelen som følger med er 1,8 meter slik at det er praktisk å koble til Swing selv om TV henger på veggen
- Strømforsyningen er byttet til en svært driftssikker strømforsyning

Swing IR Toslink
Bestillingsnr.:1104272 HMS art. nr.: 189217



Swing IR bøylemottaker

Swing IR bøylemottaker kan benyttes av brukere uten høreapparat, av brukere med høreapparat uten telespole og brukere av høreapparat som ikke ønsker å benytte høreapparat i bestemte situasjoner. Den er lett, har bass-/diskantkontroll samt balansekontroll. Den leveres med 1 stk batteri samt ekstra sett med ørepropper.

Bestillingsnr.:1104273 HMS art. nr.: 189218



Swing IR halsslyngemottaker

Swing IR halsslyngemottaker benyttes primært av høreapparatusbrukere som har apparat med telespole men kan også benyttes av brukere med høreapparat uten telespole og høreapparatusbrukere som ikke ønsker å benytte høreapparat i bestemte situasjoner.

Bestillingsnr.:1104274 HMS art. nr.: 189219



Lytting IR/FM

RadioLight FM bøylemottaker

Dette er et system fra Humanteknik som gir en sterk og god lyd. Trådløs overføring av lyd fra radio og TV til en liten og lett bøylemottaker med anatomiske høreplugger. Mottakeren er lett, har stilfullt design og skrur seg på når den henges i øret. Ørepluggene som benyttes er nyutviklet og sitter godt i øret og tetter for annen støy i rommet. Systemet settes på radio- eller TV-apparatet og tilkoples lydutgangen og 230V/50 Hz. Bøylemottakeren står da til lading klar til bruk. Brukstid ca. 3,5 timer mellom hver lading. Rekkevidde ca. 80 m, ikke romavhengig, dvs. kan lytte i hele boligen.

FM-sender RadioLight DIR/LR

Bestillingsnr.:1104985 HMS art. nr.: 135140

FM-mottaker RadioLight DIR bøyle

Bestillingsnr.:1104980 HMS art. nr.: 135139



RadioLight FM halsslyngemottaker

Komplett system med sender og halsslyngemottaker for de som vil benytte høreapparatet som forsterker. Sett høreapparatet i stilling T-spole. Trådløs overføring av lyd fra radio og TV til en liten og lett halsslyngemottaker.

Systemet settes på radio- eller TV-apparatet og tilkoples lydutgangen og 230V/50 Hz. Bøylemottakeren står da til lading klar til bruk. Brukstid ca. 3,5 timer mellom hver lading. Rekkevidde ca. 80 m.

FM-sender RadioLight DIR/LR

Bestillingsnr.:1104985 HMS art. nr.: 135140

FM-mottaker RadioLight LR halsslynge

Bestillingsnr.:1104740 HMS art. nr.: 025526



Swing Digital

Følgende fordeler har man med Swing Digital Toslink:

- Man kan alltid koble til Swing til SPDIF-optisk utgang (trenger ikke optisk/analog adapter)
- Optisk utgang er lys (ikke spenning som analog utgang) og sender vil ikke gå i «dvalemodus» slik den kan gjøre ved for lavt nivå på analog utgang
- Følsomheten på analog tilkobling er endret fra 30 mV til 7 mV slik at Swing ikke vil gå i «dvalemodus» selv ved lave nivåer på analogt signal når analog inngang benyttes
- Den optiske kabelen som følger med er 1,8 meter slik at det er praktisk å

Swing Digital Sender

Bestillingsnr.:1104282 HMS art. nr.: 189223

Bøyle

Bestillingsnr.:1104283 HMS art. nr.: 189224

Halsslyne

Bestillingsnr.:1104284 HMS art. nr.: 189225



InfraLight bøylemottaker/ halsslynge

Dette er et system fra Humanteknik med en sterk og god lyd. Mottakeren er lettere og har bedre design enn tidligere utgaver. Ørepluggene som benyttes sitter også bedre. Komplett system med sender og bøylemottaker. Trådløs overføring av lyd fra radio og TV til en liten og lett bøylemottaker med anatomiske høreplugger. Pluggene er nyutviklet og tetter for annen støy i rommet. Systemet settes på radio- eller TV-apparatet og tilkoples lydutgangen og 230V/50 Hz. Bøylemottakeren står da til lading klar til bruk. Brukstid ca. 4,5 timer mellom hver lading. Rekkevidde ca.12 m. Romavhengig på grunn av IR-overføring.

IR-sender InfraLight DIR/LR

Bestillingsnr.:1104970 HMS art. nr.: 135146

IR-mottaker InfraLight DIR bøyle

Bestillingsnr.:1104965 HMS art. nr.: 148455

IR-mottaker InfraLight LR halsslynge

Bestillingsnr.:1104750 HMS art. nr.: 020220



Lytting IR/FM - tilbehør

Optisk adapter

Vi har nå tatt inn en optisk adapter i vårt sortiment. Adapteren benyttes i tilfellene hvor en ønsker å koble teleslynge, IR- eller FM-anlegg til en TV hvor det kun er optisk/digital lydutgang.

Bestillingsnr.:1104213 HMS art. nr.: 178918



Batteri til InfraLight og RadioLight

Oppladbart NIMA batteri til InfraLight, RadioLight og LPU-1. Batteriene kan lades ca. 500 ganger før de bør byttes.

Bestillingsnr.:1104929 HMS art. nr.: 020783



Propper og hygienesett

Silikonpropper og hygienesett til InfraLight, RadioLight og LPU-1. Byttes ved behov.

Pk. á 4 stk.

Bestillingsnr.:1104769

Pk. á 48 stk.

Bestillingsnr.:1104768

Hygienesett m/renseservietter og 2 propper

Bestillingsnr.:1104767



Batteri til Swing IR og Swing Digital

Bestillingsnr.:1104930 HMS art. nr.: 194948



Samtaleforsterkere og personlig FM-system

CM-1 - personlig FM-system

Komplett mobilt FM-system med mange bruksområder består av:

- CM sender med mikrofoner, rekkevidde ca.30 m
- CM mottaker med halsslynge
- beskyttelsesveske
- 2 ladestasjoner
- oppladbare batterier
- audiokabel

Kan benyttes med headset/hodetelefon.

CM-1 komplett FM-system

Bestillingsnr.:1104956 HMS art. nr.: 148430

CM-1 mottaker

Bestillingsnr.:1104950 HMS art. nr.: 135110

CM-1 sender

Bestillingsnr.:1104955 HMS art. nr.: 135064



Crescendo 50 samtaleforsterker

Samtaleforsterker med innebygd mikrofon for forsterkning av lyd der hvor det er vanskelig å høre. Store knapper for volum- og tonekontroll og lav vekt, gjør den praktisk i bruk. Innebygd telespole for bruk der teleslynger er installert. Diskrete hodetelefoner som henger under halsen er inkludert.

Det er mulig å bruke andre hodetelefoner eller halsslynge. Alternative mikrofoner kan enkelt tilkopes.

Bestillingsnr.:1104940 HMS art. nr.: 020223



Telefoni

Telefon Flashtel Comfort 2

Moderne telefon av god kvalitet, med blitzlys og akustisk signal. Høytalende med kraftig lyd. Innstillbar lydstyrke (+30dB) og tone. Telespole for høreapparat. Med display for visning av nummer.

Bestillingsnr.:1104915 HMS art. nr.: 135272



Telefon CL1400

CL1400 er en telefon med store taster og innebygd kraftig teleslyng. Utviklet for eldre, høreapparatzBrukere og svaksynte. Telefonbok, display, nummertilhørighet, innebygd lysisignal og innstilbart ringesignal.

CL1400 med innebygd teleslyng

Bestillingsnr.:1104901 HMS art. nr.: 135274

Vibrator for indikering av ringesignal

Bestillingsnr.:1104455 HMS art. nr.: 136147



Telefon Flashtel Eco

Moderne telefon med god kvalitet, blitzlys og akustisk signal. Høytalende med kraftig lyd. Innstillbar lydstyrke (+ 30dB) og tone. Telespole for høreapparat.

Bestillingsnr.:1104910 HMS art. nr.: 135280



Telefon Freetel II/ III BT

Trådløs telefon i moderne design. Telefonen leveres enten komplett m/basestasjon og lader eller kun som håndsett m/lader. Håndsettet lades automatisk når det settes i basestasjon/ladestasjon. Begge variantene leveres med haisslyng PL100.

EGENSKAPER

- Innstilbar lyd og tone; mulighet for ekstra høy lydstyrke
- Håndsettet blinker når noen ringer
- Display for visning av nummer
- Radiosender skrus av når håndsettet settes i basen

Bestillingsnr.:1104905 HMS art. nr.: 135270



Telefoni

Telefonforsterker PL51

Dette er en prisenkostig telefonforsterker med volum- og tonekontroll. Tilkoples enkelt mellom telefonrøret og telefonapparatet og gir økt lydnivå i telefonrøret. Passer til alle telefoner.

Bestillingsnr.:1104900 HMS art. nr.: 135282



TA-2 Telefonforsterker

TA-2 er en moderne og pålitelig telefonforsterker.

Bestillingsnr.:1104899 HMS art. nr.: 020210



UniVox teleslyngeforsterkere

PLS-X1

PLS-X1, X3 og X5 er markedets mest effektive teleslyngeforsterkere for profesjonelt bruk. Forsterkerne er kun én høydeenhethøy og $\frac{1}{2}$ breddeenhethet bred, hvilket muliggjør montering av 2 stk teleslyngeforsterkere i en eneste 19» rackplass. PLS-X serien benytter en elektronisk transformator med hele 90 % effektivitet. Energitapet i en konvensjonell transformator er sammenligningsvis 8-9 ganger høyere. PLS-X gir en veldig god og klar lyd.

PLS-X1

Bestillingsnr.:1104342 HMS art. nr.: 201687



PLS-X5

Forsterkerne er kun én høydeenhethøy og $\frac{1}{2}$ breddeenhethet bred, hvilket muliggjør montering av 2 stk teleslyngeforsterkere i en eneste 19» rackplass. PLS-X serien benytter en elektronisk transformator med hele 90 % effektivitet. Energitapet i en konvensjonell transformator er sammenligningsvis 8-9 ganger høyere. PLS-X gir en veldig god og klar lyd.

X5

Bestillingsnr.:1104346



PLS-X3

Forsterkerne er kun én høydeenhethøy og $\frac{1}{2}$ breddeenhethet bred, hvilket muliggjør montering av 2 stk teleslyngeforsterkere i en eneste 19» rackplass. PLS-X serien benytter en elektronisk transformator med hele 90 % effektivitet. Energitapet i en konvensjonell transformator er sammenligningsvis 8-9 ganger høyere. PLS-X gir en veldig god og klar lyd.

X3

Bestillingsnr.:1104344



UniVox PLS-300

UniVox PLS serien er produsert spesielt med tanke på profesjonelt bruk. Med programmerbare XLR-inganger og kortslutningssikre utganger er dette med på å gi en meget driftsikker og stabil forsterker. Den innebygde to-stegs AGC-kontrolleren og regulerende utgangs-AGC gir en meget stabil og klar lyd. Med den innebygde monitor utgangen kan du lytte direkte på signalet som går ut på slyngen.

UniVox PLS oppfyller IEC, Britisk Standard og NHH's kravspesifikasjoner for teleslyngeforsterkere. UniVox PLS-300 dekker opp til 300 m² i henhold til IEC 60118-4 normen.

Bestillingsnr.:1104360 HMS art. nr.: 135030



UniVox teleslyngeforsterkere

UniVox PLS-700

UniVox PLS 700 er produsert spesielt med tanke på profesjonelt bruk. Med programmerbare XLR-innganger og kortslutningssikre utganger er dette med på å gi en meget driftssikker og stabil forsterker. Den innebygde to-stegs AGC-kontrolleren og regulerende utgangs-AGC gir en meget stabil og klar lyd. Med den innebygde monitorutgangen kan du lytte direkte på signalet som går ut på slyngen. UniVox PLS oppfyller IEC, Britisk Standard og NNH sine kravspesifikasjoner for teleslyngeforsterkere. UniVox PLS 700 kan levere opp til 40 A som gjør den til en avansert og kraftfull forsterker som dekker slynger fra 150 - 650 m² i henhold til IEC 60118-4 normen.

Bestillingsnr.:1104050



UniVox PLS-900

UniVox PLS-serien er produsert spesielt med tanke på profesjonelt bruk. Med programmerbare XLR-innganger og kortslutningssikre utganger er dette med på å gi en meget driftssikker og stabil forsterker. Den innebygde to-stegs AGC-kontrolleren og regulerende utgangs-AGC gir en meget stabil og klar lyd. Med den innebygde monitor utgangen kan du lytte direkte på signalet som går ut på slyngen. UniVox PLS oppfyller IEC, Britisk Standard og NNH sine kravspesifikasjoner for teleslyngeforsterkere. UniVox PLS-900 dekker opp til 900 m² i henhold til IEC 60118-4 normen.

UniVox PLS oppfyller IEC, Britisk Standard og NNH's kravspesifika-sjoner for teleslyngeforsterkere. UniVox PLS-900 dekker opp til 900 m² i henhold til IEC 60118-4 normen.

Bestillingsnr.:1104060



UniVox SLS-100 XF

Denne 2. generasjons UniVox SLS-system bygger fortsatt på to separate slyngkonfigurasjoner, men bygges nå til en 19" rackenhet med matchede sluttsteg. Mindre forvrengning og ytterligere 20V utspenning forbedrer dynamikken vesentlig, spesielt i diskantområdet (over 10kHz!). En annen nyhet er SCART inn/ut med innebygd automatisk scartomkopler. Resultatet blir en slynge i HiFi-klasse!

UniVox SLS-100 XF er utmerket ved nybygging/ombygging av teatre, kinoer, konferanseanlegg, skoler m.m. UniVox SLS oppfyller IEC 60118-4 normen.

Bestillingsnr.:1104355 HMS art. nr.: 135016



UniVox SLS-300 XF

Denne 2. generasjons UniVox SLS-system bygger fortsatt på to separate slyngkonfigurasjoner, men bygges nå til en 19" rackenhet med matchede sluttsteg. Mindre forvrengning og ytterligere 20V utspenning forbedrer dynamikken vesentlig, spesielt i diskantområdet (over 10kHz!). En annen nyhet er SCART inn/ut med innebygd automatisk scartomkopler. Resultatet blir en slynge i HiFi-klasse!

UniVox SLS-300 XF er utmerket ved nybygging/ombygging av teatre, kinoer, konferanseanlegg, skoler m.m. UniVox SLS oppfyller IEC 60118-4 normen.

Bestillingsnr.:1104365 HMS art. nr.: 135001



UniVox teleslyngeforsterkere

UniVox SLS-700

SLS-700 og SLS-900 består av to PLS teleslyngeforsterkere som er sammenkoplet og hvor den ene fungerer som master med innebygd 90 grader faseforsyningsfilter og den andre er en slaveforsterker. SLS-systemet reduserer overhøringen til det minimale. Hvis det er fare for metallpåvirkning, blir denne redusert. Du vil ikke oppleve demping i midtre felt og ingen diskantdemping. SLS-systemet er utviklet for bygg med flere rom som ligger ved siden av hverandre, for eksempel i kinoer, hoteller, skoler, kulturhus osv. UniVox SLS-700 dekker et område på inntil 650 m² og SLS-900 inntil 900 m² i henhold til IEC 60118-4 normen.

UniVox SLS-700
Bestillingsnr.:1104340

UniVox SLS-900
Bestillingsnr.:1104341



UniVox DLS-30


Dette er en liten, enkel og komplett slyngeforsterker for bruk sammen med TV. DLS-30 inneholder automatisk scartomkopler som enkelt kan koples til scartkontakten på et TV-apparat. Dette gjør at lyden som kommer fra TV-en automatisk kommer ut på teleslyngen.

Hvis du starter DVD-spiller, videospiller e.l., vil DLS-30 automatisk sende denne lyden ut på teleslyngen. Slyngen har indikator for tilkoplet spennin og slyng. Synkroniseringsenhet for å synkronisere lyd og bilde ved bruk av hørselsteknisk utstyr: Best.nr. 1104212

Univox DLS-30
Bestillingsnr.:1104352 HMS art. nr.: 148418

Sofaslynge, 8 m
Bestillingsnr.:1104157

Romslynge, 20 m
Bestillingsnr.:1104158

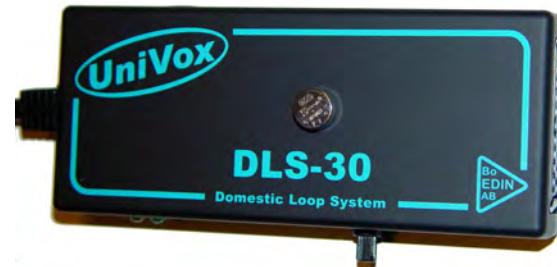

Univox DLS-50

En brukervennlig teleslyngeforsterker som kan benyttes til flere formål. Romslynge opp til 35 m². Kan benyttes som forsterker for hodetelefoner. Tilpasset de fleste typer innganger (radio, TV, tape, mikrofon, scart). Kan også benyttes i bil, buss og på hytta med 12V anlegg. Mulighet for å drive 2 stolslynger (puteslynger).

Stolslynge/puteslynge
Bestillingsnr.: 1104144

Univox DLS-50
Bestillingsnr.:1104105 HMS art. nr.: 020308

Sofaslynge, 8 m
Bestillingsnr.:1104170

Romslynge, 20 m
Bestillingsnr.:1104171



UniVox CLS-5

Miljøprioritert teleslyngeforsterker for flatskjerm TV, med innebygd lip-synk (tidsforsinkelse). UniVox® CLS-5 er en helt ny generasjon teleslyngeforsterkere som er utstyrt med mange nye funksjoner som er nødvendige for dagens moderne TV-apparater. Brukervennlighet er prioritert med full-spektrum indikering for bedre oppfattelse uansett hørselshemming. Ny to-trinns AGC og lydkontroll for metalltap gir den aller beste taleoppfattelse og lyttekomfort. TV-funksjonene som er nødvendige for dagens TV-er allerede innebygde og lydkvaliteten er sterkt forbedret takket være den elektroniske transformatoren som eliminerer modulasjonsbrumming ved høyt effektuttak.

CLS-5
Bestillingsnr.:1104113 HMS art. nr.: 160765



UniVox teleslyngeforsterkere

UniVox AC/DC-100

Teleslyngeforsterker til heiser og busser for AC-drift med støtte for DC-backup. UniVox® AC/DC-100 er en svært effektiv og kompakt teleslyngeforsterker av profesjonell kvalitet som passer til bruk i heiser og busser. AC/DC-100 gir en veldig høy utstrøm og spennning for å kompensere for den store mengden av metallpåvirkning som forekommer i heiser og busser. AC/DC-100 er en pålitelig forsterker med store sikkerhetsmarginer. Denne smarte forsterkeren er enkel i bruk og kan koples samtidig til både 230-240V AC og 12-36V DC. Hvis spenningen blir borte, veksler den automatisk mellom AC- og DC-drift.

Bestillingsnr.:1104351



UniVox skrankeslynge CTC

Når er det både enklere å velge og billig og lett å montere skrankeslynge. Har du kunder som har vanskelig for å høre deg? Monter en skrankeslynge så høreapparatbrukerne kan høre deg. Pakkene er komplette med teleslyngeforsterker, mikrofon og teleslyngepute. Monteres raskt og forskriftsmessig av en teleslyngeinstallatør.

DEN SKRANKESLYNGEPAKKEN SOM ER MEST BRUKT ER:

Skrankeslynge og svanehalsmikrofon
Bestillingsnr.: 1104380.

Skrankeslyngepakke, inkl. skrankeslynge og veggmikrofon
Bestillingsnr.:1104381

Skrankeslyngepakke, kraftig - inkl. veggmikrofon og puteslynge
Bestillingsnr.:1104382

Skrankeslyngepakke, kraftig - inkl. svanehalsmikrofon og puteslynge
Bestillingsnr.:1104383



UniVox P-LooP 2.0 - portabel teleslyngekoffert

Portabel teleslyngekoffert med hjul og teleskophåndtak for enkel transport. Teleslyngekofferten inneholder alt du trenger for raskt og enkelt å sette opp en teleslynge med mange muligheter. Den kommer med teleslyngekabel på trommel i tillegg til ekstra skjøtekabel slik at den dekker rom på opp til 150 m². Tester er også inkludert slik at nivå og lyd kan stilles inn og verifiseres av personer som ikke bruker høreapparat eller som har høreapparat uten T-funksjon. Programmerbare innganger gjør det mulig å koble til både mikrofoner og annet lydutstyr med linjeutgang. Utgang for tilkobling til annet lydutstyr som forsterkere og aktive høyttalere for å kunne høre samme lyd uten høreapparat.

*Teleslyngekoffert med FM håndmikrofon og headsetmikrofon
Bestillingsnr.:1104180

Teleslyngekoffert

Kofferten er utstyrt med innebygget trådløst mikrofonsystem for ytterligere forenkling av bruken, både håndholdt- og hodebøylemikrofon. Trådløse høyttalere fra Okayo passer sammen med dette utstyret og gjør det enda mer brukervennlig.

- Koffert m/hjul og teleskophåndtak / 2 XLR-inng. for mikrofon/linje
- LED-indikering av nett, innsignal og teleslyngestrom
- Automatisk sikring / Høy strøm på teleslyngen / Kortslutningssikker
- Mulighet for innebygde trådløse mikrofoner (anbefales).

HMS art. nr.: 134997



UniVox teleslyngeforsterkere

Feltstyrkemåler FSM 2.0 LCD

UniVox® FSM 2.0 LCD er en feltstyrkemåler med helt unike egenskaper og funksjoner. Den har en mikroprosessor som gjør at det blir enkelt å foreta avanserte målinger av teleslynger. Tydelig LCD-skjerm, hold-funksjon og automatisk endring av måleområde.

FSM 2.0 LCD oppfyller de nyeste kravene i hht IEC 60118-4 og måler brus helt ned til -52dB. Teleslyngen er ikke montert før den er sertifisert i henhold til IEC 60118-4 normen. Bruk feltstyrkemåleren sammen med UniVox DLS, PLS og SLS teleslynger for best mulig sluttresultat.

Bestillingsnr.:1104124 HMS art. nr.: 135934



Teleslyngemerking

Følgende etiketter/plakat kan bestilles hos Gewa:

- Teleslyngesplakat i plast str. 18 x 24 cm m/4 hull
- Teleslynges-etikett i storrelse 9 x 12 cm.
- 2 skranke-etiketter (1 beregnet til utsiden og 1 til innside skranke)
- Aluminiumsplakett str. 9 x 12 cm m/dobbeltsidig tape

Aluminiumsplakett beregnet til å festes på utsiden av skranken.
Bestillingsnr.: 1104111

Teleslyngesplakat

Bestillingsnr.:1104300

2 skranke-etiketter

Bestillingsnr.:1104015

Teleslynges-etikett

Bestillingsnr.:1104010



Listener - kontrollinstrument for teleslynger

UniVox Listener er en enkel og god mottaker for teleslynge. Brukes som testinstrument og som slyngemottaker. Den er perfekt for alle som ønsker å vite om teleslyngen virker og om nivået er slik det skal være.

BRUKSMÅTE

Benytt en standard høretelefon og juster volumkontrollen til et behagelig lydnivå. Lysdioden i toppen lyser grønt når teleslyngen er god og innenfor standard. Ved gult lys er det lyd, men normen ikke oppfylt. Lyser det ikke, er teleslyngen ute av drift. Ved montering kan denne brukes i tillegg til feltstyrkemåler FSM for å teste slyngen.

Listener kontrollinstrument

Bestillingsnr.:1104130 HMS art. nr.: 136016

Hodetelefon

Bestillingsnr.:1104131 HMS art. nr.: 136209



LPU-1 teleslynge bøylemottaker

Brukervennlig hjelpemiddel for å lytte til lyd formidlet via teleslynge. Dette hjelpemiddlet er spesielt egnet for deg som hører dårlig, men ikke har høreapparat eller telespole (T) i høreapparatet. Da kan du allikevel høre det som blir formidlet i kirken, på kino, teater eller andre steder hvor det er montert teleslynge. Plasser LPU-1 i ørene, juster lyden og du hører klart og tydelig. Tilleggsutstyr som ladestasjon for 12 batterier samt oppbevaringsdeksel til 6 stk. LPU-1, gjør den til et praktisk hjelpemiddel å låne ut i forsamlingslokaler o.l. Det eneste kravet er som sagt at det må være montert teleslynge.

LPU-1 teleslynges bøylemottaker

Bestillingsnr.:1104716 HMS art. nr.: 135162

Ladestasjon til LPU-1

Bestillingsnr.:1104717 HMS art. nr.: 135115

Ladestasjon til 12 batterier

Bestillingsnr.:1104931 HMS art. nr.: 135981



UniVox teleslyngeforsterkere

Skolesystem LITE

1 stk GPA 660BW2

1 stk Lommesender EJ7-XT

1 stk Mikrofon HM-50C

1 stk Mikrofon EJ-701TM

1 stk Lader HDC 702

LITE



Skolesystem MEDIUM

2 stk GPA 660BW2

1 stk Lommesender EJ7-XT

1 stk Mikrofon HM-50C

5 stk Mikrofon EJ-501TM Push-To-Talk

3 stk Lader HDC 502

MEDIUM



Skolesystem STOR

2 stk GPA 660BW2

1 stk Lommesender EJ7-XT

1 stk Mikrofon HM-50C

11 stk Mikrofon EJ-501TM Push-To-Talk

6 stk Lader HDC 502

STOR



UniVox mikrofoner

13C Myggmikrofon

Myggmikrofon med 3,5 Jack plugg eller XLR plugg. Passer alle UniVox DLS (Jack) og PLS/SLS (XLR) teleslyngeforsterkere.

Med 3,5 Jack plugg

Bestillingsnr.:1104143 HMS art. nr.: 136111

Med XLR plugg

Bestillingsnr.:1104143-A HMS art. nr.: 136100



13T Trykksonemikrofon

Bordmikrofon med 3,5 Jack plugg eller XLR plugg. Passer alle UniVox DLS (Jack) og PLS/SLS (XLR) teleslyngeforsterkere.

Med 3,5 Jack plugg

Bestillingsnr.:1104165 HMS art. nr.: 135995

Med XLR plugg

Bestillingsnr.:1104165-A HMS art. nr.: 135989



13A Mikrofon for høyttaler

Mikrofon for høyttaler, 3,5 Jack plugg. Passer alle UniVox DLS teleslyngeforsterkere.

Bestillingsnr.:1104160



Håndholdt mikrofon

JTS NX-9 håndholdt mikrofon uten kabel, med XLR plugg. Passer alle UniVox PLS og SLS teleslyngeforsterkere.

Bestillingsnr.:1104161



M-1 Svanehalsmikrofon

Elektretmikrofon, svanehals med 3,5 Jack plugg eller XLR plugg. Passer alle UniVox DLS (Jack) og PLS/SLS (XLR) teleslyngeforsterkere.

Med 3,5 Jack plugg

Bestillingsnr.:1104140 HMS art. nr.: 021132

Med XLR plugg

Bestillingsnr.:1104140-A HMS art. nr.: 135993



Takmikrofon

JTS CM502 takmikrofon, med XLR plugg. Passer alle UniVox PLS og SLS teleslyngeforsterkere.

Bestillingsnr.:1104173



Kabler og utstyr

Scart-utstyr

Scart2 overgang til 3,5 mm Jack plugg for UniVox DLS-50 og DLS-70.

Autoscart1 automatisk lydvelger for scart med 3,5 mm Jack plugg til UniVox DLS-50 og DLS-70.

Audioscart1 automatisk lydvelger for scart med batteri og 3,5 mm Jack plugg.

Autoscart3 automatisk lydvelger for scart med XLR

Scart2

Bestillingsnr.:1104147 HMS art. nr.: 136217

Autoscart1

Bestillingsnr.:1104151 HMS art. nr.: 136075

Audioscart1

Bestillingsnr.:1104156 HMS art. nr.: 136079



Lydkabler XLR

Lydkabel XLR, 1,5 m

Bestillingsnr.:1104220

Lydkabel XLR, 5 m

Bestillingsnr.:1104221

Lydkabel XLR (HAN - HUN), 10 m

Bestillingsnr.:1104225



Foliekabler

Foliekabel for legging i gulv

25 mm bred og kun 0,25 mm tykk.

Foliekabel for legging i gulv

12,5 mm bred og kun 0,25 mm tykk.

SLS + foliekable gir det beste resultatet!

Foliekabel, 25 mm

Bestillingsnr.:1104230

Foliekabel, 12,5 mm

Bestillingsnr.:1104231



Tilkoplingsbokser

Synkroniseringenheten brukes til å synkronisere lyd og bilde ved bruk av hørselsteknisk utstyr.

Digital til analog adapter benyttes for TV-er uten analog utgang.

TV Sync

Bestillingsnr.:1104212

Analog adapter

Bestillingsnr.:1104213



Okayo trådløst FM-system

Lommesender EJ-7XT

Lommesender, 16 kanaler, for tilkopling av ekstern mikrofon (se under Okayo tilbehør). Benytter vanlige batterier, alkaliske eller oppladbare.

Passer til alle mottakerne i Okayo II systemet, diversitymottakere, høyttalere og lommemottakere (Guidesystemet).

Bestillingsnr.:1104513 HMS art. nr.: 160958



Lommemottaker EJ-7R (Guidesystem)

Mottaker med mulighet for tilkopling av headset eller halsslyngje. Benyttes sammen med lommesender, håndsender og bordsender.

Bestillingsnr.:1104501 HMS art. nr.: 135123



Stasjonær sender EJ-770T

Stasjonær sender som sender lyden fra lydkilde til enhetene i Okayo II systemet. Benyttes for å øke rekkevidde, ved mange mikrofoner eller som del av et oversetttersystem.

Bestillingsnr.:1106027 HMS art. nr.: 135067



FM-mottaker EJ-701DR

Diversity mottaker for bruk der lydkvalitet og stabilitet på mottak er viktig. 1 mottaker for 1 mikrofon/sender. Koples til lydanlegg eller teleslynge.

Bestillingsnr.:1106000 HMS art. nr.: 160957



Okayo trådløst FM-system

Mottaker EJ-702DR

Diversity mottaker for bruk der lydkvalitet og stabilitet på mottak er viktig. 2 mottakere for 2 mikrofoner. Koples til lydanlegg eller teleslynge.



Bestillingsnr.:1106010 HMS art. nr.: 160959

Håndmikrofon EJ-701TM og EJ-501TM

Håndholdt trådløs mikrofon, som benytter vanlige batterier, alkaliske eller oppladbare. Passer til alle mottakerne i Okayo II systemet, diversitymottakere, høyttalere og lommemottakere (Guidesystemet).

EJ-501TM er en "Push and talk" (trykk og snakk) mikrofon



EJ-701TM

Bestillingsnr.:1104521 HMS art. nr.: 135118

EJ-501TM

Bestillingsnr.:1104522

Høyttaler GPA-500W-1

Trådløs, bærbar, oppladbar høyttaler med innebygd forsterker. Mottaker for 1 mikrofon/sender.

Kompatibel med alle Okayo II sendere og teleslyngekofferten P-Loop med innebygd trådløst Okayo II system.

Bestillingsnr.:1106021 HMS art. nr.: 160767

Høyttaler GPA-500W-2

Trådløs, bærbar og oppladbar høyttaler med innebygd forsterker. 2 mottakere for 2 mikrofoner/sendere.

Kompatibel med alle Okayo II sendere og teleslyngekofferten P-Loop med innebygd trådløst Okayo II system.

Bestillingsnr.:1106029 HMS art. nr.: 135041



Okayo trådløst FM-system

Høyttaler/mottaker GPA-660BW2

Trådløs, oppladbar og bærbar høyttaler med innebygd 2-kanals mottaker for 2 mikrofoner/sendere. I tillegg har den Bluetooth (Blåtann) tilkobling, noe som gjør det enkelt å koble til mobiltelefon (musikkavspilling), PC, eller andre kilder med Bluetooth (Blåtann).

GPA-660BW2 er kompatibel med alle Okayo II sendere og teleslyngekofferten (P-loop) med innebygd trådløst Okayo II system.

Høyttaler/mottaker GPA-660BW2
Bestillingsnr.:1106022



Okayo tilbehør

Headsetmikrofon HM-50C

Robust headsetmikrofon for EJ-7XT.

**Bestillingsnr.:1106032 HMS art. nr.:
136032**



Pluggmikrofon

Pluggmikrofon gjør EJ-7XT til en håndholdt mikrofon.

**Bestillingsnr.:1104596 HMS art. nr.:
136046**



Kinnmikrofon HM-60C

Hudfarget kinnmikrofon til EJ-7XT.

**Bestillingsnr.:1106008 HMS art. nr.:
135965**



Myggmikrofon LM-90C

Myggmikrofon med klype for lommesender EJ-7XT.

**Bestillingsnr.:1106031 HMS art. nr.:
136086**



Konferanse mikrofon

Konferanse mikrofon med magnetisk holder for lommesender EJ-7XT.

Bestillingsnr.:1106034



Ladestasjoner

Dette er ladestasjoner for lommesendere og lommemottakere.

HDC-707: Ladestasjon for 2 stk.

Bestillingsnr.:1104616

HDC-712: Ladestasjon for 12 stk.

Bestillingsnr.:1104621

HDC-736: Ladestasjon for 36 stk.

Bestillingsnr.:1104622



Mikrofonstativer

Vi har flere typer mikrofonstativer.

3-bens bordstav til håndholdt mikrofon

**Bestillingsnr.:1104142-B HMS art. nr.:
136225**

Bordstav med rund fot til håndholdt mikrofon

**Bestillingsnr.:1104142-C HMS art. nr.:
136178**

Gulvstav med galge til håndholdt mikrofon

**Bestillingsnr.:1104650 HMS art. nr.:
136088**



Høyttalerstativ

Bestillingsnr.:1104565



Halsslynge

Bestillingsnr.:1104605



Infrarødt konferansesystem

IR-system PRO IR-200

IR-basert lydoverføringsystem med modulator og sender i én enhet. Sender på 2 kanaler i 2.3/2.8Mhz. Det kan velges stereo, mono med økt sendekapasitet eller 2 språk. Opp til ca. 200 m² med 1 sender, kan utvides med flere sendere for økt dekning opptil 560 m². Beregnet for mindre møterom, konferanserrom, forsamlingslokaler o.l.

PRO IR-200 modulator og sender
Bestillingsnr.:1104684

PRO IR-201 sender
Bestillingsnr.:1104686



IR-sender WIR TX-9

IR-sender for bruk sammen med MOD-232. Sender på 4 kanaler i 2.3/2.8/3.3/3.8Mhz. Det kan velges stereo, mono med 2 språk med økt sendekapasitet eller 4 språk. Kan utvides med flere sendere for økt dekning. Opp til 2600 m².

Bestillingsnr.:1104683

IR-system WIR TX-90

Modulator og sender i én enhet. IR-basert lydoverføringsystem med modulator og sender i én enhet. Sender på 2 kanaler i 2.3/2.8/3.3/3.8Mhz, det kan velges stereo, mono med økt sendekapasitet eller 2 språk. Opp til 2600 m².

Bestillingsnr.:1104680



IR-modulator MOD 232

IR-modulator, 2 kanaler i 2.3/2.8/3.3/3.8Mhz. Det kan velges stereo, mono med økt sendekapasitet eller 2 språk. Passer sammen med WIR TX-9 og TX-75.

Bestillingsnr.:1104682



Infrarødt konferansesystem

IR-mottaker RX22-4

IR-mottaker med 4 kanaler for 2 språk i stereo eller 4 i mono.
Lommemottaker med 3,5 mm jack plugg og enkel betjening.
Flere IR-detektorer for godt mottak.

Bestillingsnr.:1104864



Halsslynge for RX22-4

Halsslynge tilkobling til RX22-4 for bruk av telespolen (T) i høreapparatet.

Bestillingsnr.:1104866



IR-system WIR TX-925

IR-basert lydoverføringssystem med separat modulator og sender.
Sender på 2 kanaler i 2.3/2.8/3.3/3.8MHz. Det kan velges stereo, mono
med økt sendekapasitet eller 2 språk. Opp til 2600 m². Kan utvides med
WIR TX-9 for økt dekning eller MOD 232 for flere kanaler/språk.

Bestillingsnr.:1104681



IR-mottaker PR-20+

IR-mottaker med 2 kanaler 2.3/2.8MHz for stereo eller 2 språk i mono. Har
telespole (T) for bruk i rom med teleslynge.

Bestillingsnr.:1104869



Infrarødt konferansesystem

IR-mottaker RCI-102

IR-mottaker bøyle med 2 kanaler 2.3/2.8Mhz for stereo eller 2 språk i mono.

Bestillingsnr.:1104685



Ladestasjon RX22-4

Ladestasjon for 12 stk. RX22-4 enheter.

Bestillingsnr.:1104868



Ladere for PR-20+

Ladestasjoner for 1 stk. og 5 stk. PR-20+ enheter.

Ladestasjon for 1 stk.

Bestillingsnr.:1104872

Ladestasjon for 5 stk.

Bestillingsnr.:1104871



Lader for RCI-102

Ladestasjon for 5 stk. RCI-102 enheter.

Bestillingsnr.:1104714



Ladekoffert for RX22-4

Transportkoffert med lader for 12 stk. RX22-4 IR-mottakere.

Bestillingsnr.:1104874



Transportkoffert for 15 stk. RCI-102

Transportkoffert for oppbevaring og transport av 15 stk. bøylemottakere RCI-102.

Bestillingsnr.:1104876



Digitalt kommunikasjonssystem

DigiWave DLT-100 transceiver

Digital sender og mottaker med 99 kanaler i 2,4 GHz båndet. Benyttes til konferanser, oversettelse, guiding, kommunikasjon, samtaleforsterker og avstemmingssystem.

Bestillingsnr.:1104880



Headsetmikrofon MIC-0044P

Headsetmikrofon for DTL-100 transceiver.

Bestillingsnr.:1104882



DigiWave DLR-50 mottaker

Digital mottaker som med 99 kanaler som mottar signaler fra DTL-100.

Bestillingsnr.:1104881



Headset EAR-041

Mini hodetelefoner isolerende for mottaker DLR-50.

Bestillingsnr.:1104883



Digitalt kommunikasjonssystem

Lader CHG 102

Lader for 2 DLT/DLR enheter.

Bestillingsnr.:1104885



Headset EAR-022

Mono hodetelefoner for mottaker DLR-50.

Bestillingsnr.:1104884



Transportveske CCS043

Transportveske for 2 DLT/DLR.

Bestillingsnr.:1104886



Bæreveske CCS045

Bæreveske med stropp og belteklipps for DLT/DLR.

Bestillingsnr.:1104887



Koffert CCS029

Transport og oppbevaringskoffert for 6 DLT/DLR enheter.

Bestillingsnr.:1104888



Koffert CCS030DW

Transport og oppbevaringskoffert for 12 DLT/DLR enheter.

Bestillingsnr.:1104889



GENERELL INFORMASJON OG BETINGELSER

Denne katalogen

Katalogen gir en oversikt over de fleste hjelpe midlene Gewa leverer. Vi kan ikke vise alle detaljer og varianter her. På vår hjemmeside vil du finne mer utførlig informasjon om produktene, samt brukerveiledninger, lenke til produsenter m.m. Ta kontakt dersom du har spørsmål som katalogen eller vår internettlelse ikke gir deg svar på.

www.gewa.no

Vår hjemmeside er under stadig utvikling. Nyheter og endringer som vi ikke har fått med i katalogen, finner du der.

Spesialbrosjyrer

Vi har spesialbrosjyrer på flere av produktene i katalogen. Ta kontakt hvis du ønsker flere opplysninger.

Kursvirksomhet

Gewa driver utstrakt kurs- og opplæringsvirksomhet over hele landet. Det holdes spesialkurs og kombinerte kurs innenfor områdene:

- omgivelseskontroll
- kommunikasjon
- syn
- varsling
- hørselstekniske hjelpe midler
- høreapparater

Miljøavgift

På de fleste produktene av elektronisk eller elektromekanisk art har vi innført 1% miljøavgift. Denne kommer som en egen post på fakturaen.

**Lagervarer**

Alle produkter som er vist i katalogen skal normalt være lagervare.

Skaffevarer

Produkter som ikke er lagerførte, og som derfor må spesialbestilles, kan ikke returneres. Det samme gjelder selvfølgelig for spesialtilpassede produkter.

Ekspedisjonsgebyr

For bestillinger under kr 500,- vil vi fakturere et ekspedisjonsgebyr på kr 50,- dersom ikke annet er avtalt.

Retur

Retur av varer må alltid avtales med oss på forhånd. Ved retur av varer beregnes normalt returkostnader på 15 % av varens verdi.

Salgspant

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av omkostninger er fullt ut betalt.

Betalingsbetingelser

Netto pr. 30 dager.

Leveringsbetingelser

FOB vårt lager Mastemyr dersom ikke annet er avtalt.

Rammeavtaler

Gjeldende rammeavtale for produkter som omfattes av dette.

Leverandør av elektroniske hjelpemedier

www.gewa.no

Gewa AS - Postboks 626 - 1411 Kolbotn
Telefon: 66 99 60 00 - Telefax: 66 80 94 90 - salg@gewa.no