



Bernafoon Alpha
Inspirert av de **beste**

Alpha –
et innblikk




Oppladbart miniRITE T R

bernafoon®
Your hearing • Our passion

Det beste av



Kraftig chip med 16 ganger mer prosessorkraft og 8 ganger mer minne*

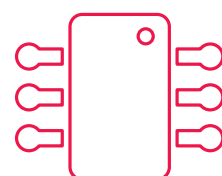


Den mest populære høreapparatmodellen, med høy brukervennlighet og komfort



Neste generasjons tilkobling med flere alternativer for direkte-streaming fra iOS- og Android™ -enheter



Ny Oasis^{nxt} 2020.2 tilpasningssoftware for raskere tilpasninger, bedre target match og økt personalisering

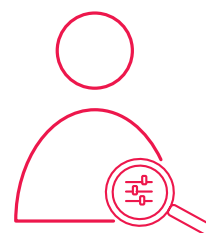

*Sammenlignet med tidligere Bernafon høreapparatgenerasjoner.

Bernafon Alpha

Bernafon Alpha er inspirert av de beste, og er et kraftfullt og smart høreapparat med ny innovativ Hybrid Technology™.

Det første høreapparatet med Hybrid Technology™

For best lydkvalitet uten kompromisser

Fordi to er bedre enn en


Bernafon Alpha slår sammen to signalbehandlingsmetoder for å øke både taleforståelse og lyttekomfort

Å finne den rette balansen

Den revolusjonerende teknologien jobber hver for seg eller sammen, for å fungere best i utallige lyttesituasjoner

For en effektiv hybrid ytelse

Fire hybride behandlingsblokker kombinerer alle to systemer hver som jobber sammen

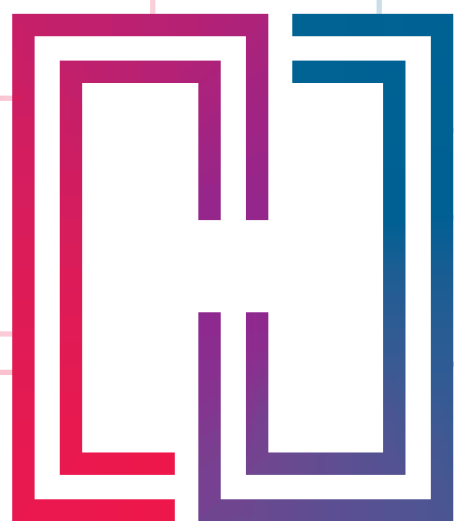

hybrid
technology™

Hybrid hele veien

Hybrid Noise Management™

Smart retningsvirkning er aktiv i 24 individuelle bånd og samhandler med Smart støyreduksjon, optimalisert gjennom maskinlæring.



Renere talesignal samtidig som du bevarer naturlige omgivelseslyder

Selektiv støyreduksjon basert på opptil 36 000 signalestimater per sekund

Hybrid Sound Processing™

To parallelle strategier behandler lyd samtidig i tids- og frekvensdomenene.



Kompromissløs taleforståelse og lyd kvalitet

Presis lydbehandling i sanntid med opptil 48 000 signalestimater per sekund

Hybrid Technology™ i Bernafon Alpha består av fire behandlingsblokker. Hver av dem er en hybrid i seg selv. Flexibiliteten gjør at de kan prestere optimalt i utallige lyttesituasjoner.

Hybrid Balancing™

Talebalanse og Støybalanse finjusterer forsterkningen i nærvær eller fravær av tale.



Balansert taleoppfattelse og lyttekomfort

Personlig forsterkning av lyd etter brukerens preferanser

Hybrid Feedback Cancellor™

To estimatorer eliminerer feedback under statiske og dynamiske forhold med opptil 126 000 målinger per sekund.



Effektiv beskyttelse mot feedback


Superrask og nøyaktig eliminering av feedback innen millisekunder

Allsidige Alpha miniRITE T R



Kontaktløs "plug & play"

-lading – Litium-ion-batteriene fullades på kun 3 timer og gir en hel dags bruk.

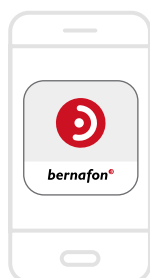

Flere streaming-muligheter – Bernafon Alpha kobles direkte til iOS og Android-enheter* med 2.4 GHz Bluetooth® Low Energy trådløs teknologi.

Made for

iPhone | iPad | iPod

Works with

android



Intuitiv betjening av høreapparatet med en forbedret **EasyControl-A app***



Fleksible og personaliserte

tilpasninger – Bernafon Alpha innehar opp til 24 justeringsbånd og muligheten for fjernjustering. Det nye personlige tilpasningsverktøyet forhåndsinnstiller funksjoner etter brukerens behov og preferanser.

* For informasjon om kompatibilitet, besøk www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity.

Apple, Apple sin logo, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google LLC. Bluetooth®-navnet og logoen er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og bruk av disse er lisensiert til Demant A/S. Andre varemerker og navn er fra de respektive eiere.

Oversikt

	Alpha 9	Alpha 7	Alpha 5
Hybrid Technology™			
Hybrid Sound Processing™	●	●	●
Frekvensbredde	10 kHz	8 kHz	8 kHz
Hybrid Balancing™	●	●	–
Talebalanse	3 valg	2 valg	–
Støybalanse	4 valg	2 valg	–
Hybrid Noise Management™	●	●	●
Smart støyreduksjon	4 valg	4 valg	3 valg
Smart retningsvirkning	●	●	●
Valg Dynamisk	3 valg	2 valg	–
Valg Omni	2 valg	2 valg	–
Hybrid Feedback Canceller™	●	●	●
Tale			
Bass-boost	●	●	●
Frequency Composition ^{next}	●	●	●
Komfort			
Binaural støykoordinering	●	●	–
Reduksjon av impulsstøy	4 valg	3 valg	3 valg
Vindstøy-begrenser	●	●	●
Utvidet dynamikkområde	●	●	–
Reduksjon av svak støy	●	●	●
RETNINGSVIRKNING			
Dynamisk	●	●	●
Adaptive Full Directionality	●	●	●
Fast retningsvirkning	●	●	●
Fast omni	●	●	●
Omni	●	●	●
True Directionality Plus	●	●	–
Individuelle egenskaper			
Personlig tilpasning	●	●	●
Justeringsbånd	24	20	18
Programvalg	14/4	13/4	13/4
Binaural koordinering: VK, programbytte	●	●	●
Automatisk tilvenning	●	●	●
Overgang	4 valg	3 valg	2 valg
Datalogging	●	●	●
Tinnitus SoundSupport	●	●	●

Helt siden 1946 har vi vært lidenskapelig opptatt av å utvikle høreapparater som gir mennesker med nedsatt hørsel muligheten til å glede seg over lytteopplevelser av høy kvalitet. Med sveitsisk kvalitet, teknologi og vårt ønske om personlig service, gjør vi alt vi kan for å tilfredsstille kundenes forventninger. Vårt mål er å kunne tilby våre samarbeidspartnere mer enn de forventer hver dag. Bernafons representanter og ansatte i over 70 land oppfyller vår visjon om å hjelpe hørselshemmede til igjen å kunne kommunisere uten begrensninger.

Sammen gir vi mennesker muligheten til å høre og kommunisere bedre.

For mer informasjon om høreapparater, besøk vår hjemmeside.

Hovedkontor

Sveits

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
info@bernafon.com
www.bernafon.com

SOUND 
OF SWITZERLAND



YouTube

Bernafon Companies

Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • South Africa • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA

www.bernafon.com

Bernafon is part of the Demant Group.

bernafon 
Your hearing • Our passion