



Nyhetsbrev - november 2022

Les om de spennende nyhetene vi nå lanserer i årets siste nyhetsbrev.



Bernafon Alpha ITE på kontrakt!


Etter lanseringene av Bernafon Alpha miniRITE og miniBTE, verdens første høreapparater med Hybrid Technology™, kan vi nå endelig si at Alpha-familien er komplett. **Bernafon Alpha ITE** er tilgjengelig i 5 ulike modeller; **IIC, CIC, ITC, ITE Half Shell og ITE Full Shell**. Alle modellene innehar den revolusjonerende signalbehandlingen Hybrid Sound Processing, som ved å benytte 2 ulike signalbehandlingsmetoder kan behandle tale og støy hver for seg. Dette resulterer i en kraftig forbedring av signal-støyforholdet.

Ved hjelp av nye produksjonsmetoder, er våre Alpha ITE-apparater mindre enn noensinne. Alpha IIC og CIC gir en svært diskret plassering i øregangen, mens Alpha ITC, ITE HS og ITE FS byr på egenskaper som retningsmikrofoner, telespole og direkte-streaming til iOS- og enkelte Android-enheter. Alle modellene er tilgjengelig i 5 ulike farger.

Merk; OasisNXT 2022.2 eller nyere kreves for å kunne tilpasse Bernafon Alpha ITE.



Vedlagt dette nyhetsbrevet finner du en oppdatert prisliste og bestillingsskjema for Alpha ITE.

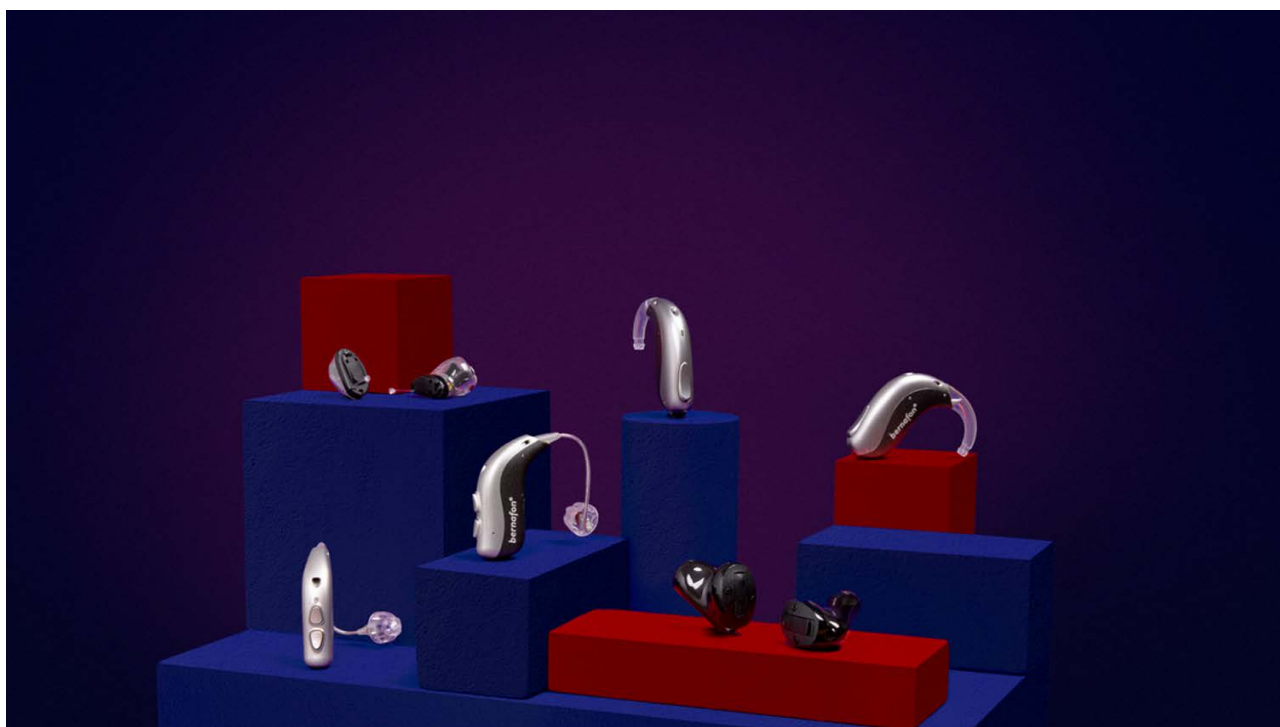

Bernafon Alpha - Sound of Switzerland

Oppdatert hands-free kommunikasjon

Hands-free kommunikasjon er toveis streaming som bruker Bluetooth® Low Energy trådløs teknologi. Med toveis streaming kan brukerne streame telefonsamtalen som før, og i tillegg blir stemmen deres plukket opp av høreapparatets mikrofoner og streamet tilbake til iPhone® eller iPad®.

Med den siste firmware-oppdateringen (1.4.0) som er tilgjengelig for alle våre Alpha-modeller, kan brukeren nå velge **å svare, avbryte og avslutte telefonsamtaler via trykknappen** på høreapparatet. Denne funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres i Oasis NXT 2022.2 under fanen *Betjeningsfunksjoner*, og er tilgjengelig for iPhone 11 eller nyere.



Oasis NXT 2022.2

En oppdatering av Oasis NXT ble sendt ut 31. august. Har du enda ikke oppdatert til siste versjon, anbefaler vi at dette gjøres så fort som mulig. [Oasis NXT](#) versjon 2022.2 kreves for å kunne tilkoble Alpha høreapparater med firmware 1.4.0. eller nyere.

Ta kontakt med oss i Cantec dersom du trenger hjelp til installeringen.