

Bernafon Encanta miniBTE R

Større fleksibilitet i én unik løsning




Bernafon

To tilpasningsnivåer, én kraftig enhet

Det kan være utfordrende å møte behovene til brukere med ulike hørselstap med eksisterende BTE-apparater. Nå, for første gang, dekker Bernafon Encanta miniBTE R med to tilpasningsnivåer (85 og 105) behovene til brukere med både moderate og store hørselstap – takket være en oppdatert, fleksibel og kraftig receiver.

Bedre hørsel, i dag og i morgen

Hørselstap kan utvikle seg over tid. Ettersom brukere med moderate hørselstap kan bevege seg mot grensen til alvorlige hørselstap, har du nå fleksibiliteten du trenger for å hjelpe dem å høre bedre i dag, i morgen og om mange år.

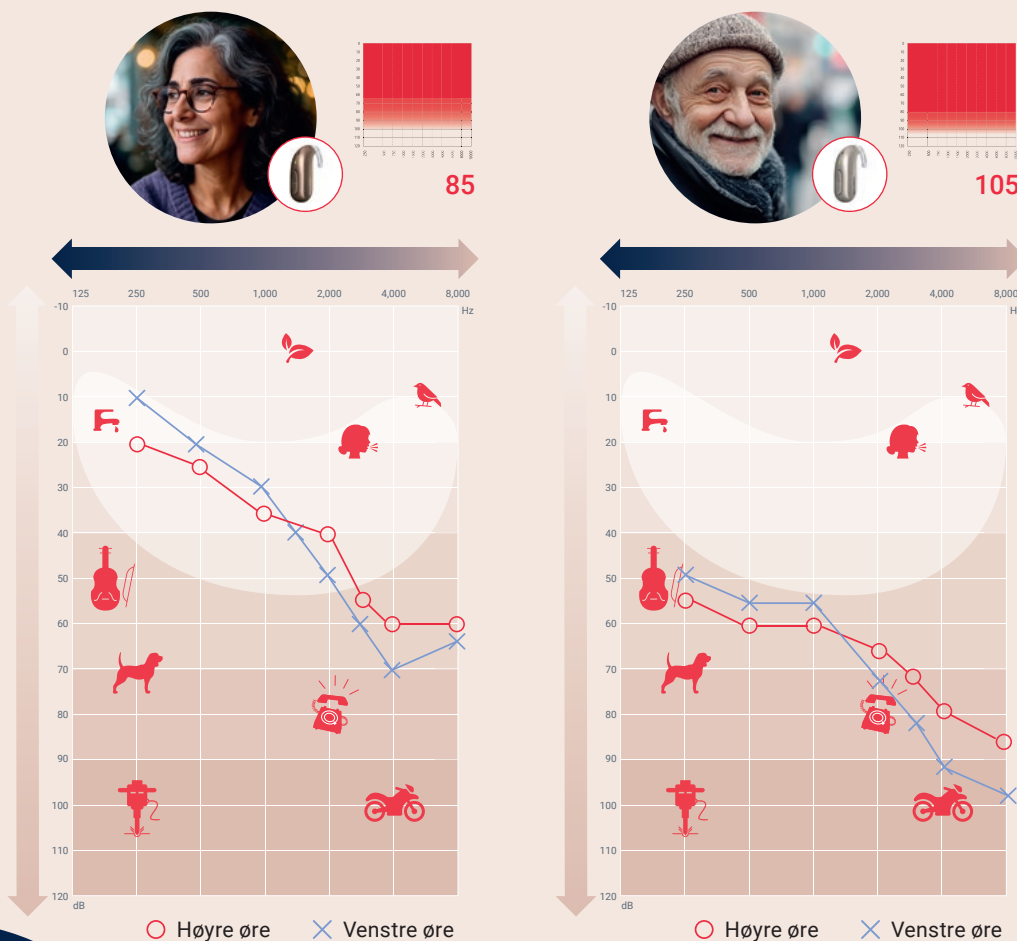

Du kan fortelle
brukerne dine

Bernafon Encanta er her
for å møte dine behov,
selv om hørselstapet ditt
endrer seg over tid

Vår beste teknologi, nå i en miniBTE

Bernafon Encanta-familien vokser. Når du tilpasser Encanta miniBTE R til dine brukere, får de det beste fra Bernafon - inkludert vår mest avanserte lydkvalitet, tilkoblingsmuligheter og ladeytelse. Alt i et kompakt og diskret design.

	Bernafon lydkvalitet	Smart Noise Management	Smart retningsmikrofon	Smart Sensor	Utvidet båndbredde
Encanta 400 Veldig støyende gruppesamtale					
Encanta 300 Støyende gruppesamtale					
Encanta 200 Støyende 1:1 samtale					
Encanta 100 Lav støy 1:1 samtale					

Oppnå mer med avansert tilkobling

Å holde brukerne dine tilkoblet hjelper dem å føle seg styrket. Bernafon Encanta tilbyr den nyeste tilkoblingen for både iPhone og Android™-brukere.

For iPhone-brukere

Made for
 iPhone | iPad

Bernafon Encanta er Made for iPhone, og gir sømløs toveislyd for hands-free samtaler og direktestreaming.*

For Android-brukere



Bernafon Encanta er kompatibel med Bluetooth® LE Audio-aktiverte telefoner,* som gir pålitelig toveis lydstreaming og hands-free kommunikasjon sammen med lavt energiforbruk.**



Bernafon Encanta kan enkelt pares med Bluetooth LE Audio-aktiverte telefoner med Google Fast Pair.



Bernafon Encanta høreapparater er nå Auracast™-aktiverte, noe som gir brukerne tilgang til offentlige sendinger via Bernafon-appen.

Apple, Apple logo, iPhone, iPad, iPod touch, og Apple Watch er trademarks av Apple Inc., registrert i U.S. og andre land. Android™ er et varemerke for Google LLC Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-merket og logoene er varemerker som eies av Bluetooth SIG. All bruk av slike merker av Demant skjer under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere. Easy LE-adapteren er produsert av Minami Acoustics Limited.

*For informasjon om kompatibilitet, vennligst besøk bernafon.com/compatibility


** I tilfeller der brukerens Android-telefon ikke har LE Audio-kompatibilitet, muliggjør Easy LE Adapter nå alle fordelene med LE Audio. Brukere kan benytte Easy LE-adapteren med Android-telefoner, nettbrett eller PC-er som har en USB-C-port. De fleste telefoner og nettbrett med 3,5 mm jack-kontakt vil imidlertid ikke fungere med adapteren, ettersom mange produsenter velger å føre lyden gjennom kontakten i stedet for USB-C-porten.

Forbedret taleforståelse

Bernafon Encanta miniBTE R ble klinisk testet på en gruppe med alvorlig hørselstap og har vist seg å gi de samme gode taleforståelsesfordelene som du kjenner fra Bernafon Encanta miniRITE på tvers av alle fire teknologinivåer.

Encanta 100 CONNECT

Tale i stille omgivelser-test

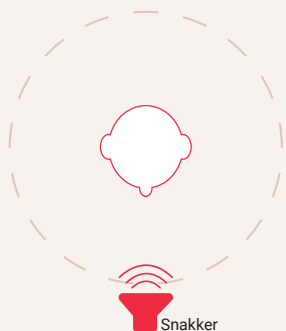

Encanta 100 sin Smart forsterkning viste seg å gi

16.5 dB SPL
bedre én-til-én-taleforståelse i stille omgivelser¹

Encanta 200 GO

Tale-i-støy-test



Encanta 200 sin Smart Noise Management viste seg å gi


2.1 dB SNR
bedre én-til-én-taleforståelse i stille omgivelser²

Encanta 300 ENGAGE og Encanta 400 PRO

Test av tale i støy med flere høyttalere

Encanta 300 & 400 sin Smart Noise Management med Smart Sensor-teknologi viste seg å gi

opptil 16%
bedre én-til-én-taleforståelse i en gruppe med støyende omgivelser³

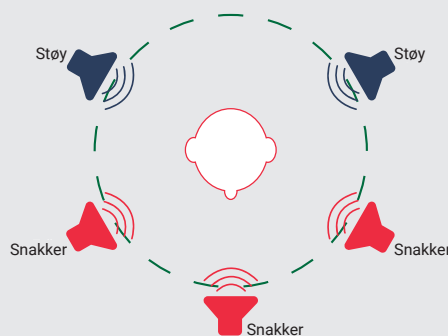

* Alle data ble samlet inn i en klinisk studie mellom april og mai 2025, inkludert 25 deltakere med en gjennomsnittsalder på 66 år, en gjennomsnittlig bruk av høreapparater på 23 år og en gjennomsnittlig symmetrisk hørselsterskel på 58,37 dB HL (125 Hz–8 kHz). Alle rapporterte data er vesentlig forskjellige fra deres respektive referanse.

¹ Encanta 100 sin taleforståelse (16,5 dB SPL) sammenligner SRT50 i stille omgivelser med og uten høreapparat.

² Encanta 200 sin taleforståelse i støy (OLSA, 2,1 dB SNR) sammenligner SRT50 med og uten støybegrenser (NAL-NL2).

³ Encanta 200, 300 og 400 (CCOLSA, henholdsvis 6 % og opptil 16 %) sammenligner oppnådd taleforståelse med og uten støybegrenser (referanse Encanta 200 med NAL-NL2)

Design og kvalitet du kan stole på

Vår minste miniBTE noensinne med to tilpasningsnivåer er designet for brukervennlighet og pålitelighet.



Bernafon Encanta miniBTE kommer i åtte attraktive farger



En løsning for enda flere behov

Bernafon Encanta er en portefølje av avanserte modeller, hver laget for optimal ytelse og komfort.

Unik miniBTE med to tilpasningsnivåer i én kraftig enhet



miniRITE R



CIC



Ultra-diskret IIC
9 av 10 IIC-kandidater får en usynlig løsning

En bekymringsfri hverdag

Våre pålitelige og effektive ladere gir brukerne dine en hel dags lading på bare 60 minutter. Selv bare 15 minutters lading gir dem 4 timer ekstra bruk.



2 timer = 100% ladet
60 minutter – 16 timer
30 minutter – 8 timer
15 minutter – 4 timer

Oversikt

Bernafon Encanta miniRITE R og miniBTE R

Bernafon Encanta	Encanta 400 PRO	Encanta 300 ENGAGE	Encanta 200 GO	Encanta 100 CONNECT
Smart Forsterkning				
Justeringsbånd	24	20	18	14
Frekvensområde	80 Hz – 10 kHz	80 Hz – 8 kHz	80 Hz – 8 kHz	80 Hz – 8 kHz
Smart Noise Management				
Omni Directionality-preferanse	Pinna-effekt	Pinna-effekt	Fast omni	Fast omni
Smart Directionality states	Høy (100% virkning)	Medium (80% virkning)	Lav (60% virkning)	-
Smart støyreduksjon	Veldig høy (opptil 12 dB)	Høy (opptil 10 dB)	Medium (opptil 8 dB)	Lav (opptil 6 dB)
Maskinlæring versjon	2.0	2.0	2.0	2.0
Smart Sensor	✓	✓	-	-
Reduksjon av impulsstøy	Maksimum (opptil 30 dB)	Veldig høy (opptil 25 dB)	Høy (opptil 20 dB)	Medium (opptil 15 dB)
Vind/kontaktstøybegrenser	✓	✓	✓	✓
Musikkopplevelse-program	✓	✓	✓	✓
Tilkobling				
iPhone – toveis lyd og direkte-streaming	✓	✓	✓	✓
Android – direktestreaming	✓	✓	✓	✓
Android-telefoner med Bluetooth LE Audio – toveis lyd, direktestreaming og hands-free kommunikasjon	✓	✓	✓	✓
Tap-kontroll for å svare telefonsamtaler	✓	✓	✓	✓
Bernafon App	✓	✓	✓	✓
Oppladbare – Full lading	2 timer	2 timer	2 timer	2 timer

RØD betegner nye funksjoner som kun er tilgjengelige i Bernafon Encanta høreapparater

The Bernafon Sound Experience

Hos Bernafon gjør vi det til vår jobb å styrke arbeidet til audiografen.
For å hjelpe dem med å levere utmerket omsorg, på deres premisser.
Fordi vi vet at ekspertise betyr noe. Profesjonell omsorg er nøkkelen som gjør
ekstraordinær teknologi til personlige løsninger. Løsninger som hjelper
mennesker med hørselstap å leve livet slik de ønsker. Som en del av Demant
Group, med over et århundre med erfaring og kunnskap, drar Bernafon nytte av
et av verdens sterkeste forsknings- og utviklingsteam innen hørselsområdet.
Vi bringer denne ekspertisen og engasjementet til alle audiografer– slik at
de kan tilby deres brukere en eksepsjonell lydopplevelse.

For mer informasjon om våre høreapparater, besøk Bernafons nettsted.

Hovedkontor

Bernafon
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark

Bilder: Kunstig intelligens (AI)-programmer har blitt brukt til å lage noen av bildene

Bernafon

Australia • Belgium • Brazil • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand •
Poland • South Africa • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA



YouTube

www.bernafon.com

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE